

### AKUMULATOROWY IRYGATOR DO HIGIENY JAMY USTNEJ

Model RL1501

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie informacje zawarte poniżej mają pomóc w prawidłowym użytkowaniu urządzenia tak, aby nie spowodować urazów ciała ani uszkodzeń sprzętu.

#### PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ ZAGROŻENIA

- ⚠ Małe dzieci, niemowlęta, osoby niepełnosprawne nie mogą używać urządzenia. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ⚠ Nie modyfikuj urządzenia. Nie demontuj ani nie naprawiaj go.
- ⚠ Nie odkładaj urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub wpaść do umywalki.
- ⚠ Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody i jest podłączone do ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od zasilania.
- ⚠ Nie używaj podczas kąpieli.


#### OSTRZEŻENIA

- ⚠ Irygatory do higieny jamy ustnej mogą być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia.
- ⚠ Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub braku wiedzy i doświadczenia mogą używać irygatorów wyłącznie pod nadzorem dorosłych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
- ⚠ Urządzenie nie jest zabawką.
- ⚠ Urządzenie może być ładowane wyłącznie ładowarką dostarczoną w zestawie.
- ⚠ Urządzenie zawiera wbudowany akumulator i należy je zutilizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ⚠ Nie napełniaj pojemnika wodą cieplejszą niż 40°C.
- ⚠ Nie używaj ładowarki, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę.
- ⚠ Nie trzymaj kabla na podgrzewanych lub gorących powierzchniach.
- ⚠ Nie używaj irygatora, jeśli zgubiłeś dyszę.
- ⚠ Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- ⚠ Nie używaj w innych celach niż czyszczenie jamy ustnej.
- ⚠ Przechowuj końcówkę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jest ona na tyle mała, że może utknąć w gardle podczas połknięcia.
- ⚠ Niektóre płyny do płukania ust mogą uszkodzić obudowę

lub pojemnik na wodę; dlatego zachowaj ostrożność podczas stosowania płynów do płukania z irygatorem i unikaj tych o właściwościach żrących i silnie barwiących.

- ⚠ Osoby z bólem zęba lub dziąsła mogą nie być w stanie używać irygatora. W takim przypadku należy skontaktować się z dentystą.
- ⚠ Nie dociskaj dyszy zbyt mocno do zębów, ani do dziąseł; może to uszkodzić dziąsła.


### OPIS URZĄDZENIA

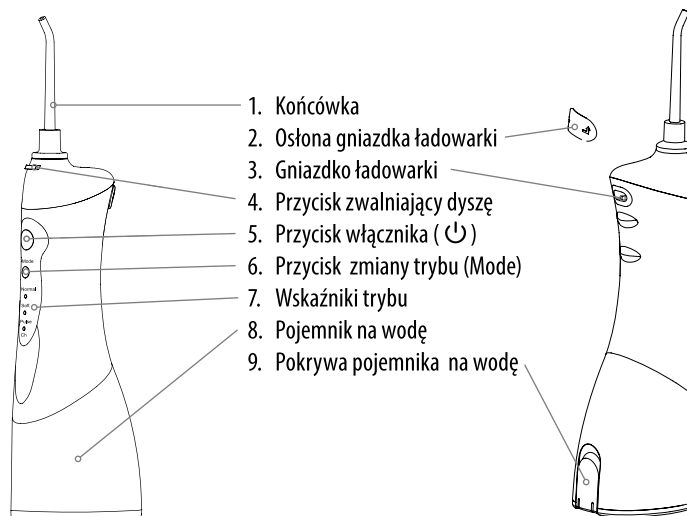

- ⚠ Uwaga: W części głównej urządzenia mogą pozostać resztki wody destylowanej (pojemnik, rurka ssąca, itd.) użytej do przeprowadzenia testu wydajności (przepływ wody); nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.

### ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Zdejmij osłonę gniazdka ładowarki i sprawdź, czy wewnątrz nie ma resztek wody.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do urządzenia
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

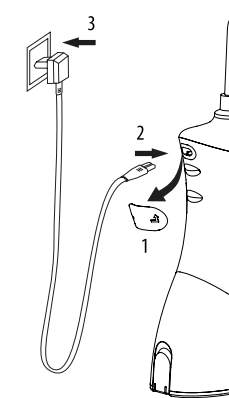


- ⚠ Podczas ładowania wskaźnik „CH” miga. Po pełnym naładowaniu urządzenia wskaźnik będzie się świecił ciągle.
- 4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od sieci elektrycznej, wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazda w urządzeniu i załóż osłonę na gniazdko ładowarki.
- ⚠ Uwaga: Jeśli wskaźnik „CH” świeci się podczas lub po irygacji, oznacza to, że należy naładować baterię. Ładowanie baterii do pełna może potrwać nawet 8 godzin.


### UŻYCIIE IRYGATORA

- ⚠ **Przy pierwszym uruchomieniu może się zdarzyć, że urządzenie będzie zapowietrzone** – w takim przypadku należy lekko zassać ustami wodę przez końcówkę, a urządzenie zacznie normalną pracę.

1. Nałóż dyszę na urządzenie.

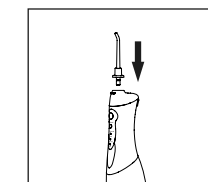

- Otwórz pokrywkę pojemnika na wodę, napełnij pojemnik wodą o temperaturze maksymalnej 40°C, zamknij pokrywę. Można też zdjąć pojemnik na wodę, napełnić wodą, a następnie przyłączyć pojemnik z powrotem do urządzenia.

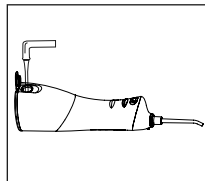

- Naciśnij przycisk zmiany trybu (**Mode**), aby wybrać żądany tryb. Podczas irygacji możesz zmienić tryb pracy.

**Tryb normalny:** czyszczenie zwykłe

**Tryb delikatny:** delikatne czyszczenie wrażliwych dziąseł

**Tryb pulsacyjny:** czyszczenie i masowanie dziąseł


- Trzymaj urządzenie pionowo tak, aby końcówka dyszy była skierowana na zęby.
- Trzymaj usta lekko otwarte, aby woda mogła wypływać.

- Naciśnij przycisk włącznika (⏻), aby rozpocząć irygację.

- Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł tak, aby końcówka dyszy była pod kątem 90° do dziąseł

- Przesuń powoli strumień wody wzdłuż zębów

- Czyść dokładnie przestrzenie międzyzębowe, miejsca wokół koron, mostów i aparatów ortodontycznych

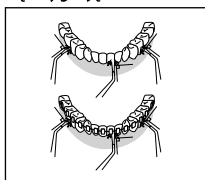

- W razie potrzeby zmiany końcówki na inną należy najpierw nacisnąć przycisk włącznika (⏻) by wyłączyć urządzenie. Następnie wcisnąć przycisk zwolnienia dyszy, wymienić dyszę i ponownie włączyć urządzenie.

- Po zakończeniu irygacji naciśnij przycisk włącznika (⏻), aby wyłączyć urządzenie.

## PO UŻYCIU URZĄDZENIA

- Otwórz pojemnik na wodę i wylej wodę, która została.
- Naciśnij przycisk włącznika (⏻), aby włączyć urządzenie na maksymalnie 15 sekund i osusz w ten sposób wnętrze urządzenia.
- Naciśnij przycisk włącznika (⏻), aby wyłączyć urządzenie

i zamknij pokrywę pojemnika na wodę.

- Wytrzyj urządzenie suchą ściereczką.

⚠ Uwaga: Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się bakterii, upewnij się, że w pojemniku nie pozostała woda. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wytrzyj i wysusz urządzenie przed schowaniem.

## KONSERWACJA

⚠ Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie wody lub neutralnego środka czyszczącego. Nigdy nie używaj żrących lub ściernych środków (np. octu lub środków do usuwania kamienia); mogą one uszkodzić urządzenie. Nie myj w wodzie o temperaturze powyżej 50°C. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj w miejscach o wysokiej temperaturze.

## URZĄDZENIE GŁÓWNE

- Wyczyść za pomocą ściereczki z mydłem w płynie i wytrzyj suchą ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wysusz po umyciu.

## POKRYWKA POJEMNIKA NA WODĘ

- Wytrzyj zabrudzenia za pomocą ściereczki.

## KOŃCÓWKA

- Umyj wodą i wytrzyj miękką ściereczką.
- Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy.

## RURKA SSĄCA

- Umyj wodą i wytrzyj miękką ściereczką.
- Nie wyginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj rurki.

## POJEMNIK


- Umyj wodą i wytrzyj miękką ściereczką.
- Wysusz pojemnik, gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                       | Przyczyna  | Rozwiązanie   |
|---|--|---|
| Nie działa                                    | Dopiero kupiłeś produkt lub nie był używany ponad 3 miesiące | Naładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin   |
| Działa tylko kilka minut nawet po naładowaniu | Kończy się żywotność baterii                                 | Skontaktuj się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego   |
|   | Czas ładowania był za krótki                                 | Naładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin   |
| Ciśnienie wody jest bardzo niskie             | Końcówka jest zanieczyszczona                                | Wymień końcówkę   |
|   | Końcówka jest zniekształcona                                 |   |
|   | Filtr jest zanieczyszczony                                   | Wyczyść filtr   |
| Woda nie wydostaje się na zewnątrz            | Pojemnik jest pusty  | Napełnij pojemnik   |
|   | Urządzenie jest za bardzo przechylone podczas użytkowania    | Trzymaj urządzenie pionowo  |
|   | Urządzenie jest zapowietrzane                                | Napełnij pojemnik wodą, włóż końcówkę do ust, włącz urządzenie, a następnie lekko zassij wodę do ust. |

## UTYLIZACJA I OBJAŚNIENIA SYMBOLI

UTYLIZACJA NIEOPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych.

 W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.



Produkt posiada certyfikat CE

## DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTED BY

Novamed Sp. z o.o.



ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland  
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

## PRODUCENT / MANUFACTURER

 Shenzhen Relish Technology Co.,Ltd

No.4 Relish Building, No.4 Neihuan Road, Shanxia Industrial Zone, Pinghu St., Longgang District, 518111, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
Made in China / Wyprodukowano w Chinach  
for / dla Novamed Sp. z o.o.