


NeoBar®

Stabilizator rurki intubacyjnej

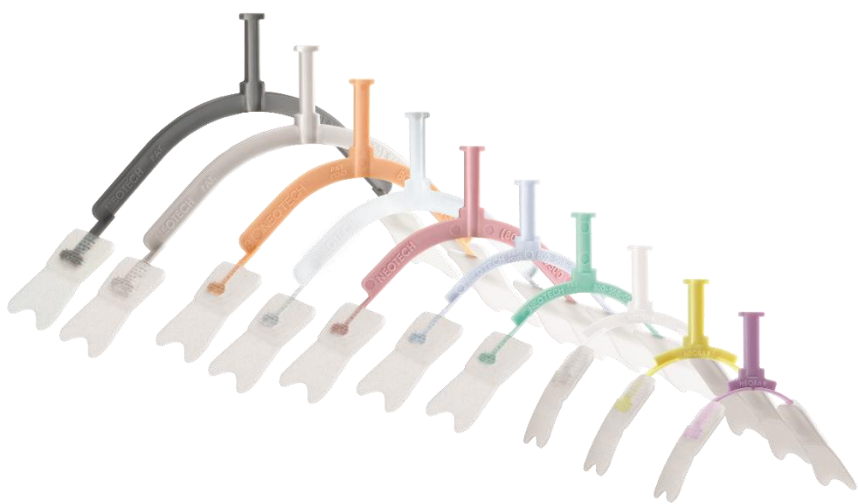

Właściwości i zalety

- Mocowanie za pomocą przyjaznych plastrów hydrokoloidowych dla skóry NeoBond®
- Zaprojektowany aby zmniejszyć ryzyko samoistnej ekstubacji, pomaga zapobiegać urazom podniebienia oraz umożliwia dogodniejszą pielęgnację jamy ustnej
- Brak plastrów w pobliżu nosa lub jamy ustnej
- Możliwość łatwego usunięcia w przypadku zagrożenia
- Rozmiary oznaczone kolorami
- Nie zawiera naturalnego lateksu kauczukowego ani plastyfikatora DEHP
- Pojedynczo pakowane

Nr kat.	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.
N709	Mini	Purpurowy	5 szt. / op.
N710	Ultra	Żółty	5 szt. / op.
N711	Micro	Biały	5 szt. / op.
N712	Small	Zielony	5 szt. / op.
N713	Large	Niebieski	5 szt. / op.
N714	XL	Różowy	5 szt. / op.
N715	Macro	Przezroczysty	5 szt. / op.
N716	Jumbo	Szary	5 szt. / op.



U.S. Patent
#D434,496; #6,050,263

NeoBar®

Stabilizator rurki intubacyjnej

ZASTOSOWANIE

Stabilizator NeoBar służy do unieruchamiania rurki intubacyjnej. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

Krok 1

Po zaintubowaniu pacjenta wybierz odpowiedni rozmiar stabilizatora NeoBar, korzystając z dostarczonej taśmy mierniczej

Umieść punkt środkowy taśmy na linii przegrody nosowej i rozwiń taśmę w stronę ucha. Kolorowy segment taśmy znajdujący się w centrum ucha reprezentuje rozmiar stabilizatora NeoBar.

Krok 2

Aby umożliwić prawidłowe przymocowanie, umieść stabilizator NeoBar na środku ust między górną i dolną wargą. Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust. Plastry powinny znajdować się bezpośrednio przed uszami.

Krok 3

Oczyść i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną prawidłowo zamocowane.

Olejki i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

Krok 1

Przed usunięciem warstwy ochronnej ogrzewaj plastry w dłoniach przez 60 sekund. Można je również ogrzewać przy użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego przez 10-15 sekund.

Krok 2

Usuń warstwę ochronną. Umieść plastry przed uszami w obszarze kości jarzmowych i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.

Uwaga: Należy się upewnić, że rurka intubacyjna znajduje się poniżej ramki, aby zmniejszyć nacisk na podniebienie oraz dziąsła.

Krok 3

Do przyklejenia rurki intubacyjnej użyj taśmy przylepnej o szerokości około 12 mm z papieru lub tkaniny. Najpierw należy owinać całkowicie ramkę NeoBar, a następnie kontynuuj owijanie ramki wraz rurką.

Usuwanie

Krok 1

Wymieniaj stabilizator Neobar na nowy co 5 dni lub częściej w zależności od procedury szpitalnej.

Krok 2

Odwiń taśmę, aby odłączyć rurkę intubacyjną od ramki NeoBar.

Krok 3

Nasącz plastry wodą lub solą fizjologiczną.

Krok 4

Powoli odklej plastry od skóry, używając wacika nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.

Usuwanie w sytuacji zagrożenia

Ostrożnie przetrnij cienki segment stabilizatora NeoBar nożyczkami z zaokrąglonymi końcówkami w punkcie zetknięcia ramki z plastrem.

Usuń stabilizator NeoBar wraz z rurką intubacyjną.

Następnie usuń plastry.

INFORMACJE OGÓLNE

Materiały produktu

NeoBar: polipropylen

Plastry hydrokolooidowe: NeoBond® Hydrokolooidowy, włóknina

Zakładki akrylowe: Przyjazna pianka, włóknina, klasa medyczna klej akrylowy

Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego: Nie

Wykonane z plastyfikatora DEHP: Nie

Rozmiar

N709 Mini (fioletowy)

N710 Ultra (żółty)

N711 Mikro (biały)

N712 Mały (zielony)

N713 Duży (niebieski)

N714 XL (różowy)

N715H Macro (przezroczysty)

N716H Jumbo (szary)

Opakowania

Pakowane pojedynczo: Tak

Rodzaj opakowania: Pudełko

Pudełko z dozownikiem: Tak

Odwiedź stronę neotechproducts.com, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje.

Worki polietylenowe są biodegradowalne. Pudełka są drukowane z przyjaznym dla środowiska atramentem sojowym na materiale wtórnym.

PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Stabilizator NeoBar nie powinien być stosowany w przypadku infekcji skórnej lub uszkodzenia skóry uniemożliwiającego prawidłowe przymocowanie plastrów.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Stabilizator NeoBar powinien być używany wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Jeżeli konieczne jest usunięcie produktu w sytuacji zagrożenia, zob. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Usuwanie w sytuacji zagrożenia.


Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Unia Europejska: MDR EU 2017/745

Każdy poważny incydent związany z tym wyrobem należy zgłosić spółce Neotech Products i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



Neotech Products LLC • 28430
Witherspoon Parkway • Valencia, CA
91355 USA

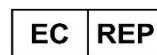

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague,
The Netherland



KROBAN Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 182/451; 90-368 Łódź
NIP: 7252296972

info@kroban.pl
www.kroban.pl
#KROBANteam

tel.: 512 046 260
667 987 771
fax: 42 288 48 30