

BIOCREDIT COVID-19 Ag


Testy do wykrywania antygenów koronawirusa SARS-CoV 2

- » Pierwsze komercyjne wdrożenie technologii Cząsteczki Czarnego Złota na świecie (wysoka czułość i swoistość)
- » Przyjazny dla użytkownika dwukolorowy system (Linia kontrolna: Czerwona, Linia testowa: Czarna)
- » Szybki czas testu (5~8 minut)
- » Proste wykrywanie przeciwciał SARS-CoV2

Podstawowa technologia cząsteczki czarnego złota



Technologia zróżnicowanego koniugatu czarnego złota

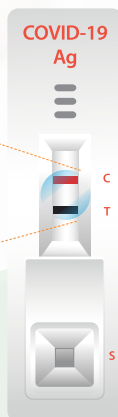

Dwukolorowy system

Wystarczy 8 minut!



YouTube BIOCREDIT COVID-19



BIOCREDIT COVID-19 Ag szybki test diagnostyczny

Przeznaczenie	Wykrywanie antygenów SARS-CoV2
Opakowanie	20 testów w zestawie
Przechowywanie	1~40°C
Typ próbek	jama nosowo-gardłowa/nosogardziel
Okres ważności	12 miesi cy od daty produkcji
Oczekiwanie na wynik	5~8 minut

Szybki test diagnostyczny **COVID-19**

PROCEDURA

Włożyć wymazówkę z próbką i zakręcić wymazówką 5 do 10 razy.

Wyjąć wymazówkę, delikatnie ściskając końcówkę wymazówki.

Dokładnie zamknąć próbkę z rozcieńczalnikiem próbki za pomocą kapturka z filtrem.


Odrożyć próbkę do rozcieńczania próbek i delikatnie ścisnąć, aby wycisnąć od 3 do 4 kropli (90~150µl) do okienka testowego przyrządu.

Odczytać wyniki w ciągu 5 do 8 minut.



INTERPRETACJA WYNIKÓW

UJEMNY

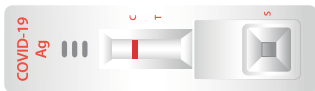


Jeden **czerny** pasek „C” w okienku wyników.

DODATNI



Dwa paski; **czarna linia testowa „T”** i **czerna** linia kontrolna „C” w okienku wyników.

NIEWAŻNY

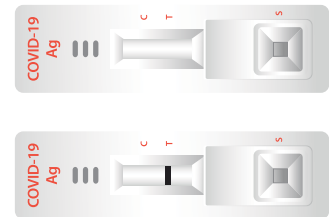

Brak paska „C” w okienku wyników. Zaleca się ponowne przetestowanie próbki.

[Kontakt]

P.I. H. VARIA Sp. z o.o. ul. Biecka 10, 60-473 Poznań
Zakład Produkcji Medycznej: ul. Witkowa 3, 62-090 Rokietnica k/Poznania
tel: 61 814 52 03, @ marketing@varia-poznan.pl www.varia-poznan.pl

