


NeoPulse™

Lekka, regulowana opaska pulsoksymetryczna

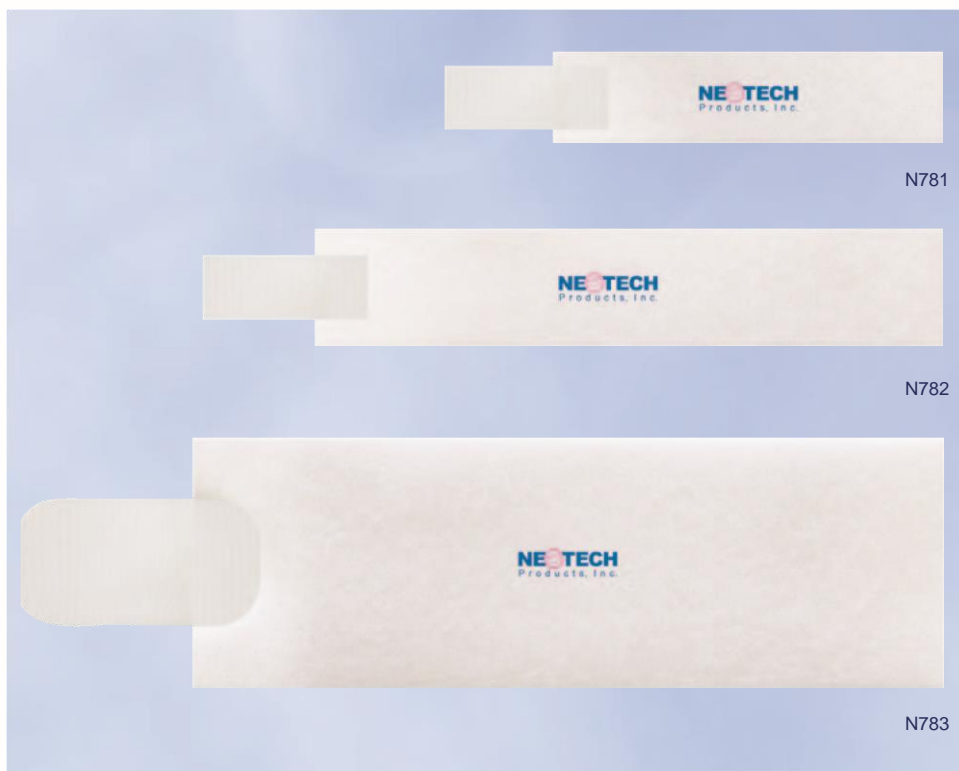

Właściwości i zalety

- Wykonana z unikalnej opatentowanej pianki NeoFoam®
- Mięka i wyjątkowo przyjazna dla skóry
- Łatwo dostosowuje się do każdego rozmiaru kończyny
- Lekka i wygodna
- Nie zsuwa się, zapewniając stałe i pewne połączenie

Nr katalogowy	Opis	Ilość w opakowaniu
N781	Small	100/op.
N782	Large	100/op.
N783	X-Large	100/op.



Wyprodukowane w USA

NeoPulse™

Lekka, regulowana opaska pulsoksymetryczna

ZASTOSOWANIE

Opaska NeoPulse służy do mocowania czujnika pulsoksymetru. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

KROK 1

Zamocuj czujnik pulsoksymetru zgodnie z procedurami szpitalnymi.

KROK 2

Zamocuj czujnik pulsoksymetru zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Owiń opaskę NeoPulse wokół stopy i czujnika pulsoksymetru oraz ostrożnie przymocuj rzep do opaski.

Uwaga: Produkt można przyciąć w celu prawidłowego zamocowania. Należy się upewnić, że opaska nie jest zamocowana zbyt ściśle. Rzep powinien całkowicie nakładać się na opaskę.

KROK 3

Sprawdź stopę po owinięciu, aby się upewnić, że cyrkulacja powietrza jest dostateczna.

KROK 4

Wymieniaj opaskę NeoPulse na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

W przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.

INFORMACJE OGÓLNE

Materiały produktu

NeoFoam, tkanina haczykowa

Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego: Nie

Wykonane z plastyfikatorem DEHP: Nie

Pełne informacje o materiałach można znaleźć w MSDS.

Wymiary

N781 Small: 75 mm x 20 mm

N782 Large: 125 mm x 25 mm

N783 XL: 150 mm x 50 mm

Opakowanie

Pakowane pojedynczo: TAK

Rodzaj opakowania: Worek polietylenowy

Pudełko z dozownikiem: TAK

Odwiedź stronę neotechproducts.com, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje lub pobrać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

Worki polietylenowe są biodegradowalne. Pudełka są drukowane przyjaznym dla środowiska tuszem sojowym na materiale nadającym się do recyklingu.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.