

## EZ-Hold®

### Plaster hydrokoloidowe do mocowania kaniul oraz sond

#### Właściwości i zalety

- Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego
- Zaginana osłonka redukuje naprężenia wywierane na rurkę
- Idealne rozwiązanie do mocowania kaniul nosowych i sond
- Skala zagłębienia sondy jest widoczna dzięki przezroczystej osłonce plastra
- Łatwe w użyciu
- Skrzydełko może być wielokrotnie przyklejane i odklejane



N756



N757



N758



<i>Nr katalogowy</i>	<i>Opis</i>	<i>Ilość w opakowaniu</i>
N756	Mini	100/op.
N757	Standard	100/op.
N758	Extra Large	100/op.

# EZ-Hold® - wskazówki stosowania

## ZASTOSOWANIE

Plaster EZ-Hold służy do mocowania i podtrzymywania kaniul nosowych przy wspomaganiu oddechu.

## ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

### Przygotowanie

Oczyść i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster EZHold nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.



### Zakładanie

#### Krok 1

Przed usunięciem warstwy ochronnej ogrzewaj plaster EZ-Hold w dłoniach przez 60 sekund. Można go również ogrzewać przy użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego przez 10–15 sekund.

#### Krok 2

Usuń białą papierową warstwę ochronną, a następnie usuń przezroczystą plastikową folię z przyklepnej warstwy hydrokoloidowej


#### Krok 3

Umieść przyklepną warstwę plastra na skórze i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.

#### Krok 4

Usuń drugą warstwę ochronną i zawiń skrzydełko na przewód/kaniulę.

Uwaga: Podnieś skrzydełko, jeżeli konieczne jest przesunięcie lub usunięcie przewodu/ kaniuli.

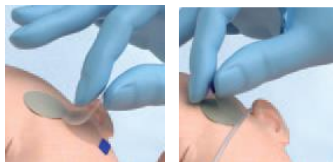

## Usuwanie

### Krok 1

Wymieniaj plaster EZ-Hold na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

### Krok 2

Podnieś skrzydełko, aby usunąć przewód/kaniulę.

### Krok 3

Nasącz plaster EZ-Hold wodą lub solą fizjologiczną.

### Krok 4

Powoli odklej plaster EZ-Hold od skóry, używając wacika nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.



## INFORMACJE OGÓLNE

### Materiały produktu

Hydrokoloid NeoBond, folia PET, akrylowy klej wrażliwy na nacisk (nie styka się ze skórą), kauczukowy klej wrażliwy na nacisk (nie styka się ze skórą),

Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego: Nie

Wykonane z plastyfikatorem DEHP: Nie

Pełną informację o materiałach można znaleźć w MSDS.

### Rozmiary

N756 Mini zamknięte: 13 mm x 25 mm

N757 Standard średnica zamknięta: 25 mm

N758 XL zamknięte: 25 mm x 33 mm

## PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Przy przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster EZHold nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.



KROBAN Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 182/451,  
90-368 Łódź

NIP: 7252296972 REGON: 385452206

mobile:

+ 48 512 046 260

fax:

+ 48 42 636 56 09

e-mail:

info@kroban.pl

www.kroban.pl