

INTRARACK

This stationary rack system can be used for storage of all kinds of goods.

INTRARACK

To stacjonarny i nowoczesny system magazynowania dużej ilości towarów.

**INTRARACK. ORGANISING YOUR AVAILABLE SPACE, EASIER THAN EVER BEFORE**

The Intrarack system is a modular system, made of chromed steel. It is composed of posts and mesh trays. Each post is fitted with an adjustable rubber foot.

This simple storage system provides a great solution for the most diverse products used in healthcare. The customer determines the composition and dimensions of the rack system in view of an optimal use of the available space.

The Intrarack system also offers the possibility to store goods with exceptional dimensions. The loading capacity is 150 kg per shelf, equally divided across the shelf. Stationary rack max. 600 kg.

The system is also available in a mobile version, the Intrarack trolley.


INTRARACK. ORGANIZOWANIE TWOJEJ PRZESTRZENI ŁATWIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK PRZEDTEM

INTRARACK to modułowy system magazynowania zrobiony z chromowanej stali. Składa się ze statywów i półek z oczkami. Każdy statyw posiada regulowane gumowe nóżki.

Ten prosty system może dostarczyć wiele rozwiązań dla najróżniejszych produktów. Klient określa kompozycję dla najlepszego wykorzystania powierzchni.

System INTRARACK oferuje możliwość magazynowania towarów dużych rozmiarów lub nietypowych.

System jest też dostępny w wersji ruchomej.

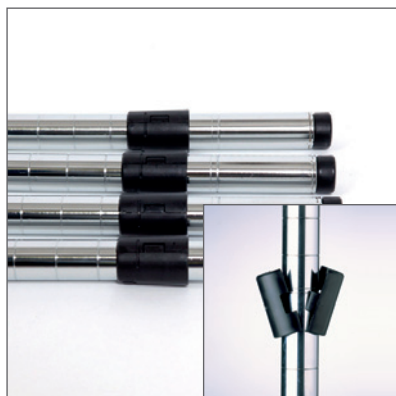

Take the posts and the cone-shaped sleeves out of the box. Join the sleeves at the bottom of the posts. The sleeves lock into the rings of the posts.

Do statywu mocuje się stożkowe podpory półek.



Slide the posts into the corners of the first shelf. The sleeves will secure the shelf.

Przesuń statyw przez rogi półki. Półka sama zablokuje się na stożkowych podporach.



Put the posts and the bottom shelf upright. Calculate the height between the shelves. You can do this by counting the number of rings between the shelves.

Postaw regał. Oblicz odległość pomiędzy następnymi półkami odliczając wytłoczone pierścienie na statywie.



Secure the sleeves for the second shelf in the desired position. Slide the second shelf over the posts, onto the sleeves.

Zamontuj podpory pod następną półkę. Wsuń półkę w statyw.



Make sure that each shelf is fitted securely on the sleeves. You may wish to use a small hammer to do this.

Upewnij się że każda półka dobrze zablokowała się na podporach.



Repeat steps 4 and 5 until you have assembled the entire rack. Adjust the feet if necessary.

Powtórz kroki 4 i 5 aby złożyć cały regał. Jeżeli to konieczne wypoziomuj regał ruchomymi stopkami.



FIXED POST REGULOWANE NÓŻKI

Article Number Numer artykułu	Dimensions (H) Wymiary (H)	Description Opis
16003 00021	1650 mm	DP 64 S
16003 00023	1800 mm	DP 72 S
16003 00025	2180 mm	DP 84

WIRE SHELF DEPTH 456 MM PÓŁKI O GŁĘBOKOŚCI 456 MM



Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16003 00090	456 x 456 mm	WS 1818
16003 00091	456 x 610 mm	WS 1824
16003 00092	456 x 764 mm	WS 1830
16003 00093	456 x 912 mm	WS 1836
16003 00094	456 x 1062 mm	WS 1842
16003 00095	456 x 1217 mm	WS 1848
16003 00096	456 x 1520 mm	WS 1860
16003 00097	456 x 1826 mm	WS 1872

WIRE SHELF DEPTH 610 MM PÓŁKI O GŁĘBOKOŚCI 610 MM



Article Number Numer artykułu	Dimensions (WxD) Wymiary (SxG)	Description Opis
16003 00105	610 x 610 mm	WS 2424
16003 00106	610 x 764 mm	WS 2430
16003 00107	610 x 912 mm	WS 2436
16003 00108	610 x 1062 mm	WS 2442
16003 00109	610 x 1217 mm	WS 2448
16003 00110	610 x 1520 mm	WS 2460
16003 00111	610 x 1826 mm	WS 2472



SHELF DIVIDER PRZEGRODA PÓŁKI

Article Number Numer artykułu	Dimensions (D) Wymiary (P)	Description Opis
16003 00068	456 mm	SD 18
16003 00070	610 mm	SD 24



CLOTHING ROD

DRAŻEK NA WIESZAKI UBRANIOWE

Article Number Numer artykułu	Dimensions (W) Wymiary (L)	Description Opis
16003 00013	570 mm	CR 22
16003 00014	1180 mm	CR 46
16003 00015	1485 mm	CR 58



S-CLAMP

KLAMRA-S

Article Number Numer artykułu	Description Opis
16003 00032	HOOK



LABEL HOLDER

RAMKA NA ETYKIETĘ

Article Number Numer artykułu	Description Opis
16003 00030	EH

SHELF EDGE

OGRANICZNIK PÓŁKI



Article Number Numer artykułu	Dimensions (W) Wymiary (D)	Description Opis
16003 00072	456 mm	SE 18
16003 00074	610 mm	SE 24
16003 00075	764 mm	SE 30
16003 00076	912 mm	SE 36
16003 00077	1062 mm	SE 42
16003 00078	1217 mm	SE 48
16003 00079	1520 mm	SE 60