

FLEXAVISION F3 package



**UNIWERSALNY CYFROWY ZDALNIE STEROWANY STÓŁ
RENTGENODIAGNOSTYCZNY FLEXAVISION F3
DO FLUOROSKOPII I RADIOGRAFII Z PŁASKIM PANELEM FPD
FIRMY SHIMADZU**


Zdalnie sterowany cyfrowy aparat FLEXAVISION F3

wyposażony jest w przenośny, dynamiczny detektor cyfrowy (FPD).

System ten pozwala na wykonywanie fluoroskopii oraz cyfrowej radiografii, dzięki czemu umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni w sali badań. Zastosowany dynamiczny detektor pozwala na akwizycję obrazów do 15 klatek na sekundę. Panel o rozmiarze obszaru roboczego 14'' x 17'' [35 cm x 43 cm] umożliwia wykonywanie badań o szerokim zakresie



Płaski dynamiczny panel detekcyjny FPD

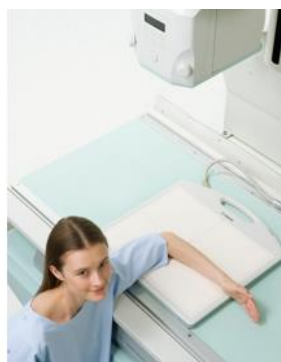

Charakterystyka:

- przenośny, dynamiczny detektor cyfrowy 14" x 17"

[35 cm x 43 cm] umożliwiającą akwizycję obrazów wysokiej rozdzielczości



- system cyfrowej obróbki obrazu pozwalający na uzyskiwanie czystych, przejrzystych badań w czasie rzeczywistym
- możliwość wyjęcia kratki przeciwrzproszeniowej dla zmniejszenia koniecznej dawki promieniowania



- filtry wyostrzające promieniowanie poprzez obcinanie nie diagnostycznego miękkiego widma promieniowania X
- intuicyjna obsługa systemu cyfrowego
- obsługa funkcji DICOM
- skopia pulsacyjna, o zmiennych parametrach impulsów, pozwalająca na znaczne zmniejszenie dawki promieniowania przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu
- zdalne sterowanie ruchami systemu ze sterowni
- regulowana wysokość stołu
- łatwy dostęp do pacjenta z każdej strony stołu





Producent: Shimadzu Corporation Japonia