



ProFacial to technologia, oferująca efekt głębokiego oczyszczania i odmładzania twarzy, skutecznej eliminacji zmarszczek oraz remodelingu kolagenu. Oprócz tego na on również działanie przeciwstarzeniowe, a to wszystko w ramach jednej procedury zabiegowej! ProFacial - urządzenie typu all-in-one, oferujące wielopłaszczyznowe, efektywne zabiegi na twarzy, łączące 4 technologie – Peeling Wodny, Lifting jonowy, Multipolarny RF oraz Ultradźwięki.


Połączenie zalet każdej z tych technologii, w kompleksową pielęgnację skóry, gwarantuje natychmiastowy efekt. Zabieg rozpoczyna się od rozgrzania tkanki za pomocą RadioFrekwencji - w celu otwarcia kanalików w naskórku do późniejszej aplikacji roztworów bogatych w składniki aktywne oraz w celu poprawy napięcia skóry i remodelingu kolagenu. Aby zmaksymalizować efekt tego najbardziej wszechstronnego, odmładzającego zabiegu - trakcie peelingu wodnego wykorzystywane są roztwory bogate w składniki aktywne:

- Roztwór PS1 zawierający kwas mlekowy i kwas glikolowy, do usunięcia keratyny i oczyszczenia porów, zapewnia gładką teksturę skóry,
- Roztwór PS2 zawierający kwas salicylowy, do pielęgnacji skóry trądzikowej, oczyszcza z zaskórników, nadmiaru sebum, działa antibakteryjnie,
- Roztwór PS3 bogaty w składniki odżywcze EGF (Naturalny Czynniki Wzrostu) i GFF (Filtrat Fermentacyjny Galaktomycesu) rozświetla, oczyszcza i uelastycznia skórę.

Idealnym dopełnieniem procedury jest wykorzystanie biocelulozowych masek Arosha Matrix Tech ze składnikami aktywnymi, których absorpcja przez skórę wspomagana jest za pomocą Ultradźwięków. Dodatkowo, stymulują one fibroblasty, poprawiają elastyczność skóry oraz aktywują procesy naturalnej lipolizy. Na zakończenie stymulujemy tkankę za pomocą Liftingu Jonowego skutecznie wzmacniającego efekt.

ProFacial - technologia:

- **Peeling Wodny**
 - Kwas mlekowy
 - Kwas salicylowy

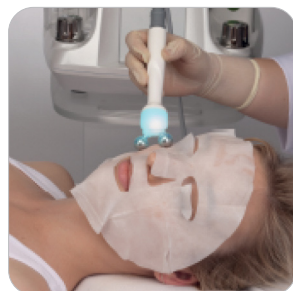



- Silnie wzbogacony roztwór wodny zawierający EGF
Głębokie oczyszczenie i peeling wykorzystujący 3 roztwory
- **Multipolarny RF**
 - Wytwarza ciepło w tkance za pomocą bezpiecznej, nisko-prądowej, wysoko-częstotliwościowej energii (RadioFrekwencja)
 - Remodelowanie kolagenu, rozpuszczanie komórek tłuszczowych i cellulitowych, poprawa cyrkulacji krwi
- **Lifting jonowy**
 - Stymulacja tkanki skórnej, mięśni, włosów przy użyciu prądu
 - Zapewnia elastyczność skóry i sprężystość włosów i zwiększa przezskórne podawanie substancji aktywnych w wyniku jontoforezy
- **Ultradźwięki**
 - Mikro-wibracje wywoływane cykliczną falą ultradźwiękową
 - Aktywacja procesu lipolizy i dyfuzji, efekt masażu skóry, efekt oczyszczenia, efekt termiczny, regeneracja skóry oraz zwiększenie absorpcji substancji aktywnych

Atuty ProFacial:

- Rozwiązanie typu All-in-one łączące 4 technologie: Peeling Wodny, Lifting jonowy, Multipolarny RF i Ultradźwięki
- Minimalizacja straty roztworu i łatwa wymiana roztworu za sprawą opatentowanego systemu rozłączania
- Łatwy i bezpośredni system sprawdzania poziomu roztworu i łatwa wymiana filtrów
- Wygodne sterowanie przepływem roztworu i poziomem zassania za pomocą cyfrowego pokrętła
- Wygodny i przyjazny użytkownikowi interface

Dane techniczne:

- Końcówka Tornado: Duża, Mała
- Zakres próżni: maks. 680 mmHg
- RF: 1MHz, Multipolarny (6 biegunów)
- Lifting Jonowy: 500 Hz (Cyfrowy Lifting Jonowy)
- Ultradźwięki: 1MHz / 2W / 1cm²
- Wyświetlacz: 7" kolorowy dotykowy LCD
- Napięcie wejściowe: 100-120V, 50/60Hz / 220-240V, 50/60Hz
- Poziom hałasu: 50 dB