



MASKA HALO

REWOLUCYJNA OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

INTELIŻENTNA TECHNOLOGIA DLA OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

CleanSpace® Halo jest systemem filtrującym z własnym zasilaniem (PAPR) zawierającym inteligentną technologię w rewolucyjnie kompaktowym urządzeniu. CleanSpace zapewnia maksymalną ochronę dla pracowników służby zdrowia i opieki medycznej, przy jednoczesnym komforcie użytkowania, szybkiej instalacji i łatwej integracji w każdym otoczeniu.

Nowe rozwiązanie w ochronie dróg oddechowych. Twój wybór nie jest już ograniczony do gorących i dusznych jednorazowych masek oraz dużych systemów PAPR, które są niewygodne, kosztowne i kłopotliwe w użyciu.



NIOSH
APPROVED ✓



MASKA HALO



Osiągnięcie wygody w połączeniu z łatwością użytkowania

MODUŁ ZASILANIA:

- Opatentowana technologia AirSensit™ dostarcza chłodne filtrowane powietrze na żądanie dla zapewnienia maksymalnego poziomu ochrony.
- Wytwarza przepływ powietrza do 230 L/min działając do 9 godzin.
- W przypadku konieczności zastosowania stetoskopu użytkownik może wyciszyć pracę silnika przy pomocy oddechu.

MASKA:

- Przezroczysta maska zapewniająca czystą transmisję głosu pozwala na łatwą komunikację.
- Miękka silikonowa maska o jakości medycznej nie zawiera lateksu i zapewnia wygodne uszczelnienie. Świeże powietrze płynące z maski chłodzi użytkownika, eliminuje wilgoć, stęchłe powietrze i zapobiega zamgleniu.
- Dostępny wariant pełnej maski lub półmaski.

KONSTRUKCJA:

- Lekki aparat (<400g/0,9lb) bez przewodów, węży lub zestawu baterii mocowanych do paska.
- Niewielka ilość elementów i mała powierzchnia pozwalają na szybkie oczyszczenie/dezynfekcję i ponowne zastosowanie.
- Konfiguracja kolorów paneli pozwala określić komu lub gdzie wydano urządzenia.



FILTR:

- Efektywna filtracja cząstek 0,3 mikronowych lub większych filtrem HEPA/P3 na poziomie 99,97%.

MASKA HALO



PEWNOŚĆ OCHRONY

- Wysoki poziom ochrony: efektywna filtracja cząstek 0,3µm lub większych filtrem HEPA/P3 na poziomie 99,97% włącznie z zagrożeniami biologicznymi.
- W pełni przetestowany i certyfikowany: zatwierdzony przez NIOSH/CE.
- Odporny na wodę: (Klasa IP 66): można stosować w prysznicach odkażających i często myć.
- Regularne wysokie wyniki testów dopasowania: Przeciętny współczynnik dopasowania to 3.000. Zapewnia to, że pracownicy są pod ochroną nawet podczas intensywnego sezonu.
- Kompatybilny ze standardowym szpitalnym wyposażeniem ochrony osobistej: (fartuchy, czepki i osłony twarzy). Noszony na karku.
- Długi okres pracy baterii: do 9 godzin ciągłej eksploatacji oraz szybkie ładowanie nie przekraczające 2 godzin. Alarm ostrzegający o niskim poziomie naładowania baterii zawsze zapewnia ochronę wszystkim użytkownikom.
- Niezawodny i trwały: solidna, odporna na wstrząsy obudowa. Objęty 3 - letnią gwarancją.


MĄDRY WYBÓR

- Redukcja ilości odpadów: system wielokrotnego użytku znacznie redukuje potrzebę korzystania z jednorazowych masek, koszt usuwania odpadów oraz negatywny wpływ na środowisko.
- Eliminacja konieczności magazynowania: modułowy elastyczny system skalowalny do intensywnego użytkowania. Szczególnie efektywny w sytuacjach wysokiego zagrożenia takich jak pandemie.
- Zapewnienie skuteczności i efektywności: prosty system z niewielką ilością elementów. Czas zakładania i zdejmowania krótszy niż 10 sekund. Komfortowy w użyciu przez dłuższy okres czasu.
- Uproszczony system dopasowywania: nadmuch powietrza z technologią AirSensit™ oraz osobisty system regulacji mający zastosowanie do wielu typów twarzy pozwalają zawsze osiągnąć wysoki wynik testu dopasowania.
- Integracja ze standardowymi procesami: materiał jakości medycznej może być dezynfekowany standardowymi środkami szpitalnymi. Może być myty/dezynfekowany na oddziale lub w scentralizowanym punkcie przygotowywania sprzętu do ponownego użytku.
- Elastyczne opcje szkolenia: możliwość szybkiego i dokładnego przeszkolenia licznej grupy osób w krótkim czasie. Materiał szkoleniowy jest dostępny online, zaś zespół obsługi klientów wspiera użytkowników w procesie szkolenia.


GOTOWY DO UŻYTKU W TRZECH PROSTYCH KROKACH

CleanSpace Halo jest intuicyjny w użyciu i można go szybko zainstalować w trzech prostych krokach – Włącz; Podłącz maskę; Dopasuj maskę i zacznij używać, Inteligentna zautomatyzowana technologia wyczuwa oddech użytkownika by włączyć i wyłączyć przepływ powietrza.

1. WŁĄCZ

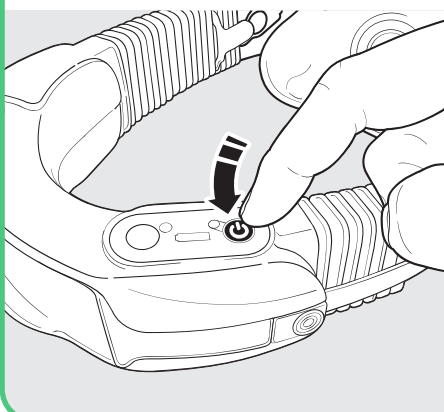

2. KLIKNIJ BY POŁĄCZYĆ

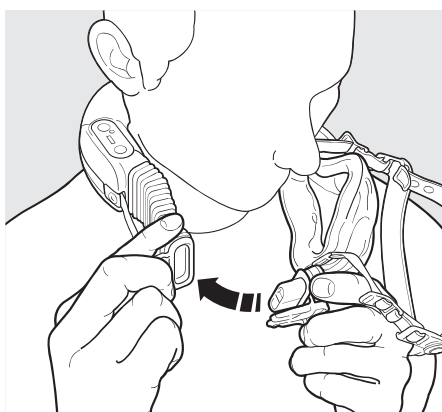

3. DOPASUJ MASKĘ I NAGŁOWIE I PO PROSTU ODDYCHAJ

