

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



# Quado

Kompaktowy model

# Zawsze na właściwym miejscu

## Mobilna szafka przyłóżkowa Quado

Nowa szafka przyłóżkowa Quado firmy Stiegemeyer jest prawdziwym mistrzem ergonomii. Dzięki ograniczeniu funkcji świetnie sprawdza się w szpitalnej codzienności. Jednocześnie dwie otwarte półki po obu stronach oraz wyciągana na obie strony szuflada zapewniają wystarczającą ilość miejsca do przechowywania osobistych rzeczy pacjenta. Neutralne kolory Quado dobrze komponują się z wyposażeniem pokoju i pasują do każdego łóżka szpitalnego.



▲ Neutralna kolorystyka sprawia, że Quado pasuje do każdego wyposażenia sali jak również łóżka szpitalnego.



◀ Quado można bez trudu ustawić na pożądaną wysokość od 85 do 115 cm za pomocą sprężyny gazowej.




▲ Łatwy i bezpieczny sposób składania blatu bocznego.



▲ Wsuwana podpórka na książkę lub telefon zapewnia pacjentowi komfort czytania, bez konieczności opróżniania blatu bocznego (opcja).

# Transport

## Łóżko szpitalne wraz z szafką przyłóżkową Quado

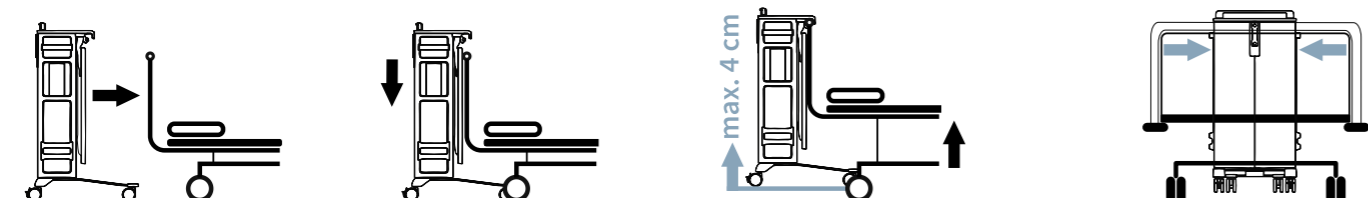

Łatwość transportu szafki przyłóżkowej Quado stanowi istotną zaletę w codziennej pracy personelu medycznego. Możliwość dołączenia Quado do szczytu niemal każdego łóżka szpitalnego firmy Stiegmeyer sprawia, że relokacja pacjenta staje się dużo łatwiejsza. Wspólny transport zaoszczędza personelowi noszenia przedmiotów osobistych pacjenta, jak również ewentualnej dokumentacji. Podczas transportu szafka Quado może jechać jednocześnie wzdłuż łóżka, natomiast przejeżdżając przez progi

lub przeszkody powinna być podnoszona za pomocą regulacji wysokości łóżka. Po dotarciu do celu szafkę można bezpiecznie umiejscowić obok łóżka dzięki kółkom z blokadą.



Aby zaoszczędzić miejsce, w czasie przechowywania albo transportu szafki przyłóżkowe Quado mogą być łączone.

## Higiena Niezawodna ochrona

Quado zapewnia optymalną higienę w szpitalu. Dostosowane jest do automatycznej dezynfekcji, jak również do szybkiego i dokładnego czyszczenia ręcznego.



▲ Podwozie zapewnia dobrą stabilność i jest łatwe do czyszczenia.



Gładka powierzchnia blatu bocznego umożliwia zachowanie czystości.



▲ Prosta konstrukcja szafki sprzyjająca higienie.

# Wyposażenie

## Użyteczne dodatki



▲ Haczyk na relingu szafki przyłóżkowej sprawia, że pacjent ma zawsze rącznik w zasięgu ręki.

▲ Dłuższy haczyk pozwala na umieszczenie kosmetyczki w pobliżu pacjenta (opcja).

▲ Dołączony przedłużacz USB umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych pacjenta.

Uchwyt na napoje ► zapewnia stabilność szklanek i butelek (opcja).



◀ Dodatkowa kieszeń na dokumenty (opcja) może być przeznaczona na czasopisma i inne rzeczy osobiste.



▲ ► Tuleje mocujące do telefonów komórkowych i systemów multimedialnych są dodatkowym atutem dzięki czemu szafka Quado realizuje wciąż zmieniające się potrzeby pacjentów i wymogi placówek.

# Dane techniczne i wyposażenie

Dane techniczne	
<b>Dane podstawowe</b>	
Wymiary zewnętrzne (blat boczny rozłożony) (szer. × gł. × wys.)	ok. 92 × 44,6 × 89,6 – 119,6 cm
Wymiary zewnętrzne (blat boczny złożony) (szer. × gł.; uwzględniając podwozie)	ok. 56,4 × 44,6 cm
Wymiary zewnętrzne korpusu (szer. × gł.)	ok. 28,6 × 44,6 cm
Wysokość blatu bocznego	ok. 85 – 115 cm
Wymiary blatu bocznego	ok. 40,7 × 57,4 cm
Waga całkowita	ok. 25 kg
<b>Bezpieczne obciążenie</b>	
Maksymalne obciążenie blatu bocznego (centralnie)	ok. 15 kg
Maksymalne obciążenie wysuniętej górnej szuflady (stabilizacja przed przewróceniem się)	ok. 2,5 kg
Maksymalne obciążenie blatu górnego	ok. 15 kg
<b>Wyposażenie i opcje</b>	
<b>Szuflady</b>	
Mała górna szuflada	✓
Wysuwana podpórka na książkę lub telefon	0

Koła	
Podwójne koła 65 mm (4 koła z blokadą)	✓
<b>Kolory i materiały</b>	
Kolor korpusu	Jasnoszary NCS S1500-N
Materiał korpusu	PP, PA
Kolor podwozia	Biały NCS S0500N
Materiał podwozia	Stal
<b>Pozostałe</b>	
Zamek górnej szuflady	0
Tuleja do systemu telefonicznego	0
Adapter do przedłużenia tulei mocującej	0
Produkt dostosowany do automatycznej dezynfekcji	0
Uchwyt na butelkę umieszczony na relingu	0
Haczyk na rącznik	0
Dodatkowa kieszeń na dokumenty	0
Długi haczyk na relingu	0
Przedłużacz USB	0

✓ = Standard  
0 = Opcja

## STIEGELMEYERGROUP



Grupa Stieglmeyer jest międzynarodowym partnerem dla szpitali i domów opieki, a poprzez markę Burmeier - również dla klientów z sektora opieki domowej. Wspieramy naszych klientów poprzez praktyczne, stale optymalizowane produkty, rozwiązania i usługi.

- Założone w 1900 r., do dziś pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym
- Ponad 1100 pracowników na całym świecie
- Wytwarzanie wszystkich kluczowych produktów odbywa się we własnych zakładach
- Projektowanie i wytwarzanie produktów jest realizowane w Niemczech
- Serwis, szkolenia i optymalizacja procesów w siedzibie klientów
- Międzynarodowe certyfikaty i eksport do ponad 60 krajów
- Przedstawicielstwa handlowe w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Polsce i RPA

Nasze marki





## STIEGELMEYERGROUP

### Siedziba główna / Headquarters

---

Deutschland / Germany  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

France  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

South Africa  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej:  
Find your local partner on our website:  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)