

WIELOFUNKCYJNE KRZESŁO HIGIENICZNE

Carendo®



Ocena akredytacji produktu
DSDC klasa 1B

Wielofunkcyjne krzesło higieniczne Carendo® usprawnia rutynowe czynności związane z higieną i prysznicem, umożliwiając opiekunowi pracę w wygodnej pozycji.

Zaprojektowane z myślą o Carlu i Doris



Godna opieka

Funkcja Care Raiser™ pozwala podnieść dolną część ciała pacjenta lub pensjonariusza, umożliwiając wykonanie dyskretnych czynności higienicznych z zachowaniem godności pacjenta lub pensjonariusza.

Optymalizacja zabiegów higienicznych

Krzesło Carendo zaprojektowano w taki sposób, aby jeden opiekun mógł wykonać wszystkie czynności higieniczne, w tym zdjęcie i założenie ubrania, toaletę i prysznic, przenosząc pacjenta tylko jeden raz.

Wykazano, że Carendo zapewnia personelowi lepszą postawę

podczas wykonywania czynności higienicznych, dzięki czemu opiekunowie przyjmują neutralną pozycję pleców przez 77% czasu w porównaniu z zaledwie 48%, kiedy myją pacjenta w łóżku.*

*Źródło: Knibbe, J.J., N.E. Knibbe i D.E.B.L. Heitink (2016).

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.arjo.pl

arjo
with people in mind

Kluczowe cechy

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

W trakcie wszystkich czynności higienicznych opiekun może pracować na wybranej przez siebie wysokości.

OPARCIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI

STEROWNIK RĘCZNY

ZATRZYMANIE AWARYJNE

OBNIŻANIE AWARYJNE




SOLIDNE PODŁOKIETNIKI

CARE RAISER™

Umożliwia delikatne uniesienie dolnej części ciała pacjenta/pensjonariusza za dotknięciem jednego przycisku, co daje opiekunowi dostęp potrzebny do wykonania dyskretnej czynności higienicznych.

WYMAGANIA PRZESTRZENNE

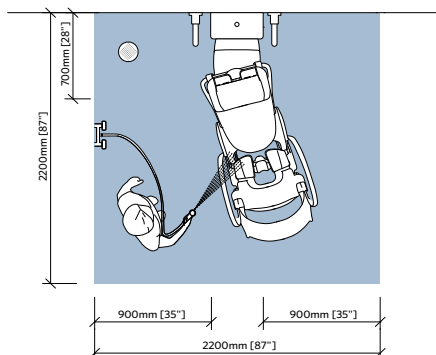

Przestrzeń robocza potrzebna do swobodnego przenoszenia pensjonariusza, wykonywania czynności higienicznych oraz zapewnienia odpowiedniej dostępności do pensjonariusza, urządzeń i opiekuna.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Bezpieczne obciążenie robocze (BOR)	136 kg
Masa	64 kg
Min. długość, najniższa pozycja pionowa	875 mm
Maks. długość, najwyższa pozycja leżąca	1510 mm
Całkowita szerokość	640 mm
Podwozie, szerokość	640 mm
Podwozie, szerokość między nogami	508 mm
Podwozie, długość	865 mm
Minimalna wysokość oparcia, najniższa pozycja leżąca	1020 mm
Maksymalna wysokość oparcia, najwyższa wyprostowana pozycja	1550 mm
Minimalna wysokość podłokietników, najniższa pozycja leżąca	775 mm
Maksymalna wysokość podłokietników, najwyższa wyprostowana pozycja	1320 mm
Wysokość siedziska, najniższa/najwyższa pozycja	510 mm / 1050 mm
Zakres podnoszenia (siedzisko)	550 mm



Dementia Services Development Centre na Uniwersytecie w Stirling dokonano analizy tego produktu i oceniło jego konstrukcję w odniesieniu do zasad projektowania i użyteczności produktów przeznaczonych do użycia w środowisku uwzględniającym demencję. Dla ułatwienia identyfikacji, przydatność produktu jest klasyfikowana numerycznie wraz z odpowiednim wyjaśnieniem zastosowania, w ramach podanego klucza klasyfikacji. Logo akredytacji DSDC jest przyznawane na podstawie przydatności poszczególnych produktów i ich kolorystyki. Akredytacja nie jest oceną wartości producenta ani końcowego zastosowania produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby oceny odzwierciedlały przydatność produktów i ich zastosowanie w momencie przygotowania tego materiału, DSDC nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu końcowego, jego wydajność ani połączenie z innymi produktami lub wykończeniami. Aby środowisko zostało uznane za „uwzględniające demencję” lub „przyjazne dla osób z demencją”, należy zwrócić szczególną uwagę na specyfikację wykończenia, właściwości użytkowe (na przykład współczynnik odbicia światła (LRV), antypoślizgowość i wzorzyste powierzchnie) oraz przydatność do zamierzonego zastosowania.

AKCESORIA

- Poduszka pod plecy
- Poduszka pod kark
- Poduszka do siedzenia
- Basen zuchwytem
- Pas bezpieczeństwa
- Środek do dezynfekcji
- Akumulator i ładowarka akumulatora

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, wejdź na stronę www.arjo.pl