

Pierwsza podróż w bezpieczeństwie i komforcie

conceptnatal 

Traveller RS system zabezpieczający do inkubatorów transportowych

Spełnia wymagania norm DIN EN 1789:2007+A2:2014
i DIN EN 13976 - 2:2018 rozdział 4.11




Pierwsza podróż w bezpieczeństwie i komforcie z naszym innowacyjnym systemem zabezpieczającym Traveller RS do mobilnych inkubatorów. Szybkie i łatwe podłączenie do jednostki mobilnej zapewnia malutkiemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Indywidualnie regulowane paski stabilizują i podtrzymują pozycję niemowlęcia.

Specjalnie opracowany materiał materaca zapewnia skuteczne tłumienie drgań. Część obejmującą głowę i nogi można indywidualnie dopasować do konkretnej sytuacji dziecka, co pomaga zmniejszyć nadmierną stymulację sensoryczną podczas transportu.

System Traveller RS spełnia wymagania norm DIN EN 1789:2007+A2:2014 i DIN EN 13976-2:2018 Rozdział 4.11 jako system zabezpieczający dla niemowląt w karetkach oraz norm EASACS-23-561, EASACS-25-561, EASACS-27-561 i EASACS-29-561 dla transportu lotniczego.

Specjalna tkanina dystansowa 3D zapewnia miękką amortyzację zmniejszając nacisk i tłumiąc wibracje. Struktura materiału wspomaga kontrolę wilgoci, zapewniając optymalną kontrolę klimatu.

Elastyczna część obejmująca głowę ze składaną osłoną chroni przed bezpośrednim światłem i nadmierną stymulacją sensoryczną. Ponadto system zabezpieczający Traveller RS został wyposażony w zintegrowane boczne otwory na przewody i kable monitorujące.

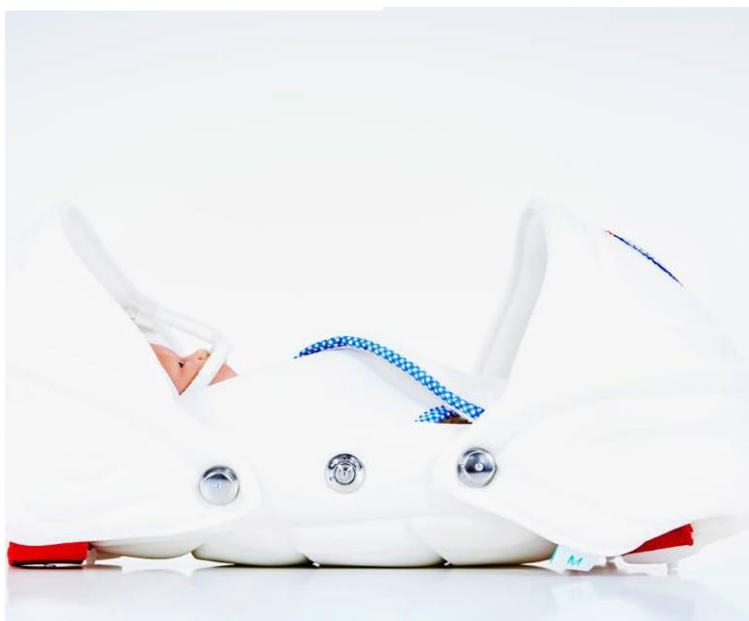

conceptnatal 
Haldenstrasse 31
72124 Pliezhausen
tel +49(0)7127 9802601

info@conceptnatal.de
fax +49(0)7127 9802602
www.conceptnatal.de

 KROBAN

KROBAN Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270/1410
90-361 Łódź
Tel: 512 046 260

Email: info@kroban.pl
Fax: 42 288 48 30
www.kroban.pl
#KROBANteam



Traveller RS można bezpiecznie połączyć z mobilnym inkubatorem za pomocą 4 elastycznych sprzączek.



Indywidualnie regulowane klapki z samoblokującym systemem zapinania wspierają pozycję niemowlęcia podczas transportu. Zintegrowana pętla stabilizuje główkę dziecka.



W przypadku nagłego uderzenia, specjalny pałąk zabezpieczający stabilizuje obszar Traveller RS, w którym ułożone jest dziecko.

System zabezpieczający zapewnia bardzo dobry dostęp wzrokowy do niemowlęcia - w nagłym wypadku lub w razie pogorszenia się stanu dziecka Traveller RS można łatwo i szybko otworzyć.

Powierzchnia do ułożenia dziecka jest wykonana z delikatnej mikrofibry, zapewnia miękkość i zapobiega podrażnieniom skóry. Traveller RS jest produktem wielokrotnego użytku, można go prać w temperaturze 70°C i suszyć w suszarce w celu zachowania higieny.

Kolorystyczne odpowiedniki rozmiarów:

- S** dla dzieci < 1.000g
- M** dla dzieci > 1.000g - 2.500g
- L** dla dzieci > 2.500g - 4.000g

Nasz system kolorystyczny ułatwia dobór rozmiaru - rozmiar Traveller RS można rozpoznać po kolorze.



Item Number	Description	Size
02-01-100T RS	Traveller RS Dräger TI500	Size S
02-02-100T RS	Traveller RS Dräger TI500	Size M
02-03-100T RS	Traveller RS Dräger TI500	Size L
02-01-100A RS	Traveller RS Atom V-808	Size S
02-02-100A RS	Traveller RS Atom V-808	Size M
02-03-100A RS	Traveller RS Atom V-808	Size L
02-01-100B RS	Traveller RS International Biomedical Airborne	Size S
02-02-100B RS	Traveller RS International Biomedical Airborne	Size M
02-03-100B RS	Traveller RS International Biomedical Airborne	Size L
02-01-100M RS	Traveller RS Médipréma Nite	Size S
02-02-100M RS	Traveller RS Médipréma Nite	Size M
02-03-100M RS	Traveller RS Médipréma Nite	Size L
04-02-100T RS	Laundry Bag Meshy Protect Traveller RS	onesize

Made in Germany

