

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRYBY PRACY

Manualna, z rozcieńczenia, Kapilarna

PARAMETRY

22 : WBC, RBC, HGB, HCT, MCV MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD, P-LCR, P-LCC, Lymph%/#, Mid %/#, Gran%/#

ZASADA POMIARU

RBC/PLT/WBC/ DIFF:
Impedancja Elektryczna
Hb: Bez cyjankowa kolorymetria
MCV: Pomiar
HCT: Wyliczany

HISTOGRAMY

3 (WBC/RBC/PLT)

OBJĘTOŚĆ PRÓBK

Krew Pełna : 9 µL
Wstępne rozcieńczenie : 20 µL
Kapilara : 20 µL
ZKRESY LINIOWOŚCI
WBC (x 10³/L): 0 – 300

RBC (x 10A6/L): 0.00 - 8.50
Hb (g/dL) : 0 - 25.0
HCT (%): 0 - 67
PLT(x10A3/L) : 0 - 3000

KALIBRATOR

ELite H Cal (3mL)
Otwarta fiolka stabilna w 2-8°C: 7 Dni

3 POZIOMY KONTROLI

Erba H3 CON L, N, H (3mL)
Otwarta fiolka stabilna w 2-8°C: 14 Dni

WYDAJNOŚĆ

60 Testów/Gość.

QC (L-J, X-BAR)

Tak

BAZ DANCH

50,000 wyników z histogramami

WYMIARY (MM)

364x477x417

WAGA (KG)

25

ODCZYNNIKI

Erba Dil
ERBA Lyse bez cyjankowy
ELite H Clean

KOMUNIKACJA

4 USB + 1 LAN Port

WARUNKI PRACY

15-30°C
Atmospheric pressure
70kPa~106kPa

ZASILANIE

A.C.100-240V;-50/60Hz;
<200VA



H360 SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

NR.KAT	NR	NAZWA	OPIS
INS00077	50005215	H360	Analizator 3 DIFF

ODCZYNNIKI LINIA-H

NR.KAT	NR.KAT	NAZWA	OBJĘTOŚĆ
HEM00028	50005219	Erba H360 Diluent	20 Litres
HEM00029	50005220	Erba H360 Lyse	500 mL
HEM00023	50004878	ELite H Clean	50 mL
HEM00033	10020557	Erba H3 CON Low	3 mL
HEM00034	10020558	Erba H3 CON Normal	3 mL
HEM00035	10020559	Erba H3 CON High	3 mL
HEM00027	10020492	ELite H CAL	3 mL


PROSTY.
WYDAJNY.
NIEZAWODNY.

H360

AUTOMATYCZNY
ANALIZATOR
HEMATOLOGICZNY 3 DIFF

INTUICYJNE

OPROGRAMOWANIE

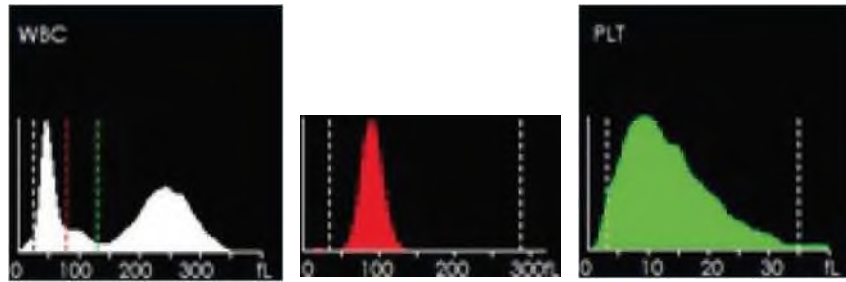

- 10.4" Monitor
- 50.000 Wyników
- 3 Histogramy (RBC, WBC, PLT)
- Start jednym przyciskiem

REJESTRACJA ODCZYNNIKÓW

- Pełna identyfikacja odczynników dzięki systemowi RFID



NIEZAWODNY


PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA



- Mała drukarka - 364 x 498 mm
- Wskaźnik stanu pracy
- Prosta konstrukcja
- Wysokiej jakości podzespoły zapewniające długą żywotność


Anty-skrzepowa technologia

- Prewencyjne wypalanie kryzy zapobiega tworzeniu się skrzepów

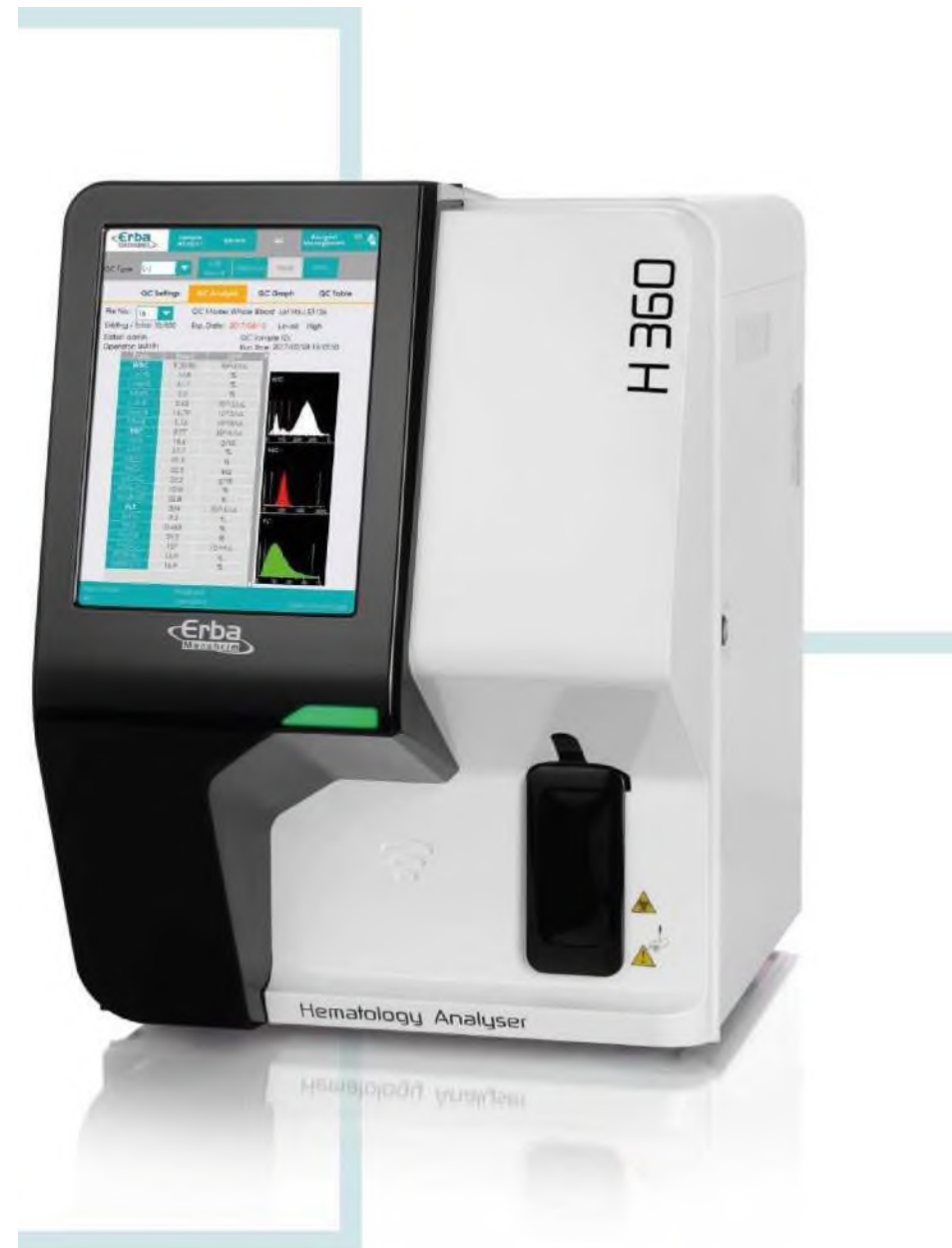


WYDAJNA

KOMUNIKACJA Z LIS

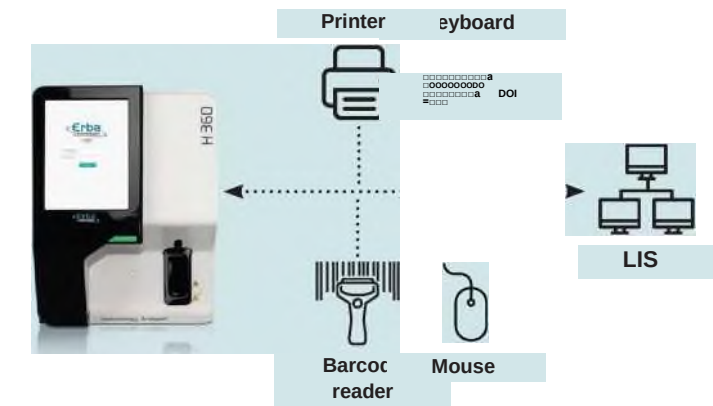

ANALIZA

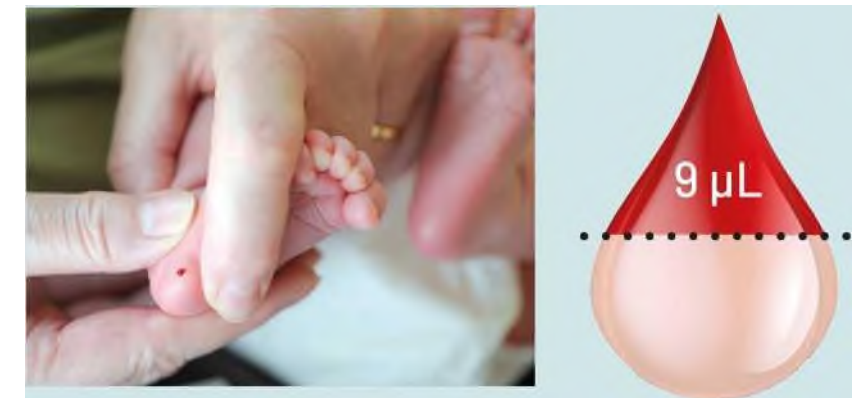

- Niska objętość próbki 15 µL
- 22 parametry
- Gwarantowana dokładność rozcieńczania dzięki automatycznemu dozowaniu rozcieńczalnika
- Zaawansowane parametry płytkowe (P-LCR, P-LCC, PDW-SD, PDW-CV)
- Automatyczne pływające dyskryminatory

KONSTRUKCJA

Wbudowana drukarka termiczna

