

SKUTECZNA RESUSCYTACJA



animax - nowoczesne urządzenie do resuscytacji krążeniowo - odechowej umożliwiające prowadzenie długotrwałego masażu serca i sztucznej wentylacji nie wyczerpując ratownika. Zapewnia bardzo skuteczne, łatwe, płynne i w pełni powtarzalne wykonywanie uciśnień i wdmuchnięć (również ze 100% tlenem). Dostosowując się do pacjenta automatycznie dba o właściwe (zgodne z obowiązującymi standardami) parametry resuscytacji.

Najważniejsze cechy:

- szybkie przygotowanie do użycia (już w kilka sekund)
- automatycznie dobrane, zawsze optymalne i powtarzalne parametry resuscytacji
- możliwość długotrwałego prowadzenia resuscytacji bez spadku jej efektywności powodowanej zmęczeniem ratownika lub wyczerpaniem źródeł zasilania
- automatyczna zmiana trybu pracy uciśnięcia/wentylacja (wg obowiązujących standardów)
- niskie koszty eksploatacji - brak potrzeby zasilania elektrycznego lub gazowego





Skład zestawu

urządzenie **animax**,
torba transportowa,
spiro-set (maska z podkładką pod głowę i paskami mocującymi)
rurki Guedela
rezewuar tlenu z zaworem
przewód powietrzny z zastawką pacjenta i wbudowanym manometrem

Dane techniczne

grupa pacjentów:	dorośli
obsługa:	tylko jedna osoba
waga urządzenia:	9,8 kg
waga akcesoriów i torby:	4,5 kg
czas przygotowania do użycia:	ok. 20 sekund
torba:	do noszenia w rękę, na ramieniu lub na plecach
stosunek uciśnień do wdmuchnięć:	automatycznie 30:2
objętość oddechowa:	500 - 600 ml
głębokość ucisków:	40 - 50 mm
temperatura pracy / przechowywania:	- 18°C do + 50°C / - 40°C do + 60°C
wymiary (wys./szer./dł.):	38 cm / 53 cm / 18 cm

animax spełnia europejską normę dla urządzeń medycznych 93/42/EEC.

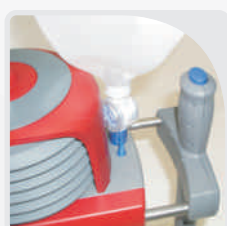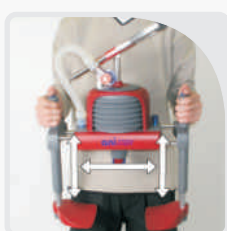

wyprodukowano w Niemczech przez:

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Ehestetter Weg 11
72458 Albstadt

wyłączny dystrybutor w Polsce:

LMP Sp. z o.o.

BIURO GŁÓWNE:
ul. Kolisty 25
40-486 KATOWICE
tel. 0-32 735 04 61
fax 0-32 735 03 14

BIURA REGIONALNE:

BIAŁYSTOK
tel./fax 0-85 710 44 35

POZNAŃ
tel./fax 0-61 899 92 01