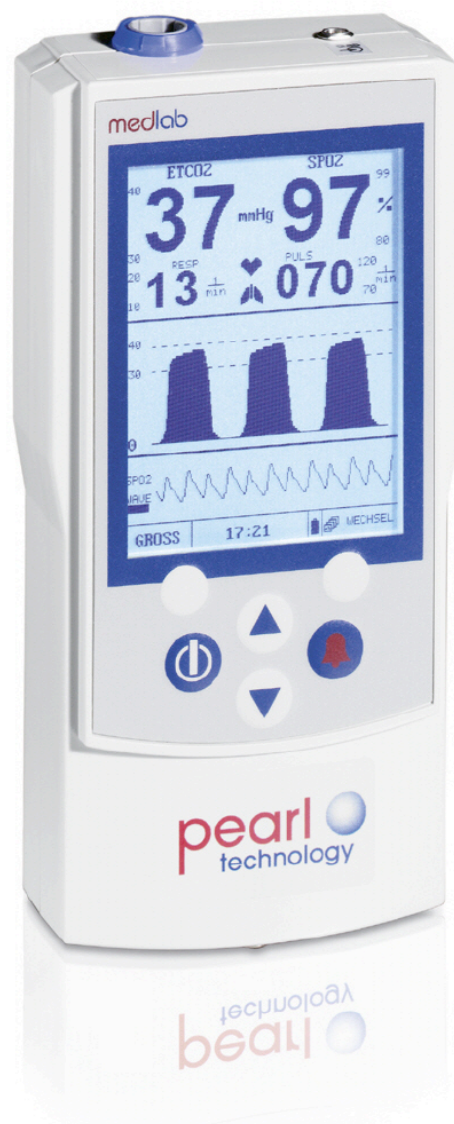


# CAPNOS/CAPNOX

PRZENOŚNY, PEWNY, DOKŁADNY!

## CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ Lekki , przenośny, atrakcyjnie zaprojektowany
- ✓ Kapnograf - pomiar w strumieniu bocznym w połączeniu z pulsoksymetrem (Capnox)
- ✓ Dokładny i pewny pomiar SpO<sub>2</sub>, pulsu oraz jego siły dzięki technologii PEARL\*
- ✓ Czytelny, wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD ze wskaźnikami trendu
- ✓ Wymienne baterie zapewniają możliwość wydłużenia czasu pracy
- ✓ System alarmowy z ustawialnymi granicami
- ✓ Możliwość zastosowania u dorosłych, dzieci, noworodków

# CAPNOS/CAPNOX PRZENOŚNY KAPNOGRAF Z PULSOKSYMETREM

pearl  
technology

CAPNOX jest kombinacją kapnografu oraz pulsoksymetru doskonałą dla oddziałów ratunkowych oraz paramedyków. Z uwagi na swoją wysoką dokładność świetnie sprawdzi się również podczas zastosowań klinicznych i anestetycznych.

Pomiar boczny zapewnia możliwość zastosowania zarówno u pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubowanych a szeroka gama akcesoriów pozwala dostosować dla wszelkich grup pacjentów.

Urządzenie prezentuje kompletny obraz pacjenta zaintubowanego, prezentując wartości SpO<sub>2</sub>, pulsu, etCO<sub>2</sub> dodatkowo dzięki prezentacji krzywych trendu pozwala na błyskawiczną ocenę sytuacji. Urządzenie dostępne jest również jako sam kapnograf - CAPNOS.



## DANE TECHNICZNE:

### KAPNOGRAF:

*Metoda pomiaru:* strumień boczny, pochłanianie podczerwieni z swoma punktami kalibracji (NDIR)  
*Dokładność:* +/- 2mmHg (+/-5%)  
*Częstość oddechów:* 0-100 min<sup>-1</sup>  
*Kompensacja:* O<sub>2</sub> 20-100%; N<sub>2</sub>O 0-80% nastawialna  
*Czas rozgrzewania:* 30 sek.  
*Jednostki:* mmHg lub % obj.

### PULSOKSYMETR:

*Zakres SpO<sub>2</sub>:* 0-100%; *Zakres pulsu:* 30-250 min<sup>-1</sup>  
*Dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub>:* dorośli i dzieci +/-2% @ 70-99%; w warunkach ruchu +/- 3%  
*Dokładność pomiaru pulsu:* +/-1% (+/- 1 cyfra)

### URZĄDZENIE:

*Wymiary:* 180 x 88 x 38 mm  
*Waga:* Capnos/Capnox: 350g/400g  
*Bateria:* 2400mAh (ca. 8 godzin pracy)  
*Wyświetlacz:* LCD z podświetleniem  
*Alarmy:* audio i wizualne dla wszystkich parametrów  
*Wskazania:* CAPNOS: kapnogram, etCO<sub>2</sub> + trend, respiracja. CAPNOX dodatkowo: pletyzmogram, SpO<sub>2</sub> + trend, częstość pulsu.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Capnos: Monitor Capnos, bateria - 1 szt., ładowarka, 10 linii próbkujących, 5 filtrów wilgotności, 10 łączników T.  
Capnox: Monitor Capnox oraz dodatkowo: przewód pacjenta wraz z czujnikiem klipsowym SpO<sub>2</sub>

### DODATKOWE AKCESORIA:

bateria 2400mAh, gumowy protektor, filtr wilgotności, linie próbkujące, łączniki T, uchwyt do stojaka.



### Producent:

Medlab medizinische Diagnosegeräte GmbH  
Erzbergerstrasse 115, 76133 Karlsruhe  
Tel. +49 (0) 721 62512-0  
FAX +49 (0) 721 62512-12  
www.medlab.eu

### Wyłączny importer na terenie Polski:

Medicavera  
ul. Smocza 10/2  
70-731 Szczecin  
www.medlab-gmbh.pl  
Tel. / Fax (091) 460 51 58