


Nursing Anne to manekin dorosłej kobiety przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego zakresu czynności pielęgnacyjnych pacjenta. Umożliwia osłuchiwanie oraz mierzenie ciśnienia dzięki zastosowaniu ramienia do symulacji ciśnienia oraz symulatora czynności życiowych - SimPad. Dodatkowe moduły do badania piersi, pielęgnacji po mastektomii i umiejętności masażu dna macicy czynią ten manekin kompletnym systemem do nauki pielęgnacji.



Właściwości manekina:

- dokładny anatomicznie manekin dorosłej kobiety z kończynami i realistycznymi połączeniami stawowymi
- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przetykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem pozwalająca na naukę procedur:
 - symulowanego płukania oczu i uszu
 - podawania/zakraplania leków do oka, ucha i nosa, włącznie z tamponowaniem nosa
 - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych
 - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtańowego dróg oddechowych
 - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej
 - pielęgnacji tracheotomii i odsysania
 - podawania tlenu
 - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik
 - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przetykowego oraz ich pielęgnacji
- generowany ręcznie puls w tętnicach szyjnych
- otwory po wkłuciach dożylnych podobojczykowych, różne stomie, otwór w klatce piersiowej po odbarczeniu odmy do pielęgnacji i utrzymania miejsc po ranach operacyjnych
- możliwość wstrzyknięć domięśniowych w mięsień naramienny, grzbietowo-pośladkowy i mięsień obszerny boczny,
- prawe ramię do wstrzyknięć dożylnych z wymienną skórą i napełnianym systemem żylnym pozwalające na obwodowe leczenie dożylnie i pielęgnację miejsc wkłuc
 - nakłucie żyły jest możliwe w dole łokciowym i na grzbiecie ręki
 - dostępne żyły: środkowa, odłokciowa i odpromieniowa
- lewe ramię do symulacji i treningu pomiaru ciśnienia (wymagane jest podłączenie do symulatora SimPad)
- płyta brzuszna z zamiennymi stomiami przedstawiającymi kolostomię, ileostomię i przetokę nadłonową (możliwe stosowanie zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno- i dwuczęściowych)
- zamienne genitalia żeńskie i męskie z zaworami przyłączeniowymi, zbiornikiem moczowym i zbiornikiem okrężnicy umożliwiające:
 - pełne cewnikowanie pęcherza moczowego
 - możliwe stosowanie cewników założonych na stałe lub doraźnych
 - procedury lewatywy wykonywane z zastosowaniem płynu do realistycznego zwrotu



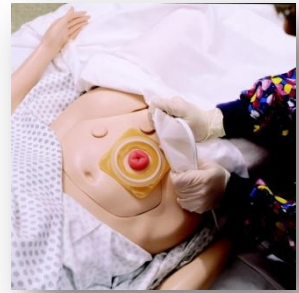

Dzięki wykorzystaniu symulatora SimPad® manekin Nursing Anne umożliwia ponadto:

- Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii
- Symulację tonów serca (zsynchronizowane z zaprogramowanym EKG)
- Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
- Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
- Symulację ciśnienie krwi / puls
- Symulację odgłosów pacjenta

/zobacz więcej informacji na temat symulatora SimPad™/

Symulator SimPad® wymagany do pełnego funkcjonowania manekina Nursing Anne – dostępny osobno



Dostępne akcesoria do manekina Nursing Anne (opcja):

325-00750 Breast Exam Module

Moduł do badania piersi z wymiennymi guzkami umożliwiającymi naukę rozpoznawania schorzeń piersi, rozmiarów guzków i względnego ich położenia przez symulację licznych nieprawidłowości znajdujących w czasie badania piersi. Moduły zawarte w zestawie:

- normalna anatomia kobiecej piersi
- zamienne nieprawidłowości do używania z modułem piersi
- gruczolakowłókniak (fibroadenoma)
- cysta
- guz lity/naciekowy



325-00650 Mastectomy Module

Moduł mastektomii umożliwiającą naukę pielęgnacji pacjentki po mastektomii

- anatomia po operacyjnym całkowitym usunięciu lewej piersi
- skóra obszaru chirurgicznego zamknięta klamrami
- rurka drenu umieszczona tuż pod skórą



325-00450 Fundus Skills and Assessment Module

Moduł przedstawiający normalną anatomie brzucha kobiety okresu po porodzie przeznaczony do nauki oceny dna macicy i umiejętności masażu.

- realistyczne punkty orientacyjne spojenia łonowego
- zamienne: twarda, zwinięta i rozpulchniona macica
- pępek
- moduł przesunięcia dna macicy spowodowany rozstrzenięciem pęcherza moczowego
- widoczne hemoroidy odbytu
- nacięcie krocza drugiego stopnia w linii środkowej przy porodzie
- genitalia wydłużone obrzękiem do rejonu łechtaczki
- ujście pochwy bardziej widoczne i otwarte
- wargi mniejsze bardziej wiotkie uwidoczniające kanał pochwy



325-00550 Wound Care and Assessment Set - Female

Zestaw modułów do oceny i pielęgnacji ran obejmujący:

- moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu
- moduł nacięcia brzusznego z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu
- moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem Penrose`a
- moduł cięcia brzusznego ze szwem nylonowym i drenem Penrose`a
- moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany
- moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny
- zakażona stomia okrężnicy (możliwość płukania)
- moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania



- amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji
- moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany
- moduł szwu uda (szew nylonowy)
- moduł opracowania chirurgicznego rany uda
- moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym
- moduł stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty

Zestaw Nursing Anne zawiera:

- Manekin dorosłej kobiety – pełna postać
- Manikin Lubricant - środek nawilżający
- ubranie (koszula szpitalna)
- zestaw narzędzi do łączenia części
- instrukcję obsługi



Dostępne warianty manekina (nie zawierają symulatora SimPad):

- 325-05050 Nursing Anne SimPad (manekin działający z symulatorem SimPad®)
- 325-20050 Nursing Anne (manekin nie współpracujący z symulatorem SimPad®)
- 200-30033 Symulator SimPad®

LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25

40-486 Katowice

tel: 32 735 04 61

fax: 32 735 03 14

lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl

www.lmp.pl