


Ssanie – Płukanie

Końcówka ssąco płucząca z zaworem dwudrożnym Ø5mm, dł. robocza 330mm, 4 otwory na końcu rurki ssącej, dreny „na wcisk”. Dodatkowy uchwyt z termoodpornego tworzywa ułatwiający manipulowanie narzędziem i trzymanie podchwytem lub nadchwytem.

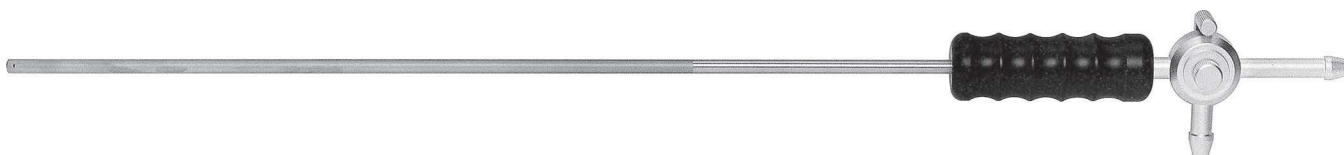

Nr Kat. YO-SCS-100-H

Nr Kat. YO-SCS-100

Model bez uchwytu w tej samej cenie.



Dodatkowo proponujemy wymienną, dokręcaną do uchwytu końcówkę typu IGŁA PUNKCYJNA Nr Kat. **YO-BIF-05095**



Wszystkie elementy składowe narzędzia dostępne są jako części zamienne.

Pistolet ssąco-płuczający YO-SWP-200. Zawór dwudrożny zapewniający komfort przełączania ssania-płukania, pistoletowy uchwyt, podłączenie drenów na Luer-Lock, łatwy do mycia i dezynfekcji.

Wszystkie elementy składowe narzędzia (w tym nakrętki, zawory) dostępne są jako części zamienne.


Uchwyt pistoletowy **EP-SWP-05099** Nr Kat. EP-SWP-200

Rurka ssąco-pł. Ø3mm, dł.330mm, Nr Kat. YO-SSS-03

Rurka ssąco-pł. Ø5mm, dł.330mm, Nr Kat. YO-SSS-05

Rurka ssąco-pł. Ø10mm, dł.330mm Nr Kat. YO-SSS-10

Igła Punkcyjna Ø5mm, Igła 1,5mm, dł.330mm, Nr Kat. YO-SSS-PUNK

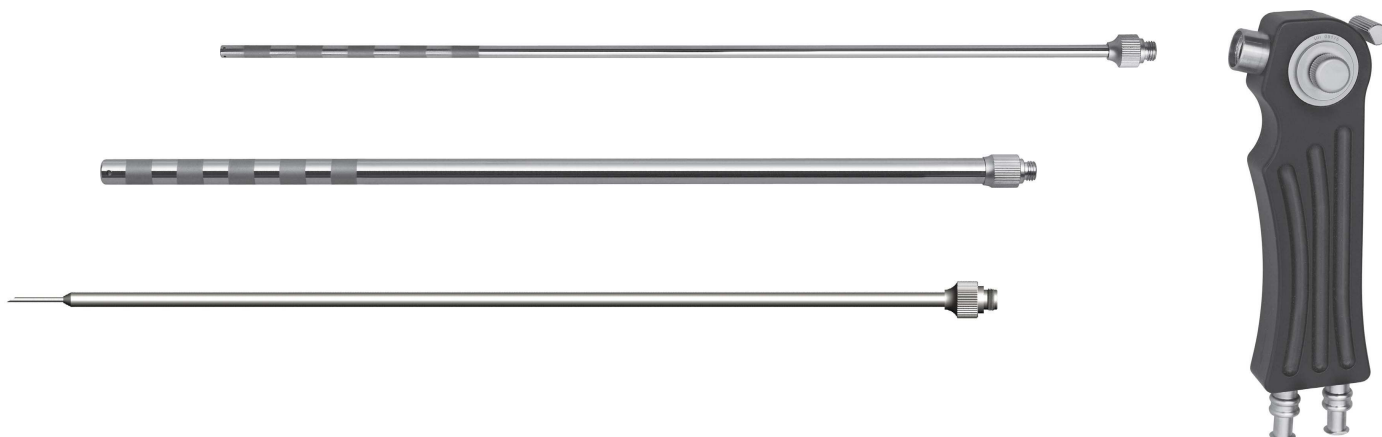

Pistolet ssąco-płuczący YO-SSM-300. Zawór dwudrożny zapewniający komfort przełączania ssania-płukania, poszerzony kanał ssący, ergonomiczny uchwyt, bezpośrednie podłączenie drenów, łatwy do mycia i dezynfekcji.


Wszystkie elementy składowe narzędzia (w tym nakrętki, zawory stożkowe itd.) dostępne są jako części zamienne.

Uchwyt pistoletowy **Nr Kat. YO-SSM-300**

Rurka ssąco-pł. Ø 3mm, dł.330mm, **Nr Kat. YO-SSM-03**

Rurka ssąco-pł. Ø 5mm, dł.330mm **Nr Kat. YO-SSM-05**

Rurka ssąco-pł. Ø 10mm, dł.330mm **Nr Kat YO-SSM-10**

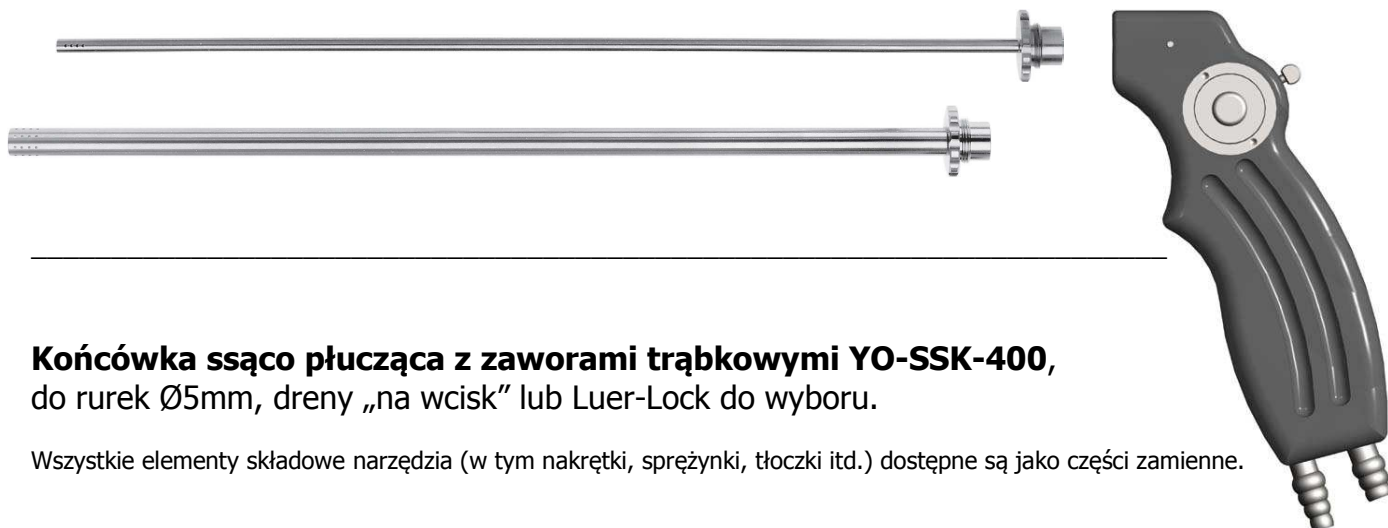


Końcówka ssąco płucząca z zaworami trąbkowymi YO-SSK-400, do rurek Ø5mm, dreny „na wcisk” lub Luer-Lock do wyboru.

Wszystkie elementy składowe narzędzia (w tym nakrętki, sprężynki, tłoczki itd.) dostępne są jako części zamienne.

Uchwyt trąbkowy Nr Kat. **YO-SSK-400-L** – podłączenie drenów typu Luer-Lock

Uchwyt trąbkowy Nr Kat. **YO-SSK-400** – podłączenie drenów „na wcisk”

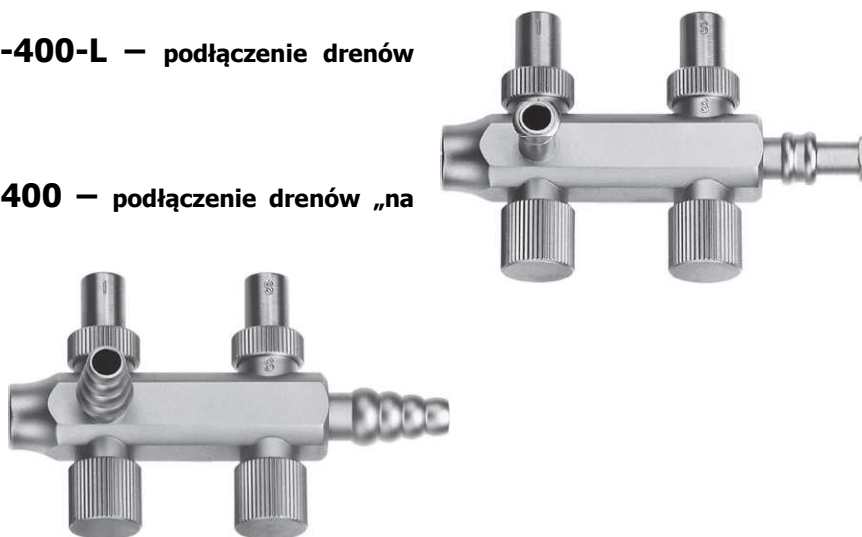

YO-BIF-05091

Rurka Ø5mm, dł. 330, 4 otwory odbarczające w dystalnej części rurki. (Na zamówienie dostępne są także rurki z większą ilością otworów odbarczających 16 lub 48). Otwory odbarczające przeciwdziałają wciąganiu tkanek do wnętrza rurki w czasie ssania.



YO-BIF-05097

Rurka Ø5mm, dł. 330, 12 dużych otworów odbarczające w dystalnej części rurki. Otwory odbarczające przeciwdziałają wciąganiu tkanek do wnętrza rurki w czasie ssania.



YO-BIF-05093

Rurka Ø5mm, dł. 330, o obłej końcówce do delikatnych tkanek, dodatkowo aż 48 otworów odbarczające w dystalnej części rurki przeciwdziałających wciąganiu tkanek do wnętrza rurki w czasie ssania.

YO-BIF-05094 – jak wyżej dł. 500mm.



YO-BIF05095

Igła punkcyjna Ø5mm, Igła Ø 1,5mm, dł.330mm.

Uwaga, możliwość zamówienia innej średnicy igły!



Ssanie-Płukanie do trudnych laparoskopii YO-SSG-500,

typu *Heavy Duty* – do odsysania dużych skrzepów, fragmentów tkanek:

- nie zatyka się! - przekrój ssawki na całej długości oraz wszystkich elementów wynosi 10mm.
- uniwersalne podłączanie drenów: „na wcisk” lub złączkę Luer-Lock
- w komplecie rurka o Ø5mm do standardowych zastosowań.

Użycie ssawki *Heavy Duty* pozwala na skuteczną ewakuację dużych skrzepów lub fragmentów tkanek, szybko przywraca widoczność pola operacyjnego, znacznie skraca czas odsysania. W czasie zwykłych zabiegów zapewnia wygodną pracę ze standardową rurką o średnicy 5mm.

YO-SSG-500- komplet: uchwyt z zaworami trąbkowymi + 2 rurki- rurka Ø5mm i Ø10mm –

Wszystkie elementy składowe narzędzia (w tym nakrętki, sprężynki, tłoczki itd.) są dostępne jako części zamienne.



Igła punkcyjna Ø5mm, dł. robocza 330mm, połączenie typu Luer-Lock.



Nr Kat. YO-PUK- 01599

Igła Punkcyjna z możliwością koagulacji monopolarnej z pojedynczym zaworem ssącym, dł.330mm, średnica 5mm, połączenie drenu „na wcisk”.



Nr Kat. YO-MOS05094

Szczotki do czyszczenia kaniul i narzędzi laparoskopowych, autoklawowalne 134°C, specjalna końcówka nie powodująca zarysowań narzędzi, dł.330mm.

Średnica 3mm

Nr Kat. YO-RBH 03099

Średnica 5mm

Nr Kat. YO-RBH 05099

Średnica 10mm

Nr Kat. YO-RBH 10099



Złączka typu Luer-Lock tzw. żeńska, do drenów o średnicy 6mm.
Nr Kat. YO-LLW-11001



Złączka typu Luer-Lock tzw. męska, do drenów o średnicy 6mm.
Nr Kat. YO-LLM-11001

Uwaga, wszystkie przedstawione ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu prawa.

Kontakt , informacje, składanie zamówień:

Stanisław Wawrzyniak Tel. 883 013 093, e-mail: biuro@yomed.pl

YOMED - Joanna Wawrzyniak , ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice