

## APARAT PRZYŁÓŻKOWY AP 430


Analogowy aparat przyłóżkowy z klawiszem. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Czerwona dioda LED świecąca w czasie wciskania przycisku informuje o załączeniu sygnału przywoławczego. Dodatkowo aparat umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

### Dane techniczne:

Napięcie zasilania		12 V
Pobór prądu	zał.max	10 mA
	wył.max	0 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm)		90x90x20
Max ilość aparatów w jednej sali		bez ograniczeń

### Podstawowe funkcje:

- przywołanie

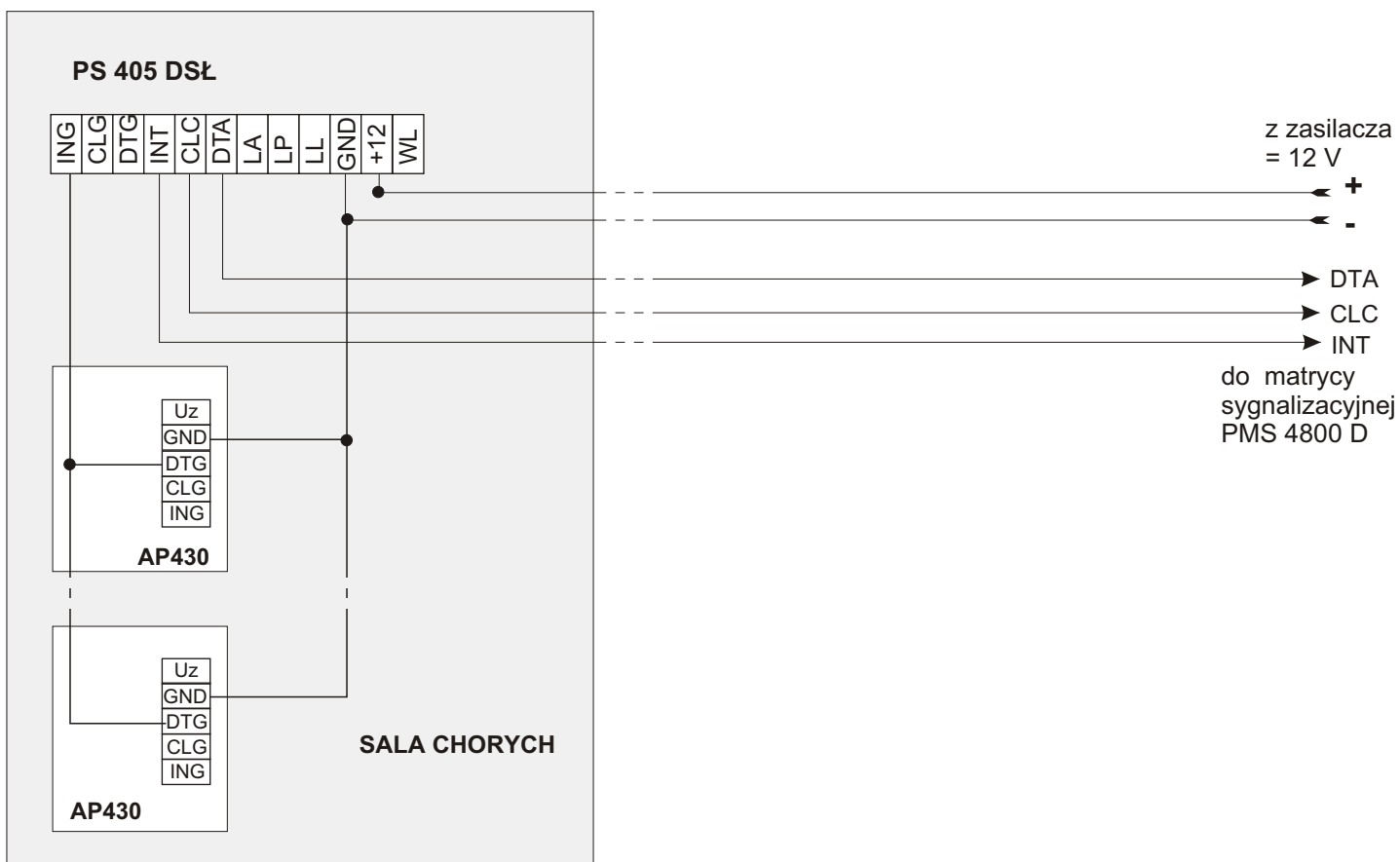

Sposób podłączenia aparatów przyłóżkowych AP 430 do podcentrali sali PS 405 DSŁ

**SCHEMAT POŁĄCZEŃ CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D  
 Z APARATAMI AP 420 I AP 430**
