

Aron junior

07030

Łóżko dziecięce Aron łączy w sobie funkcjonalność z efektywnością odczuwaną zarówno przez pacjenta jak i personel pielęgniarski.

Dzięki 180-centymetrowej długości leża łóżko to jest odpowiednie podczas intensywnej i standardowej opieki nad nastoletnimi pacjentami.

Wózek

- Rama z 2 bocznymi belkami z aluminium i 2 belkami ze stali
- Regulacja w pionie za pomocą 2 podnośników teleskopowych
- Regulacja pozycji Trendelenburga (*) i odwróconej pozycji Trendelenburga do $\pm 16^\circ$.
- Zintegrowane kółka \varnothing 150 mm na precyzyjnych łożyskach kulkowych, blokowanych centralnie.
- Pedał aktywujący mechanizm hamulca centralnego lub blokadę kierunkową.
- Blokada hamulca dostępna we wszystkich pozycjach łóżka.
- Wykończone syntetyczną pokrywą
- Otwarty wózek poprawia dostępność do przestrzeni pod łóżkiem i ułatwia sprzątanie.

Platforma materaca

- Platforma materaca z trzema lub czterema(*) sekcjami.
- Oparcie pleców regulowane elektrycznie do $\pm 70^\circ$ z autoregresją.
- Podparcie kolan regulowane elektrycznie do $\pm 34^\circ$ (w przypadku 4 sekcji).
- Podnóżek regulowany manualnie do pozycji Fowlera (w przypadku 4 sekcji).
- Podparcie nóg regulowane ręcznie do 14° (w przypadku 3 sekcji).
- Elektryczna manipulacja sekcji platformy materaca wyposażona w zacisk bezpieczeństwa.
- Na platformie materaca zamocowano laminowane panele perforowane o grubości 6 mm.
- Standardowe wyposażenie z wycięciami na pasy ograniczające ruchy pacjenta.
- Standardowa szerokość platformy wynosi 83 cm, a długość - 180 cm.
- Łóżko standardowo wyposażone w teleskopowe rozszerzenie do + 20 cm.
- Złącze ekwipotencjalne.
- 4 narożniki łóżka zabezpieczono zderzakami.
- 4 narożniki łóżka wyposażono w uchwyty, w których można zamocować stojak na kroplówkę lub podnośnik.
- Fronty wykończono chromem lub żywicą epoksydową Vela.
- Aluminiowe belki ze zintegrowanymi szynami, wieszakami na akcesoria i zwijaczami kabli.

Manipulacja elektryczna

- Sterownik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i trybem oszczędzania energii.
- Funkcje elektryczne łóżka można uruchamiać przy pomocy przełącznika ręcznego, wyposażonego we wstępnie zaprogramowaną funkcję spania i funkcję relaksu.
- Ministerownik pielęgniarski jest dostarczany z pokrętelem umożliwiającym przełączanie wszystkich funkcji elektrycznych.
- Jeden klawisz służy do uruchomienia pozycji Trendelenburga.

Typy paneli

- Vela

Oslony boczne

- Atmosphere (*)

Akcesoria


Zapoznaj się z naszą listą akcesoriów.

(*) Opcja



Wymiary i dane techniczne

- Szerokość: 93 cm, Długość: 192 cm
- Regulacja wysokości platformy materaca: $\pm 41,5$ cm - $\pm 81,5$ cm
- Bezpieczne obciążenie robocze: 230 kg
- Maksymalne obciążenie statyczne: 500 kg
- Waga (bez opcji): 140 kg
- Wymiary leża: 180 x 86 cm
- Wymiary materaca: 175 x 82 cm, grubość: 12 do 16 cm

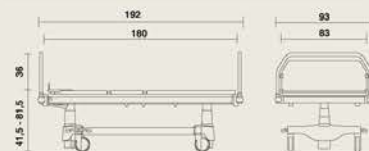

Materiały i wykończenie

- Metal: wykończony żywicą epoksydową RAL 9006 w kolorze białego aluminium lub chromu(*)
- Syntetyczne.
- Laminat.
- Zawiasy wyposażone w łożyska samosmarujące (=brak konieczności konserwacji).
- Możliwość stosowania większości środków czyszczących.

Opcje

- System składający się z 4 sekcji
- Oslony boczne Atmosphere
- Podwójny pedał nożny z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.
- Szybkie zwalnianie blokady elektromechanicznej (CPR).
- Brzęczyk hamulca.
- 5. kółko.
- Aluminiowy pedał z czerwono-zieloną gumową pokrywą.

