



...bliżej pacjenta

**Profilaktyka leczenia odleżyn
FUSION™ Hybrid komfortowy materac
zmiennociśnieniowy**

...Pomagamy zmniejszyć ryzyko i uniknąć powikłań




Elastyczna powierzchnia pielęgnacyjna w każdym miejscu

“ Fusion Hybrid oferuje reaktywną albo aktywną terapię. Pozwala specjalistom natychmiast umieścić pacjentów zgodnie z ich potrzebami klinicznymi na odpowiedniej terapii. Materac 2w1 - czyli zmiennociśnieniowy i statyczny, zwiększa efektywność w użytkowaniu i oszczędza czas personelowi medycznemu.^{1,2}

Zdolność do poruszania komór zapewnia efektywne rozwiązania, pomagają zoptymalizować obszar strefy nacisku przy jednoczesnym spełnieniu zmieniających się potrzeb klinicznych pacjentów.

Ten elastyczny wybór terapii zmniejsza pracę dla świadczeniodawców i minimalizuje ryzyko pacjentów.¹

”

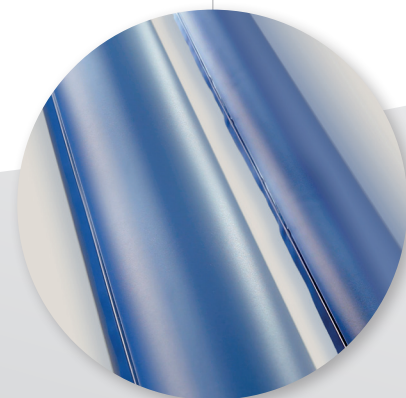

REAKTYWNA LUB AKTYWNA TERAPIA

Każda komora powietrzna zawiera specjalistyczną piankę redystrybucji ciśnienia. W stanie bez zasilania zapewnia to reaktywną, stałą powierzchnię niskiego wsparcia nacisku dla podstawowej opieki medycznej. Po podłączeniu zespołu napędowego, te same komory powietrzne działają jako powierzchnia aktywnej terapii zapewniając co 8 minut, 1 w 2 cyklach komorowych, regularną redystrybucję ciśnienia dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem odleżyn.

MATERAC STREFOWY


Fusion Hybrid powierzchnia wsparcia ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla różnych części ciała, dla głowy, tułowia i strefy pięt. Komory w strefie pięt są mniejsze w celu ochrony tego wrażliwego obszaru nacisku u pacjenta.

Pracując jako bierna powierzchnia nośna, Fusion Hybrid oferuje pacjentom stałe niskie ciśnienie dla podstawowej opieki strefy nacisku.

Podłączenie urządzenia do zasilania zapewnia hybrydowe połączenie aktywnej terapii dla pacjentów a ciśnienia Interface są zmniejszone poniżej 15mmHg około 25% każdego cyklu.

FUSION HYBRID SYSTEM OPIEKI

Terapia reaktywna

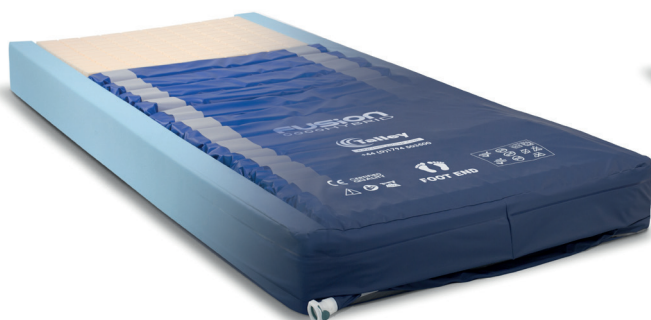

Terapia aktywna



► Pozytywne opinie produktu

► Opinie pacjentów o FUSION Hybrid:

- wszyscy pacjenci, którzy testowali materac Hybrid uznali go jako wygodny, bezpieczny, stabilny i cichy.²
- 91% testujących wypowiedziało się, że materace są: "wygodne" a nawet "bardzo wygodne" i stwierdziły, że miały "Bardzo dobrą" jakość snu.¹

► Opinie personelu o FUSION Hybrid:

- łatwy w konfiguracji i obsłudze, bardzo cicha praca i wygodne dla pacjenta.¹
- możliwość przełączania materaca ze statycznego do aktywnego odbywa się za pomocą jednego przycisku
- bezproblemowy w użyciu, bezpieczny i niezawodny.²




AKTYWNE SIEDZISKA

Jeżeli pacjent jest zmuszony do siedzenia, FUSION Hybrid oferuje aktywną pompowaną poduszkę do całodobowej opieki 24-godzinnej,

Index wsparcia ciśnień

Interfejs próby ciśnieniowej wykonywany zgodnie z proponowanym protokołem testowym S3i³ wyraźnie wskazuje różnice między reaktywną (stałą niskociśnieniową) powierzchnią nośną i aktywnym (zmiennym) systemem materaca.

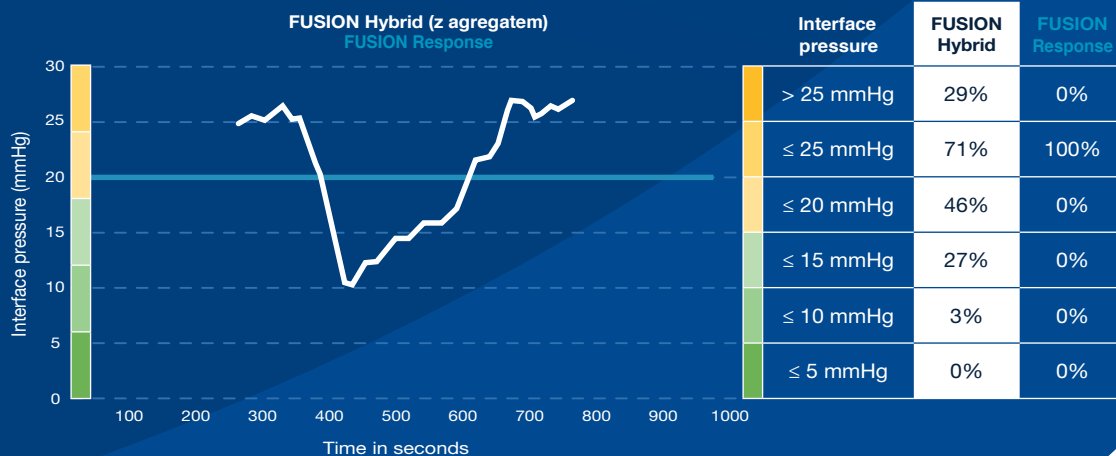

**FUSION
OPIS**


Zobacz szczegóły
strona wstecz




FUSION RESPONSE

Czuły obszar Pielęgnacja nacisku w każdym miejscu

Niezasilany - piankowy i hybrydowy - pompowany materac Fusion Hybrid automatycznie dopasowuje się do pacjenta, dostarcza reaktywną, stałą powierzchnię niskiego wsparcia dla podstawowych potrzeb pacjenta w obszarach wrażliwych.

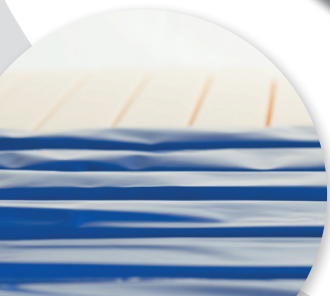

Automatic Pressure Recovery

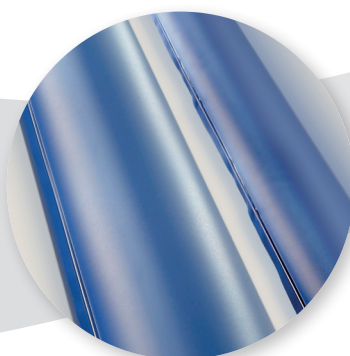

SPECJALISTYCZNY PROJEKT KOMÓR

Wszystkie komory zawierają specjalistyczne ciśnienie redystrybucji, a użyta pianka stanowi wsparcie pacjenta i chroni obszary nacisku.

CZUŁY NADMUCH REDYSTRYBUCJI

Czuły nadmuch redystrybucji przystosowany jest do obsługi pacjenta, pozwalając na przepływ powietrza pomiędzy połączonymi komorami odpowiednio do masy ciała pacjenta, ruchu i położenia.

Ponieważ pacjent porusza się, system automatycznego odzyskiwania wspiera zawór, aby materac ponownie się napompował do normalizacji ciśnienia materaca.

STREFOWY MATERAC

Głowa, tułów i strefa pięt mają na celu zapewnienie konkretnego wsparcia dla pacjentów, a komory w strefie pięt są celowo mniejsze, aby pomóc chronić ten wrażliwy obszar ciała.

LITERATURA

1. Sims A. Understanding the use of hybrid mattress systems in an acute care setting: eliminating delays in support surface provision, improving ease of use and maintaining skin integrity. Wounds UK Conference, Harrogate 2015. Poster Presentation.
2. Haywood C. Clinical evaluation of a new hybrid mattress within a rehabilitation setting. Wounds UK Conference, Harrogate 2015. Poster Presentation.
3. Tissue Viability Society. Laboratory measurement of the interface pressures applied by active therapy support surfaces: A consensus document. J Tissue Viability. 2010 Feb;19(1):2-6.



FUSION Hybrid and FUSION Response are Trade Marks of Talley Group Limited.

Talley manufacture products to comply with National and International safety standards and are certified to ISO9001, ISO13485 and Directive 93/42/EEC. Every care has been taken to ensure that the information contained in this brochure was correct at the time of going to press. However, Talley reserve the right to modify the specification of any product without prior notice in line with a policy of continual product development. Our standard terms and conditions apply. © Talley Group Limited 2016. All rights reserved.



Talley Group Limited
Premier Way, Abbey Park Industrial Estate
Romsey, Hampshire, SO51 9DQ England
TEL: +44(0)1794 503500
FAX: +44(0)1794 503555
EMAIL: sales@talleygroup.com



www.talleygroup.com