

Waga do ważenia niemowląt WE15P2 i WE20P2

Funkcje i cechy wagi:


Dodatkowa filtracja



Zapamiętanie wyniku



Złącze Mini USB



Cyfry wyż. o wysokości 2,2cm



Ważenie niemowląt



5 lat gwarancji na przetwornik pomiarowy



2 lata gwarancji



Możliwa legalizacja

Opis:

Waga do ważenia niemowląt, wyposażona jest w podświetlany, ciekłokrystaliczny wyświetlacz z dużymi czytelnymi cyframi (wysokość 2,2cm). Waga niemowlęca posiada nowoczesną ergonomiczną i sztywną szalkę o odpowiednim dla dziecka kształcie, dziecko można ważyć, także w pozycji siedzącej.

Waga dla niemowląt posiada funkcje: tara, odczyt zwiększonej rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym, zapamiętywanie ostatniego wyniku ważenia oraz dodatkowy filtr tłumiący wpływ ruchów ważonego dziecka na wskazania wag. Odczyt zwiększonej rozdzielczości można wykorzystać np. do wyznaczenia przyrostu masy niemowlaka przy karmieniu lub pomiar przygotowanej masy pokarmu.

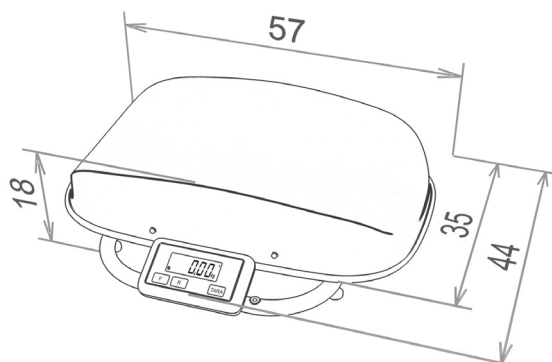
Dokumenty:

- [certyfikat zatwierdzenia typu WE](#)
- [deklaracja zgodności CE](#)
- [certyfikat zgodności CE](#)
- [wpis do rejestru wyrobów medycznych](#)

Dane techniczne:	WE15P2	WE20P2
Obciążenie maksymalne	15kg	20kg
Obciążenie minimalne	100g	200g
Zakres tarowania	-15kg	-20kg
Dokładność odczytu	1g / 5g	2g / 10g
Czas stabilizacji wskazań	1-5s	
Masa wagi	6,5kg	
Temperatura pracy	+10°C - +40°C	
Wymiary pomostu	55x35cm	
Wymiary gabarytowe wagi	57x44x18cm	

Dodatkowe wyposażenie:

- zasilanie akumulatorowe Li-ion do 50h ciągłej pracy -
- kabel USB o długości 1,8m
- Legalizacja
- RS232 z kablem 2m (zastępuje USB)
- RS485 (wykonanie indywidualnie)

Rysunek - wymiary gabarytowe wagi i szalki [cm]:


Zasilanie zasilacz stabilizowany, 12V/100mA