

TR 2000/3000

Wózki prysznicowe



Specyfikacja

Długość	1600/1900/2100 mm
Szerokość	705 mm
Wysokość	625-925 mm (595-895), Standard 685-985 mm (655-955), Podwyższony/opcja
Udźwig	150 kg
Podstawa jezdna	Stal nierdzewna i ocynkowana pomalowana proszkowo
Koła	Dwa koła z hamulcami i dwa z blokadą kierunku jazdy
Sterowanie	Pedał nożny do regulacji wysokości
Materac, poduszka	Materiał ogniooporny, miękki, nienasiąkliwy, z PCV. Szary (standard) żółty lub niebieski (opcja)
Akumulator (TR 3000)	Ładowalny, 24 V



Zarejestrowany w Urzędzie Prod. Med., Szwecja jako urz.med. klasy 1, MDD 93/42EEC

Wózek prysznicowy, który ułatwia personelowi wykonywanie kąpieli pod prysznicem i przewożenie

Wózek prysznicowy TR 2000/3000 ma unikalną cechę w postaci kolumny zamontowanej bliżej jednego boku. Dzięki temu leże można wsunąć do łóżka chorego zapewniając łatwe i bezpieczne przełożenie pacjenta na wózek. Jest też łatwy dostęp do pedałów regulujących wysokość, do sterowania pochyleniem oraz do kół z hamulcami i blokadą kierunku jazdy.


Barierki boczne są odchylane, gdy leże znajduje się nad łóżkiem chorego.

Umieszczenie pacjenta na wózku nie wymaga już dużego wysiłku. Jest to czynność łatwa, bezpieczna i delikatna. Barierki są następnie podnoszone zabezpieczając pensjonariusza zanim odjedziemy wózkiem z łóżka. Blokada podniesionej barierki następuje automatycznie.

Barierka boczna po stronie personelu odchyła się zupełnie w dół co ułatwia dostęp do pacjenta w czasie przekładania. Leże posiada odpływy kanalizacyjne w obu końcach leża dzięki czemu możemy chorego położyć głową w dowolną stronę. Wąż odpływowy jest demontowalny i ma regulowaną długość.



TR 3000 - Tył podstawy jezdnej

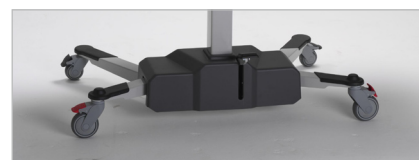

TR 2000 - Tył podstawy jezdnej



TR 2000 i 3000 - Wysoka podstawa jezdna

TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB

PO Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN

Phone: +46 140-38 50 60

Fax: +46 140-38 50 61

TR GROUP INC.

903 WEDEL LANE, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, USA

Phone: +1 800-752-6900

Fax: +1 847-724-8566

TR EQUIPMENT UK LTD.

INNOVATION CENTRE, GALLO WS HILL, WARWICK CV34 6UW ENGLAND

Phone: +44 844 335 8386

Fax: +44 844 335 8383

TRANSPORHEMED GMBH

GARTENSTRASSE 9, 42799 LEICHLINGEN, GERMANY

Phone: +49 2175-16 94 22-0

Fax: +49 2175-16 94 22-19

Urządzenia do higieny zaprojektowane dla ludzi

www.trequipment.com



TR 2000/3000

Wózki przysznicowe



Właściwości

Regulacja wysokości jest realizowana pedałem nożnym dzięki temu personel może kąpać chorego w najwygodniejszej dla siebie pozycji. Jednocześnie ma wolne dwie ręce do zajęcia się chorym.

Dzięki siłownikowi pasowemu wózek TR3000 porusza się góra-dół cicho, sprawnie i bez szarpnięć. Siłownik jest zasilany z dwóch akumulatorów o dużej pojemności. Jeśli wymagają one doładowania słychać sygnał dźwiękowy.

Leże może być łatwo ustawiane w pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga przy pomocy dźwigni znajdującej się w jej obu końcach. Regulacja pochylenia jest realizowana przy pomocy sprężyn gazowych.

Model hydrauliczny

TR 2000	Standard	L=1900mm
TR 2000-S	Pediatryczny	L=1600mm
TR 2000-L	Długi	L=2100mm

Model zasilany z akumulatorów

TR 3000	Standard	L= 1900 mm
TR 3000-S	Pediatryczny	L= 1600 mm
TR 3000 -L	Długi	L= 2100 mm

Akcesoria / Opcje

- Poduszka klinowa
- Aby łatwiej podejść podnośnikiem do wózka przysznicowego podstawę jezdną można podwyższyć na oryginalnie montowanych tulejach dystansowych o długości 60 mm. Wówczas użyjemy 135 mm wolnej przestrzeni pod podstawą jezdną.
- Na życzenie wszystkie modele mogą być dostarczone z materacem i poduszką w kolorze niebieskim lub żółtym.

Łatwy do prowadzenia i manewrowania

Wózek jest łatwy do prowadzenia i manewrowania dzięki dużym kołom z hamulacami i mniejszym z blokadą kierunku jazdy.




Nisko umieszczony środek ciężkości podstawy jezdnej zapewnia stabilność.

Barierki boczne mogą być łatwo podnoszone do pionu podczas jazdy dzięki czemu łatwiej można przejechać przez wąskie drzwi redukując szerokość wózka.

Trwały materiał - łatwe mycie

Podstawa i konstrukcja jest wykonana ze stali nierdzewnej i ocynkowanej, pomalowanej proszkowo. Jest odporna na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.

Podczas czyszczenia wózka można podnieść leże z materacem do pionu od strony opiekuna. Leże jest na zawiasach. Dzięki temu mycie konstrukcji jest łatwe, a materac może ocieknąć i wyschnąć.

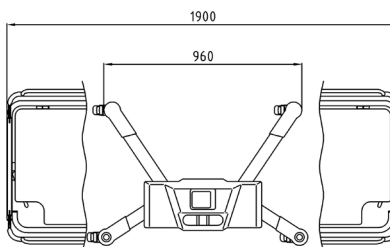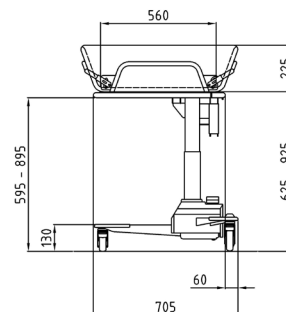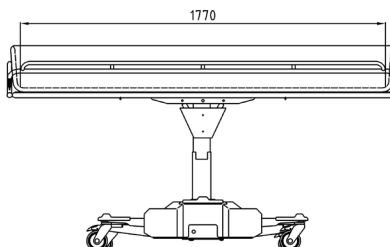

TR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub udoskonaleń bez powiadamiania

Dystrybutor:



KLAROMED Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówiek
tel.: +48 22 299 30 40
fax: +48 22 783 16 41
e-mail: klaromed@klaromed.pl
www.klaromed.pl

TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB PO Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN
TR GROUP INC. 903 WEDEL LANE, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, USA
TR EQUIPMENT UK LTD. INNOVATION CENTRE, GALLO WS HILL, WARWICK CV34 6UW ENGLAND
TRANSPORHEMED GMBH GARTENSTRASSE 9, 42799 LEICHLINGEN, GERMANY

Phone: +46 140-38 50 60 Fax: +46 140-38 50 61
Phone: +1 800-752-6900 Fax: +1 847-724-8566
Phone: +44 844 335 8386 Fax: +44 844 335 8383
Phone: +49 2175-16 94 22-0 Fax: +49 2175-16 94 22-19

Urządzenia do higieny zaprojektowane dla ludzi

www.trequipment.com

