

# Shado<sup>®</sup> Hydroterapia

Nowa  
Generacja

SCALEO Medical oferuje szeroki zakres wózków prysznicowych Shado<sup>®</sup> od 160 kg do 350 kg przeznaczonych dla chorych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej.

Wózki Shado<sup>®</sup> są łatwe w użyciu. Służą do przewożenia chorych z łóżka do łazienki i do kąpieli w pozycji leżącej.

#### Różne modele i warianty wózków:

- Shado<sup>®</sup> 160 XS
- Shado<sup>®</sup> 180 dziecięcy, średni, dla dorosłych
- Shado<sup>®</sup> 200
- Shado<sup>®</sup> 240 bariatryczny
- Shado<sup>®</sup> 350 bariatryczny



Shado<sup>®</sup> w wersji elektrycznej  
z 4 kołami z niezależnymi hamulcami

- *Leże ustawiane w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga*
- *Hydrauliczne lub elektryczne*
- *Barierki boczne oraz przy głowie i przy stopach wykonane ze stali nierdzewnej*
- *Koła z hamulcami niezależnymi lub z hamulcami na każdą parę kół*
- *4 długości i 3 szerokości wózków*
- *Wersja elektryczna z pedałem sterującymi lub z pilotem*

**Scaleo**  
M E D I C A L

## Shado® 180 i Shado® 200

Wózek prysznicowy **Shado® 180** jest bardzo wygodny do transportu i kąpieli chorych przebywających w szpitalach i ośrodkach opieki długoterminowej.

Te dwa modele są przeznaczone dla obłożnie chorych oraz dla chorych leżących.

Są one doskonałe do higieny i opieki zapewniając komfort i bezpieczeństwo zarówno choremu jak i opiekunowi czy pielęgniarce.



- *Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w standardzie*
- *Hydrauliczna regulacja wysokości to wygoda i niezawodność działania*
- *Dwie głęboko odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają wygodne przesuwanie chorego oraz bezpieczny dostęp do łóżka*
- *Nowy wzmocniony materac z PCV*

Panel prysznicowy to bardzo wygodne dodatkowe wyposażenie wózka, które zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo zarówno choremu jak i opiekunowi czy pielęgniarce.

- Jeden prysznic służy do mycia chorego. Posiada mieszacz termostatyczny oraz kontroler ciśnienia. Wbudowany czujnik pokazuje temperaturę wody na cyfrowym wyświetlaczu na froncie panela.
- Drugi prysznic służy do mycia i dezynfekcji wózka prysznicowego oraz innych urządzeń medycznych

## Przesuwanie chorego z łóżka na wózek **Shado®**

Wiele pielęgniarek i opiekunów cierpi na bóle kręgosłupa z powodu częstego ręcznego dźwigania i podnoszenia chorych.

Usztywniona deska ślizgowa **Trans'Gliss®**, łatowślizgi i materace ślizgowe **Maxitrans®** to techniczne pomoce ułatwiające przesuwanie chorych z łóżka na wózek, również chorych mokrych czy rozebranych.



Maxitrans®



Łatowślizgi i materace ślizgowe **Maxitrans®** są wykonane z poliamidu. Dzięki temu są bardzo mocne i śliskie. Znacznie redukują siły tarcia. Przy ich użyciu można bardzo łatwo i lekko przesuwać chorych w pozycji leżącej z łóżka na wózek i odwrotnie jeśli łóżko i wózek są na tej samej wysokości.

Deski ślizgowe **Trans'Gliss®** pomagają przesuwać chorych w pozycji leżącej nawet wtedy gdy występuje pewna różnica w wysokości wózka i łóżka lub niewielka szpara pomiędzy nimi.

Deski ślizgowe są bardzo cenione przez opiekunów ponieważ są łatwe w użyciu, składane oraz proste do mycia i dezynfekcji.



Trans'Gliss®

## Bariatryczny Shado® 240 i Shado® 350

W związku z tym, że przybywa osób otyłych zostały przygotowane specjalne modele wózków prysznicowych, dzięki którym można zapewnić tym osobom wysoki poziom higieny i opieki. Dostępne są dwa modele bariatryczne do 240 kg i do 350 kg.




**Shado® 350** elektryczny z dwustronnymi pedałami do regulacji wysokości oraz szerokim leżem.

### Shado® 350 - szczegóły




Mocne barierki ze stali nierdzewnej przy głowie i przy nogach

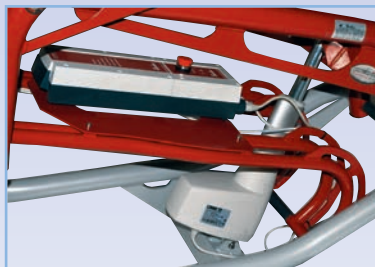

Sterownik i siłownik do regulacji wysokości



Dwustronne pedały do regulacji wysokości

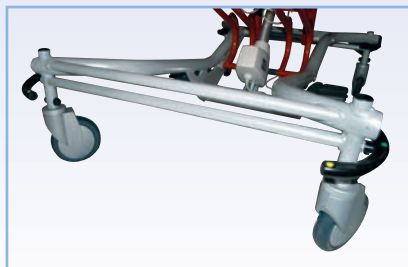

Mocna rama



Elektryczny siłownik do pozycji Trendelenburga



Pozycja z odchylanymi barierkami do łatwego przesuwania pacjenta

### Opcje

Zbiornik ze stali nierdzewnej Vido na nieczystości płynne z zaworem odcinającym i odpływowym sterowanym czasowo oraz syfonem o średnicy 100 mm.

Ścienne ładowarka i dodatkowy akumulator do modelu elektrycznego E Shado®.

Taca ze stali nierdzewnej.

## Specyfikacja techniczna

Model		Shado 160 XS	Shado 180 child	Shado 180 medium	Shado 180 adult	Shado 200	Shado 240*	Shado 350*
Leże w pozycji wysokiej	Wysokość leża	98,0 cm	98,0 cm	98,0 cm	98,0 cm	98,0 cm	98,0 cm	96,8 cm
	Wysokość poręczy	113,2 cm	113,2 cm	113,2 cm	113,2 cm	113,2 cm	113,2 cm	112,0 cm
Leże w pozycji niskiej	Wysokość leża	52,3 cm	52,3 cm	52,3 cm	52,3 cm	52,3 cm	52,3 cm	64,5 cm
	Wysokość poręczy	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	67,5 cm	79,7 cm
Długość leża		140,4 cm	161,0 cm	176,0 cm	186,0 cm	186,0 cm	186,0 cm	186,0 cm
Szerokość leża		60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm	71,0 cm	71,0 cm	89,0 cm
Długość całkowita		160,6 cm	181,0 cm	196,0 cm	206,0 cm	206,0 cm	206,0 cm	206,0 cm
Szerokość całkowita		77,0 cm	77,0 cm	77,0 cm	77,0 cm	87,7 cm	87,7 cm	105,7 cm
Prędkość pochylania wzdłużnego		szybki	szybki	szybki	szybki	szybki	wolny	wolny
Leże Regulacja pochylecia Siłowniki elektryczne 24 V		szare z PCV, grubość 15 mm anty-Trendelenburga 7°, Trendelenburga 2° główny : siła 10.000 N pomocniczy : siła 500 N średnia ilość cykli góra/dół : 40 czas ładowania: około 8 godz.						

\* Modele dostępne tylko w wersji elektr.

### Leże i rama

- Elastyczne, szare leże wykonane z PCV, grubość 15 mm
- 4 odbojniki w każdym z rogów leża
- Rama ze stali lakierowana proszkowo
- Konstrukcja stalowa malowana katalforetycznie wyjątkowo odporna na korozję
- 4 koła Tente® o średnicy 150 mm, podwójne koła dla modeli do 350 kg
- Poręcze boczne ze stali nierdzewnej z automatycznym blokowaniem
- Poręcze przy głowie i nogach ze stali nierdzewnej mocowane na dwie śruby
- Sterowanie pochyleciem Trendelenburga w szczycie leża

### Materac i odpływ

- Miękki materac do intensywnego użytkowania z bardzo mocnego PCV pokrytego płótnem
- Boki materaca dobrze chroniące przed kontaktem z poręczami bocznymi
- Kanały odpływowe: 2 boczne i 1 centralny, spust wody przy stopach
- Korek odpływowy na łańcuszku, odpływ łatwodemontowalny bez narzędzi
- Elastyczny wąż odpływowy, długość 1m, średnica 40 mm
- Na życzenie dostępny wąż o innej długości
- Poduszka miękka w postaci półwałka lub trójkątnego klina

### Elementy bezpieczeństwa

- Przycisk awaryjnego zatrzymania na sterowniku
- Awaryjne obniżanie w przypadku rozładowania akumulatora
- 2 boczne chowane poręcze z prostym i bezpiecznym mechanizmem
- Alarm przy rozładowanym akumulatorze

Shado® jest produktem oznaczonym znakiem CE, zgodnie z normą EN 10535 spełniającą wymogi dyrektywy 93/42/EEC

**Scaleo**  
M E D I C A L

107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier - France  
Tel : +33 467 72 94 86 - Fax : +33 499 74 01 79  
www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

Shado® ma 2-letnią gwarancję

Wyprodukowany we Francji

ISO 9001  
ISO 13485



#### OZNACZENIE SPRZEDAWCY

Dystrybutor:

**KLAROMED**

KLAROMED Sp. z o. o.  
ul. Sobieskiego 123  
05-070 Sulejówek  
tel.: +48 22 299 30 40  
fax: +48 22 783 16 41  
e-mail: klaromed@klaromed.pl  
www.klaromed.pl