

TR 1000

Akumulatorowy fotel/krzesło prysznicowe



Bezpieczne - ładne - komfortowe - Najlepsza kąpiel pod prysznicem

Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR 1000 z elektryczną regulacją wysokości i przechyłami w przód i w tył zapewnia wydajny i komfortowy transport oraz kąpiel pacjenta.

Krzesło prysznicowe TR 1000 z elektryczną regulacją wysokości zaprojektowane z myślą o wygodzie i ergonomii pracy. Akumulatorowe krzesło prysznicowe TR1000 pozwala personelowi na regulację wysokości i przechyłów przód-tył za pomocą pilota, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta. Regulacja krzesła pozwala na komfortowe dla pacjenta ustawienie pod prysznicem zarówno do mycia włosów jak i reszty ciała. Krzesło prysznicowe TR1000 zapewnia godne warunki dla pacjenta oraz komfort pracy, precyzyjne pozycjonowanie oraz łatwy dostęp do pacjenta. Krzesło prysznicowe TR 1000 zapewnia pacjentowi komfort, bezpieczeństwo i naprawdę wygodną pozycję podczas zabiegów higienicznych. Ułatwia także znacząco współpracę z personelem medycznym co powoduje, iż proces transportu, przygotowania pacjenta i jego umycia przebiega niezwykle sprawnie i komfortowo dla obu stron. Konstrukcja krzesła wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.

Krzesło prysznicowe TR 1000 gwarantuje niezwykłą stabilność, łatwy dostęp do pacjenta i wygodną regulację jego położenia. Regulacja odbywa się płynnie, w delikatny sposób. Dodatkowo poczucie bezpieczeństwa zapewniają specjalnie wyprofilowane podłokietniki razem z regulowanym zagłówkiem stanowiącym podparcie głowy zarówno podczas transportu jak i zabiegów higienicznych.

Krzesło prysznicowe TR 1000 może być wykorzystywane także do transportowania chorego, korzystania z toalety czy przeprowadzania innych zabiegów higienicznych takich jak np. pedicure.

Zalety TR 1000:



Szeroki, płynny zakres regulacji wysokości, zapewniający poczucie stabilności i bezpieczeństwa.



Wygodny dostęp do pacjenta w każdej pozycji - także w pozycji przechylonej do przodu lub do tyłu.



Mechanizm przechyłu do przodu zapewnia łatwe i bezpieczne przeniesienie pacjenta z wózka czy pozycji stojącej zapewniając poczucie bezpieczeństwa i stabilności zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu.

TR 1000

Akumulatorowe krzesło prysznicowe



Siedzisko i oparcie zaprojektowane dla komfortu i łatwego utrzymania higieny.



Zagłówek zapewnia stabilne podparcie głowy i kręgosłupa szyjnego.



Kolumny odpowiadające za zmianę wysokości zapewniają delikatną regulację.



Składane podłokietniki wygodnie wyprofilowane dla bezpieczeństwa pacjenta.



Zintegrowane ergonomiczne siedzisko zaprojektowane z myślą o zwiększeniu komfortu pacjenta.



Opcja basenu montowanego do kresa prysznicowego- dodatkowe wyposażenie.



Łatwy w obsłudze pilot do regulacji wysokości oraz przechyłów.



Wymowalny akumulator, prosty w ładowaniu co sprawia, że krzesło TR 1000 jest zawsze gotowe do użycia.



Składane zabezpieczenia dodatkowo chroniące pacjenta od frontu.

NUYm

- Prosta budowa krzesła, opartego na kolumnach ułatwia jego czyszczenie i dezynfekcję, a także dostęp do pacjenta podczas transportu i kąpieli.
- Krzesło współpracuje z większością łatwoślizgów i sprawia, że transport pacjenta przebiega w wyjątkowo bezpieczny i komfortowy sposób.
- Siedzisko i podwozie umożliwiają także korzystanie ze standardowej toalety, w opcji basen mocowany pod siedziskiem.
- Zaprojektowany do stabilnego i prostego transportu pacjenta.
- Wszystkie elementy krzesła są gładkie i łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.
- Pas/y bezpieczeństwa dla pacjenta (biodrowy i piersiowy - opcja)
- W opcji - regulowany, składany podnóżek, dla większej wygody i poczucia bezpieczeństwa pacjenta.

Modele

Krzesło prysznicowe z prostymi podłokietnikami

Krzesło prysznicowe ze składanymi podłokietnikami do zabezpieczenia pacjenta od frontu

Akcesoria / Opcje

Regulowany, składany podnóżek.


Basen wsuwany pod specjalne siedzisko.

Specyfikacja

Zakres regulacji wysokości	400 mm (16")
Nośność	200 kg (440 lbs)
Przechył do tyłu	25°
Przechył do przodu	7°
Technologia	stal nierdzewna i stal ocynkowana lakierowana proszkowo
Koła	podwójne z blokadą hamulca, Ø100 mm (4")
Pilot	Pilot przewodowy, reguluje wysokość i przechyły przód-tył
Akumulator	wymowalny, ładowalny 24 V



zarejestrowany w Agencji produktów Medycznych w Szwecji, w klasie 1, MDD 93/42EEC.

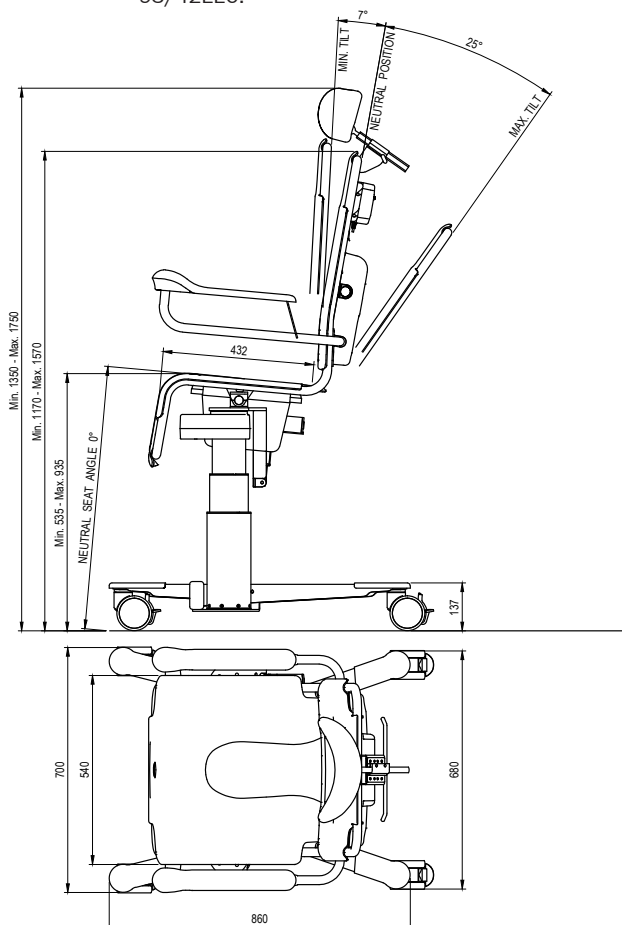

Dystrybutor:



KLAROMED Sp. z o. o.
ul. Sobieskiego 123
05-070 Sulejówek
tel.: +48 22 299 30 40
fax: +48 22 783 19 31
e-mail: klaromed@klaromed.pl
www.klaromed.pl

Producent: TR Equipment AB, Szwecja

*Urządzenia do utrzymania higieny
zaprojektowane z myślą o ludziach*

TR zastrzega sobie prawo do zmian i usprawnień bez dodatkowego poinformowania TR EQUIPMENT