



Myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek



Myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek (pojemników sanitarnych) firmy Discher służą do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i innych pojemników sanitarnych, takich jak miski o różnych średnicach, miski nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu itp.

Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane dla szpitali, domów opieki i prywatnych klinik. Są idealnym rozwiązaniem przy wyposażaniu brudowników (nawet tych o małej powierzchni) w oddziałach szpitalnych, izolatkach oraz węzłach sanitarnych.

Dostępne są trzy modele różniące się od siebie budową oraz wyposażeniem.



Discher Piccolo




Discher Master



Discher Boy

Przyjazny użytkownikowi panel sterujący czyni obsługę urządzeń firmy Discher łatwą i intuicyjną. Wyświetlacz graficzny (Discher Boy i Master) lub tekstowy (Discher Piccolo) informuje o bieżących fazach cyklu mycia i dezynfekcji oraz ewentualnych błędach. W modelach Discher Boy i Master podczas trwania cyklu dodatkowo może być wyświetlany wykres przebiegu temperatury mycia i dezynfekcji oraz wartości A_0 w czasie rzeczywistym.

Sterownik mikroprocesorowy umożliwia dopasowanie programów mycia i dezynfekcji do potrzeb użytkownika. Myjnie-dezynfektory Discher Boy i Master posiadają 27, a model Discher Piccolo 6, fabrycznych programów mycia i dezynfekcji.

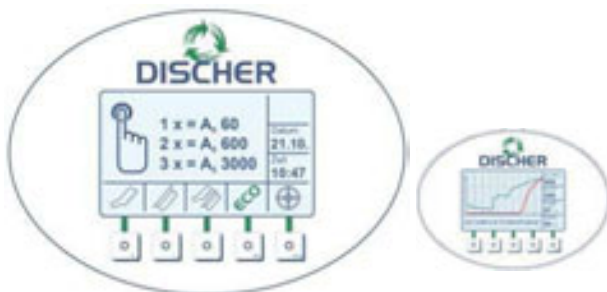

Panel sterujący Discher Boy oraz Master



Panel sterujący Discher Piccolo

Myjnie-dezynfektory firmy Discher posiadają dezynfekcję termiczną mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A_0 z możliwością nastawy dowolnej wartości A_0 wg wymagań użytkownika w zakresie od 60 do 3000. Myjnie-dezynfektory umożliwiają także dezynfekcję termiczną w oparciu o zadaną temperaturę w zakresie od 65 do 95°C i odpowiedni czas ekspozycji.

Komora myjni-dezynfektora jest wykonana ze stali kwasoodpornej i posiada zaokrąglone naroża, zapewniając optymalne warunki higieniczne mytych wyrobów, brak możliwości gromadzenia się zanieczyszczeń w narożach komory oraz pochyloną górną część komory. Duże wymiary komory umożliwiają umycie i dezynfekcję jednorazowo jednego basenu i jednej kaczki razem lub trzech kaczek.

Dzięki unikalnej konstrukcji uchwytu mycia, w myjni-dezynfektorze można również oczyszczać miski nerkowe, pojemniki do zbiórki moczu i inne wyroby. Uchwyt mycia może być wykonany do różnego kształtu basenów, kaczek lub innych wyrobów.



Wysoka skuteczność procesu mycia i dezynfekcji w urządzeniach firmy Discher została osiągnięta dzięki planetarnym ramionom natryskowym oraz wielu stałym i obrotowym dyszom natryskowym, które zapewniają optymalne mycie i dezynfekcję wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni wyrobów.

Wszystkie krytyczne części urządzenia, takie jak, wodne instalacje wewnętrzne, zbiornik wody, pompa, ramiona natryskowe i dysze natryskowe są podczas normalnej pracy urządzenia automatycznie, co 24 godziny, dezynfekowane przy użyciu pary wodnej z wbudowanej wytwornicy pary.

Para wodna skutecznie zapobiega ryzyku wtórnego skażenia. Okresy dezynfekcji systemu myjni-dezynfektora mogą być dowolnie regulowane w odstępach od 0 (po każdym cyklu mycia i dezynfekcji) do 255 godzin.




Dzięki suszarce (opcja) umyte i zdezynfekowane wyroby mogą zostać wysuszone powietrzem i schłodzone do natychmiastowego użycia.

Drzwi komory mycia wyposażone są w bezobsługowy samooczyszczający się system uszczelnienia, zapewniający całkowitą szczelność komory mycia, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania uszczelki gumowej, która z czasem ulega zużyciu.

Opcjonalnie, drzwi mogą zostać wyposażone w system automatycznego otwierania przy pomocy przycisku nożnego lub czujnika zbliżeniowego.

Myjnie-dezynfektory firmy Discher posiadają możliwość podłączenia do systemu komputerowego. Użytkownik uzyskuje wówczas możliwość nadzoru wszystkich urządzeń oraz kontroli np. stanów awaryjnych (sygnalizacja wizualna). Poza tym, do systemu komputerowego zostają dostarczone informacje o miejscu montażu, numerze i wersji urządzenia, kolejnych przeglądach, jak i bieżące ustawienia programów i konfiguracji. Dość istotną zaletą jest również przesyłanie do komputera informacji o numerze urządzenia i wsadu, czasie trwania cyklu (start i koniec), wybranym programie, temperaturze ekspozycji dezynfekcji, osiągniętej wartości A_0 i ewentualnym błędzie.

Wbudowana pamięć na 100 cykli mycia i dezynfekcji, z możliwością jej rozszerzenia dzięki kartom pamięci SD (opcja), gwarantuje użytkownikowi ciągłą nieprzerwaną rejestrację i dokumentację cykli mycia i dezynfekcji nawet przez 20 lat.

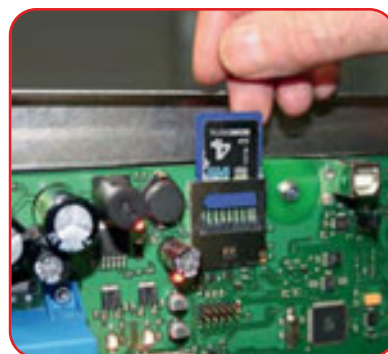

Discher **PICCOLO**



Discher Piccolo 500 D3P



Discher Piccolo 950 D3P

Dane techniczne	Piccolo 500 D3P
Model stojący	●
Model mocowany do ściany	○
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwornica pary wykonane ze stali kwasoodpornej	●
Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne umieszczony na uchylnych drzwiach	●
Pojemność komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki	●
Dezynfekcja termiczna oparta o zadaną wartość A ₀ lub temperaturę i czas	●
System termicznej samodezynfekcji urządzenia	●
6 programów mycia w tym: - programy ekonomiczne - programy intensywne	●
Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomocą panelu sterującego	●
Możliwość modyfikacji programów	●
Komunikaty o błędach	●
Złącze do komunikacji z zewnętrznym komputerem klasy PC i/lub systemem komputerowym	○
Archiwizacja cykli	● / ○
Suszarka	○
Wytwornica pary	●
Wbudowana pompa dozująca środek odkamieniająco-płuczący	●
Dodatkowa pompa dozująca środek chemiczny	○
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia i dezynfekcji	●
Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po zamknięciu drzwi	●
Czujnik przecieków	○
Czujnik przepełnienia komory (zablokowany odpływ)	●
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi	○
Wymiary zewnętrzne w mm (sxgxw)	500x570x1240
Moduł zlewu (950 D3P)	○

Legenda:

- - wyposażenie standardowe
- - opcja

Instalacje zasilające:

Energia elektryczna: 230 V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A
opcjonalnie 400V, 50 Hz

Woda zimna: DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"

Woda ciepła: DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"


Odpływ do ścieku: DN 100 w ścianie (preferowany)
lub podłódze

W przypadku instalacji kanalizacyjnej o mniejszej średnicy urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w rozdrabniacz.

Wykonanie zgodne:

93/42/EEC, EN ISO 13485, EN ISO 15883-1 i 3

Discher **PICCOLO**

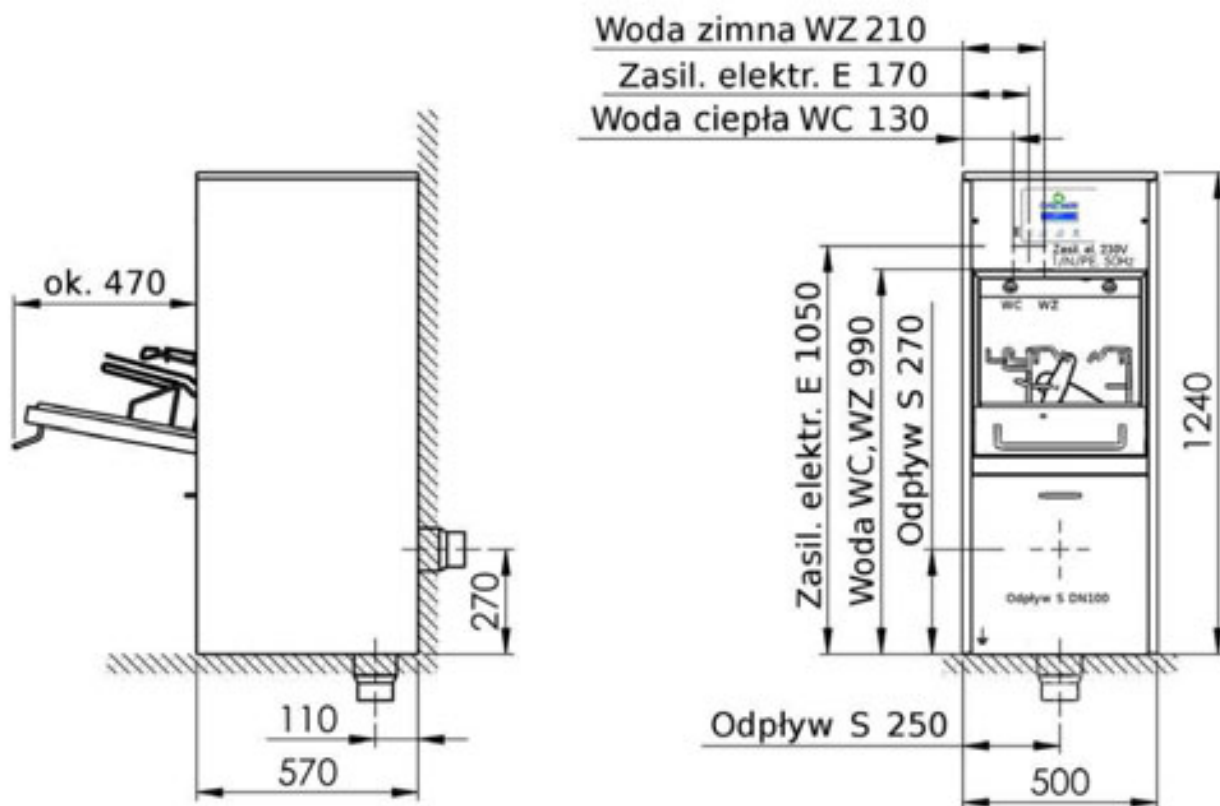

System automatycznego zamykania i otwierania drzwi, w który mogą być wyposażone myjnie-dezynfektory Discher Piccolo, Boy oraz Master, ułatwia załadunek i wyładunek myjni-dezynfektora zwiększając ochronę pracowników przed przypadkowym skażeniem.

Discher MASTER



Discher Master 900 DT



Discher Master 900.1 DT



Discher Master 1350 DT

Dane techniczne	Master 900 DT
Model stojący	●
Model mocowany do ściany	○
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwnica pary wykonane ze stali kwasoodpornej	●
Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne umieszczony na uchylonych drzwiach	●
Pojemność komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki	●
Dezynfekcja termiczna oparta o zadaną wartość A ₀ lub temperaturę i czas	●
System termicznej samodezynfekcji urządzenia	●
27 programów mycia w tym: - programy ekonomiczne - programy intensywne	●
Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomocą panelu sterującego	●
Możliwość modyfikacji programów	●
Komunikaty o błędach	●
Złącze do komunikacji z zewnętrznym komputerem klasy PC i/lub systemem komputerowym	○
Archiwizacja cykli 2GB	●
Suszarka	○
Wytwnica pary	●
Wbudowana pompa dozująca środek odkamieniająco-płuczący	●
Dodatkowa pompa dozująca środek chemiczny	○
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia i dezynfekcji	●
Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po zamknięciu drzwi	●
Czujnik przecieków	●
Czujnik przepelnienia komory (zablokowany odpływ)	●
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi	○
Wymiary zewnętrzne w mm (sxgxw)	900x600x900
Moduł umywalki (900.1 DT)	○
Moduł zlewu ze splukiwaniem (1350 DT)	○
Moduł umywalki i zlewu ze splukiwaniem (1350.1 DT)	○

Legenda:

- - wyposażenie standardowe
- - opcja


Instalacje zasilające:

Energia elektryczna:	230 V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A opcjonalnie 400V, 50 Hz
Woda zimna:	DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"
Woda ciepła:	DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"
Odpływ do ścieku:	DN 100 w ścianie (preferowany) lub podłódze W przypadku instalacji kanalizacyjnej o mniejszej średnicy urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w rozdrabniacz.

Wykonanie zgodne:

93/42/EEC, EN ISO 13485, EN ISO 15883-1 i 3

Discher MASTER

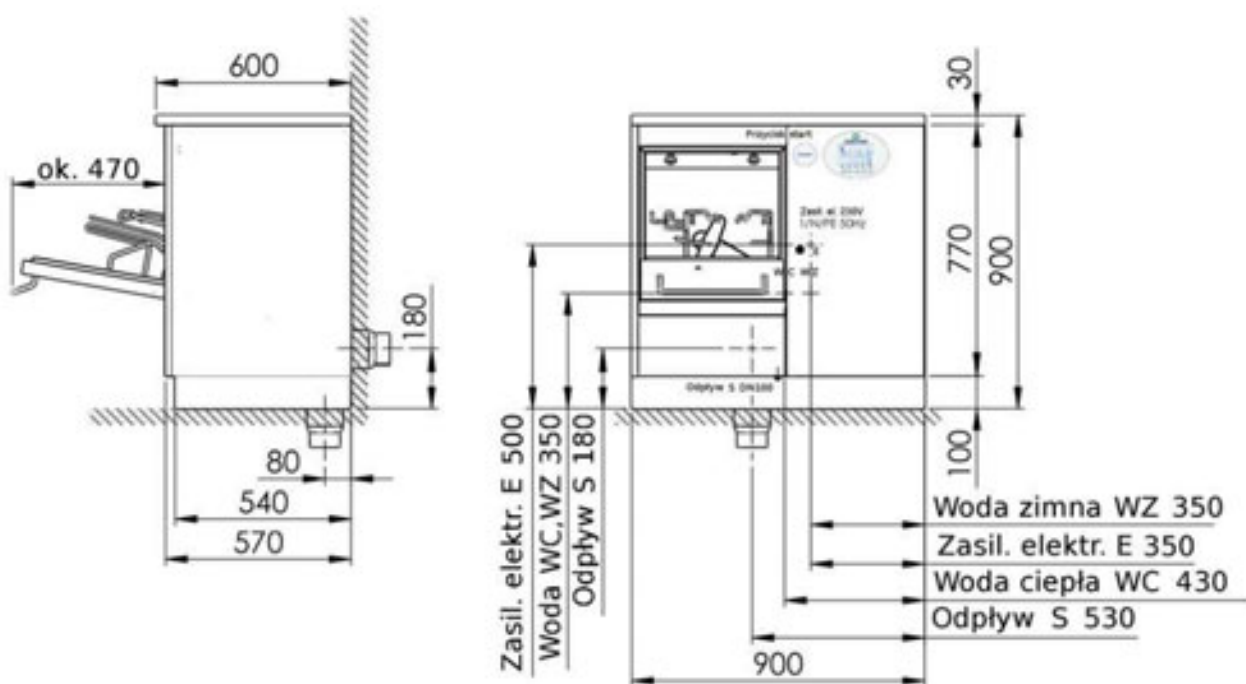

Discher Master 1350.1 DT

Discher BOY



Discher Boy 500 S DT



Discher Boy 950 S DT

Dane techniczne	Boy 500 S DT
Model stojący	●
Model mocowany do ściany	○
Komora mycia oraz zbiornik wody i wytwornica pary wykonane ze stali kwasoodpornej	●
Uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne umieszczony na uchylonych drzwiach	●
Pojemność komory: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki	●
Dezynfekcja termiczna oparta o zadaną wartość A ₀ lub temperaturę i czas	●
System termicznej samodezynfekcji urządzenia	●
27 programów mycia w tym: - programy ekonomiczne - programy intensywne	●
Programy mycia i dezynfekcji wybierane za pomocą panelu sterującego	●
Możliwość modyfikacji programów	●
Komunikaty o błędach	●
Złącze do komunikacji z zewnętrznym komputerem klasy PC i/lub systemem komputerowym	○
Archiwizacja cykli 2GB	●
Suszarka	○
Wytwornica pary	●
Wbudowana pompa dozująca środek odkamieniająco-płuczący	●
Dodatkowa pompa dozująca środek chemiczny	○
Blokada drzwi w trakcie trwania cyklu mycia i dezynfekcji	●
Automatyczne opróżnianie zawartości pojemników sanitarnych po zamknięciu drzwi	●
Czujnik przecieków	●
Czujnik przepelnienia komory (zablokowany odpływ)	●
Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi	○
Wymiary zewnętrzne w mm (sxgxw)	500x500x1700
Moduł zlewu ze splukiwaniem (950 S DT)	○
Model stojący z wbudowanym WC (Plus DT)	○
Model wbudowany w ścianę (Intro S DT)	○

Legenda:

- - wyposażenie standardowe
- - opcja


Instalacje zasilające:

Energia elektryczna:	230 V, 50 Hz, 3 kW, zabezpieczenie 16A opcjonalnie 400V, 50 Hz
Woda zimna:	DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"
Woda ciepła:	DN15, ciśnienie 1 - 10 bar, przyłącze 1/2"
Odpływ do ścieku:	DN 100 w ścianie (preferowany) lub podłódze W przypadku instalacji kanalizacyjnej o mniejszej średnicy urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w rozdrabniacz.

Wykonanie zgodne:

93/42/EEC, EN ISO 13485, EN ISO 15883-1 i 3

Discher BOY

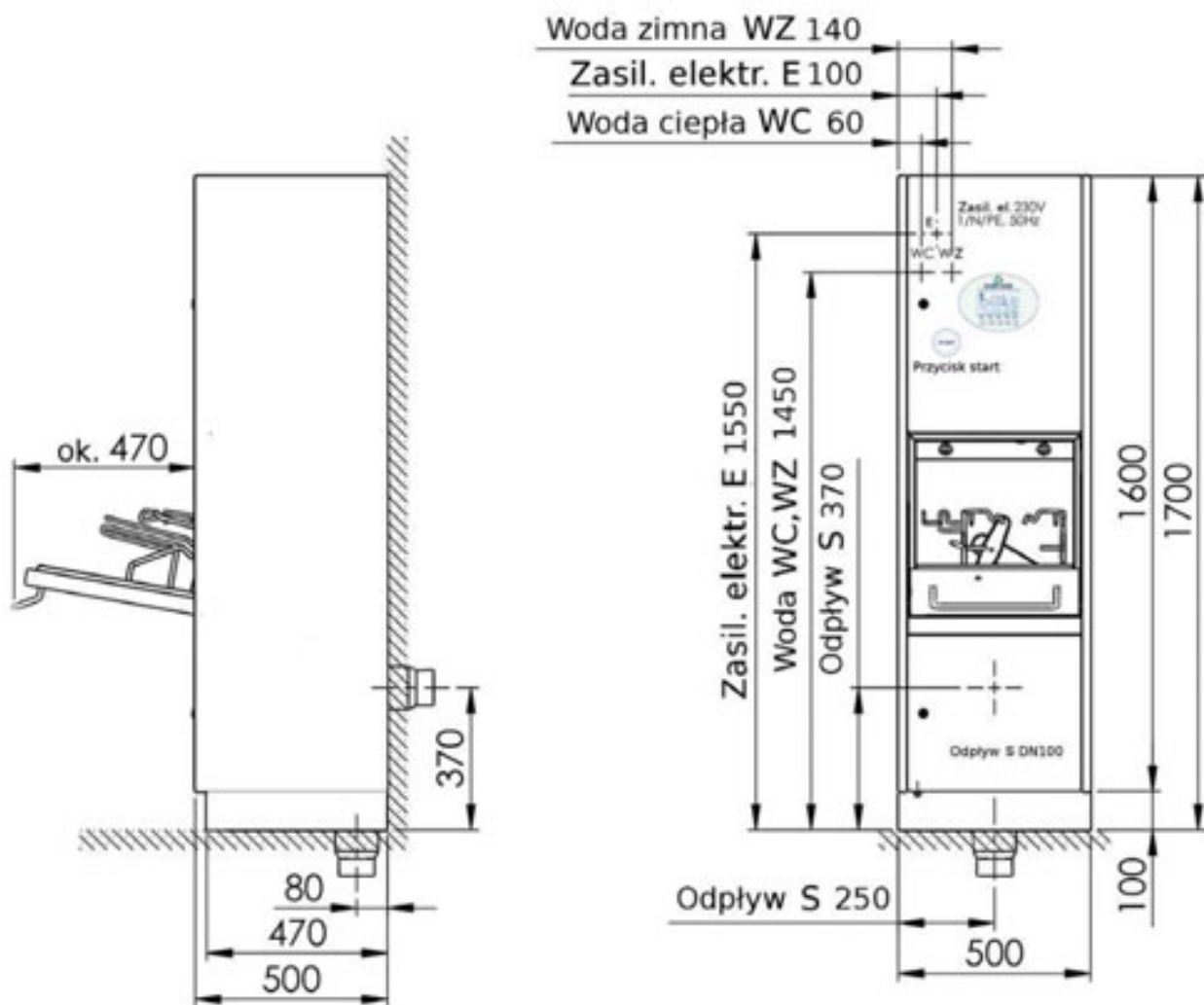

Myjnie-dezynfektory Discher Boy oraz Master mogą być wyposażone w moduł zlewu z funkcją spłukiwania wodą z wbudowanym w myjnię zbiornika (woda dezynfekowana).

Discher **BOY**



Discher Boy Plus DT



Discher Boy Intro S DT

Akcesoria

Oprócz myjni-dezynfektorów, firma Discher oferuje wyposażenie dodatkowe do przechowywania basenów i kacek, jak również meble ze stali kwasoodpornej do brudowników.



Serwis

Firma AMED posiada autoryzowany serwis myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek firmy Discher i ma zagwarantowany dostęp do fabrycznej dokumentacji serwisowej oraz oryginalnych części zamiennych, rekomendowanych przez producenta.

Sprawność użytkowania naszych urządzeń i wyrobów zapewnia obsługa techniczna i serwisowa, obejmująca wszelkie działania: od montażu po przeglądy i konserwację urządzeń w czasie eksploatacji.



Działamy w oparciu o doświadczony zespół pracowników serwisu. Pozwala to nam na naprawy każdego urządzenia, nie tylko zakupionego w naszej firmie. Nasi pracownicy serwisu regularnie uczestniczą w szkoleniach praktycznych dotyczących instalacji, napraw oraz przeglądów. Potencjał naszego serwisu tworzą wykwalifikowani pracownicy serwisu oraz ich dobre wyposażenie.

W ramach obsługi technicznej i serwisowej oferujemy:

- przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne,
- przeglądy techniczne i konserwacje,
- naprawy urządzeń,
- części zamienne,
- doradztwo techniczne,
- szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń.

Firma AMED wykonuje również modernizacje „starych” myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek. Zestaw firmy Discher do modernizacji „starych” myjni-dezynfektorów zawiera wszelkie niezbędne elementy - włączając w to nowoczesny sterownik, aby „tchnąć w urządzenia nowe życie”. W rezultacie otrzymuje się ujednolicenie wszystkich posiadanych urządzeń. Koszty modernizacji ok. 3 urządzeń odpowiadają kosztom zakupu jednej myjni-dezynfektora do basenów i kaczek. Urządzenia po modernizacji spełniają wszystkie wymagania sanitarne i higieniczne.

Projekty

Firma AMED wykonuje kompleksowe projekty technologiczne i techniczne, adaptacje i modernizacje centralnych i lokalnych sterylizatori, punktów sterylizacji, stacji przygotowania łóżek, brudowników oraz projekty zabudowy i montażu oferowanych urządzeń, od doradztwa, koncepcji i projektów wstępnych, poprzez projekty technologiczne, techniczne i wykonawcze.


Każdy projekt przed wykonaniem jest konsultowany z inwestorem i użytkownikiem w celu uzyskania jak największej ilości informacji, które pomogą stworzyć optymalne rozwiązania.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, dlatego nasze projekty są funkcjonalne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz możliwości finansowych inwestora.

Projekty technologiczne i techniczne zawierają m.in. funkcjonalny układ pomieszczeń z uwzględnieniem obowiązujących wymagań i przepisów, dobór oraz lokalizację odpowiedniego wyposażenia technologicznego wraz z charakterystyką techniczną urządzeń, wytyczne dla branż oraz bilans mediów i kosztorys inwestycji.

Przy projektowaniu wykorzystujemy najnowsze techniki komputerowe. Realizujemy projekty „pod klucz” łącznie z wykonawstwem budowlano-instalacyjnym.



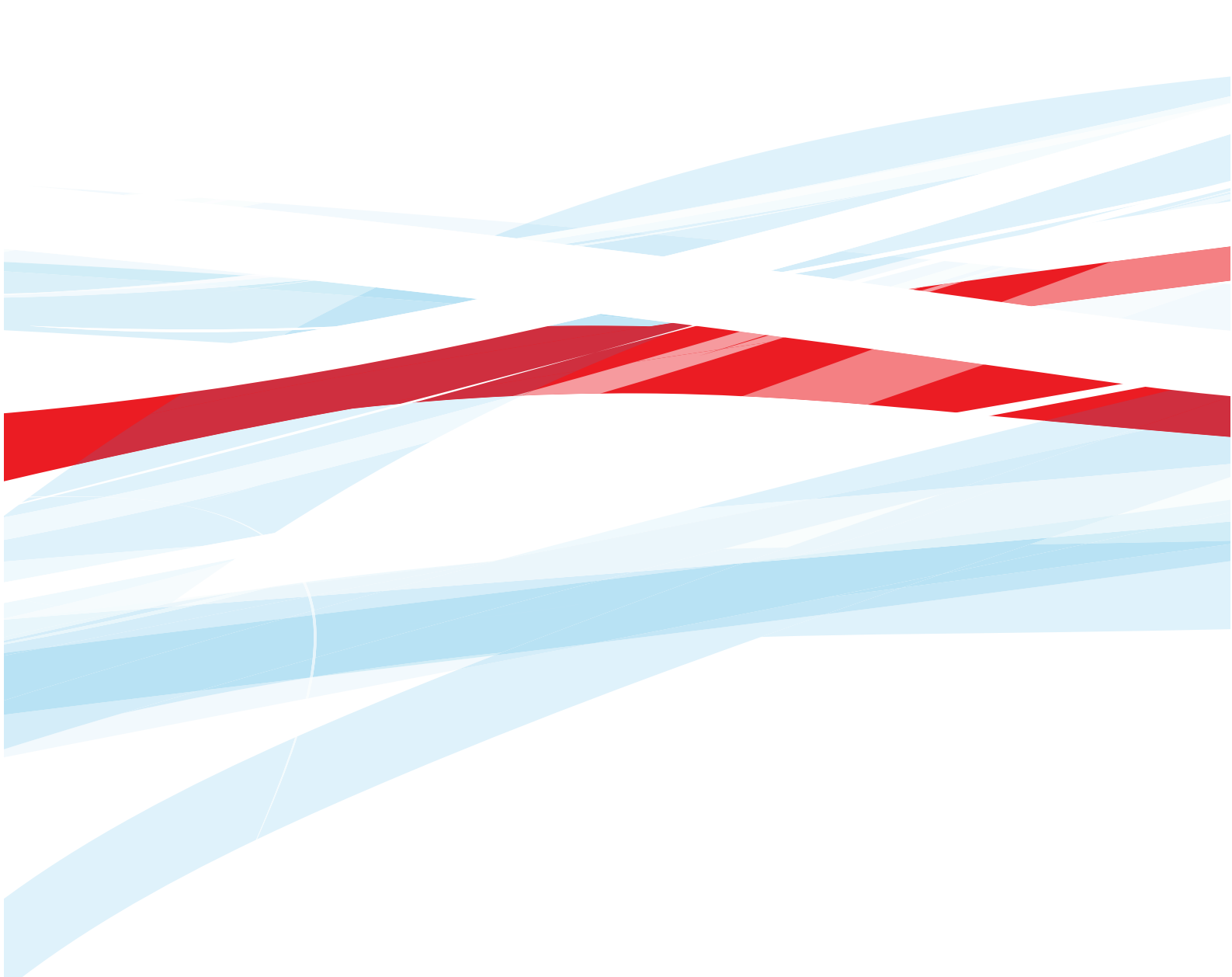

AMED Biuro Techniczno - Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn
tel. (22) 715 71 86 do 89
fax (22) 715 71 90
e-mail: biuro@amed.pl
www.amed.pl

