


Łóżko porodowe New Life

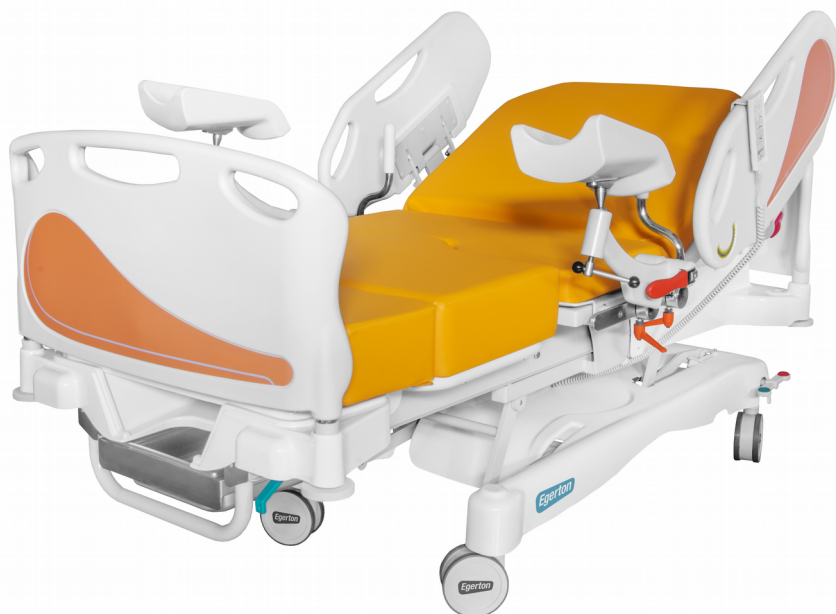

Dla kogo łóżko porodowe?

Przeznaczone dla pacjentek które oczekują wygody i komfortu podczas porodu.

Dlaczego łóżko porodowe?

Model w pełni regulowany elektrycznie z możliwością dostosowania każdej pozycji, gwarantuje duże ułatwienie pracy dla personelu jak i pacjentek.

Opis

- Konstrukcja wykonana ze stalowych profili i wyposażona w gumowe krążki odbojowe na każdym zewnętrznym rogu.
- Konstrukcja pokryta lakierem antybakteryjnym z dodatkiem żywicy epoksydowej.
- Pozycja Trendelenburga oraz Antytrendelenburga regulowana jest za pomocą siłownika elektrycznego, sterowanego za pomocą przewodowego pilota.
- Łóżko składa się z trzech sekcji. Sekcji pleców, siedziska oraz nóg.
- Sekcja pleców oraz siedzisko są regulowane elektrycznie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na pilocie.
- Sekcja pleców posiada szeroki zakres regulacji pochylecia, dzięki czemu można ustalić każdą pozycję podparcia dla rodzącej kobiety. Jest również wyposażone w funkcję ustawiającą łóżko do pozycji umożliwiającej przeprowadzenie RKO.
- Siedzisko posiada dwie ujednolicone szyny na akcesoria, do których montuje się podpórki ud, uchwyty.
- Dodatkowo przy siedzisku znajduje się para listew z uchwytami na akcesoria, z czego każda posiada cztery haki na worki drenażowe i worki na mocz.
- Łatwo demontowana sekcja nóg pozwala w prosty i szybki sposób przekształcić łóżko w fotel porodowy, co znacznie ułatwia pracę personelowi.
- Osłona podstawy wykonana z tworzywa ABS ułatwia utrzymanie czystości oraz estetyczny wygląd.

Wyposażenie

- Pilot
- Para tulei na stojaki kroplówki.
- Para ujednoliconych szyn na akcesoria.
- Para poręczy z czterema hakami na worki drenażowe i worki na mocz.
- Para miękkich, poliuretanowych podpórek ud (niebieskie lub szare).
- Wyciągana tacka wykonana ze stali nierdzewnej.
- Półka wykonana z tworzywa ABS na narzędzia.
- Akumulator.
- Rama pokryta antybakteryjną powłoką.
- Materac dwu-sekcyjny z pamięcią kształtu.

Długość	229 cm
Szerokość	114 cm
Wysokość regulowana elektrycznie	66-105 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	330 kg
Maksymalna waga pacjenta	250 kg

■ Cena: **36 000 zł**