



Informacje dotyczące realizacji zamówień na wózek transportowy CLEANASCOPE®

Numer części	Opis produktu	Wymiary
103470	Wózek na 5 tac (tace w komplecie)	34,7 W. x 25,2 Sz. x 22,1 Gł. (cale)
103466	Wózek na 6 tac (tace w komplecie)	40,5 W. x 25,2 Sz. x 22,1 Gł. (cale)
103467	Wózek na 10 tac (tace w komplecie)	63,5 W. x 25,2 Sz. x 22,1 Gł. (cale)



Informacje dotyczące realizacji zamówień na wkłady i akcesoria CLEANASCOPE®

Numer części	Opis produktu	Elementów w opakowaniu
103585	Zestaw wkładów sterylnych	200 wkładów/opakowanie
103604	Podajnik (montowany na ścianie)	1
103456	Taca	1
103457	Pokrywa tacy, przezroczysta	1
CAS-1000	Kaseta	1

ADVANTAGE PLUS® i INTERCEPT® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Medivators Inc. CLEANASCOPE® jest znakiem towarowym Cantel (UK) Limited.

“Zabrudzony endoskop należy przetransportować do obszaru reprocessowania w zamkniętym pojemniku, który zapobiega narażeniu personelu, pacjentów i środowiska na potencjalne drobnoustroje.”

Komitet ds. Zapewnienia Jakości w Endoskopii ASGE (ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee), 2011 oraz Normy Kontroli Zakażeń przy Reprocessowaniu Giętkich Endoskopów Żołądkowo-Jelitowych SGNA (SGNA Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes) 2012

“Sterylny system wkładów jednorazowych jest jednym z najważniejszych powodów, dla których wiele placówek wdraża system CLEANASCOPE® - wkłady oznaczone kolorystycznie eliminują domysły w procesie reprocessowania endoskopów”

Libby Thomson, była pielęgniarka główna Bowel Cancer Screening Centre i pielęgniarka endoskopowa

CLEANASCOPE® Advantage

System transportu i krótkoterminowego magazynowania | Suszenie i Magazynowanie



MEDIVATORS
A Cantel Medical Company

Dystrybutor w Polsce:

INFORMER
M E D

CANTEL | **MEDIVATORS**
Global Headquarters
150 Clove Road - 9th Floor
Little Falls, NJ 07424-2139
Phone: +1.973.890-7220

Global Headquarters
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447-4822
Phone: +1.763.553.3300 Fax: +1.763.553.3387
www.medivators.com

INFORMER
M E D
Dystrybutor w Polsce:
INFORMER MED Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. +48 61 664 38 00 fax. +48 61 664 38 19
www.informermed.eu




PEŁNY ZAKRES OCHRONY

Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko firma Cantel Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe aktywne partnerstwo, które ma na celu wspomaganie usuwania ryzyka, usprawnianie wydajności operacyjnej i osiągnięcie jak najlepszych wyników.

SUSZENIE I MAGAZYNOWANIE

Drobnoustroje stanowią istotne ryzyko dla endoskopów podczas transportu i magazynowania. Rozwiązania Cantel w zakresie transportowania, suszenia i magazynowania służą ochronie cennego wyposażenia, zmniejszają możliwość powstania zanieczyszczenia krzyżowego, usuwają wilgoć z kanałów endoskopowych i kontrolują wilgotność. Jak wiadomo, wilgotność lub zawilgocenie w kanałach endoskopowych przyczynia się do wzrostu drobnoustrojów.

Jasna identyfikacja endoskopów czystych i zabrudzonych

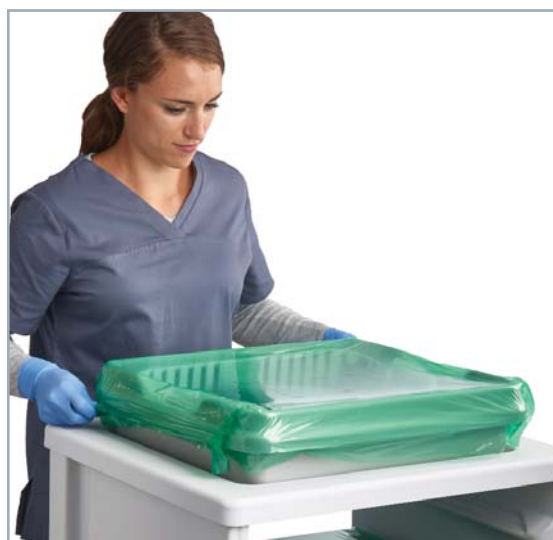

Pewność to wiedza, że wszystko jest czyste w mgnieniu oka

System transportu i krótkotrwałego magazynowania CLEANASCOPE® zapewnia ochronę dla endoskopów i innego wrażliwego wyposażenia dzięki zminimalizowaniu czynności dokonywanych na endoskopach i ograniczenie kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonymi w powietrzu.

Jego opatentowana konstrukcja tworzy środowisko ochronne dla każdego zdezynfekowanego endoskopu. Wkładki w kolorze zielonym (czysty) i czerwonym (zabrudzony) umożliwiają niezawodną identyfikację czystego i zabrudzonego wyposażenia.

CLEANASCOPE® Advantage

System transportu i krótkotrwałego magazynowania | **Suszenie i Magazynowanie**

Tace są doskonale dopasowane do wyprofilowanej górnej części wózka

System zapewnia możliwość bezpiecznego krótkotrwałego przechowywania czystych endoskopów i wyposażenia.

Dostępne są twarde pokrywki zapewniające dodatkową ochronę podczas transportu poza oddział.

Dostępny w wersji z 5, 6 i 10 tacami.



Solidna taca wielokrotnego użytku może łatwo pomieścić endoskopy o dużych rozmiarach i kasetę ADVANTAGE PLUS® AER



Trzyczęściowy, jednorazowy, sterylnie opakowany system wkładek zmniejsza możliwość zanieczyszczenia krzyżowego.

Duże koła jezdne umożliwiają łatwy i swobodny transport.

Zoptymalizowany przepływ endoskopów maksymalnie zwiększa możliwość zapobiegania zakażeniom.

Tacę należy uzupełnić o sterylną nakładkę i włożyć czysty endoskop oraz zwiniętą czerwoną nakładkę.

Przykryć tacę zieloną sterylną nakładką oznaczoną napisem "CZYSTY", co oznacza endoskop gotowy do użycia u pacjenta.

Po tej procedurze, przepłukać i przetrzeć endoskop przy użyciu detergentu INTERCEPT i umieścić zabrudzony endoskop na tacy. Zakryć tacę przy użyciu czerwonej nakładki w celu jasnej identyfikacji endoskopu "ZANIECZYSZCZONEGO".



SUSZENIE I PRZECHOWYWANIE



ENDOSKOP REPROCESOWANY



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ENDOSKOPU GOTOWY DO UŻYCIA U PACJENTA




POMIESZCZENIE ZABIEGOWE



ZANIECZYSZCZONY TRANSPORT



MYCIE RĘCZNE

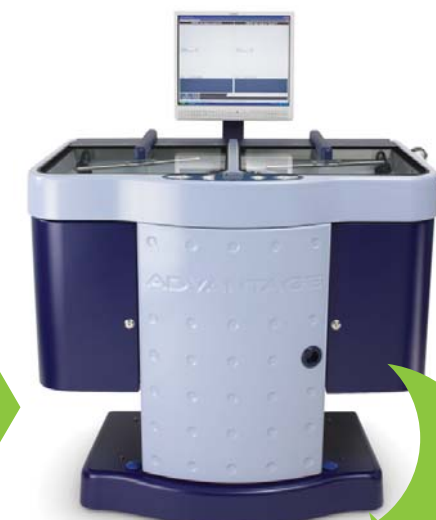

BEZPIECZNE UMIESZCZENIE W MYJNI