

Magneto **STYM**



Urządzenie do funkcjonalnej magnetostymulacji mięśni dna miednicy

NAJSKUTECZNIEJSZA BEZKONTAKTOWA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

- Leczenie zaburzeń układu moczowo - płciowego za pomocą funkcjonalnej stymulacji elektromagnetycznej
- Komfort dla Pacjenta - bezinwazyjna, bezbolesna i niekrępująca metoda
- Komfort dla Terapeuty - prosty zabieg nie wymagający przygotowania pacjenta
- Wszystkie parametry (kształt linii pola magnetycznego i częstotliwość impulsu) widoczne na przejrzystym ekranie LCD
- Szeroki wybór wbudowanych programów oraz możliwość tworzenia własnych
 - Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe aplikatory do innych terapii za pomocą FMS




Urządzenie MagnetoSTYM zostało opracowane przy użyciu nowej technologii FMS (funkcjonalna stymulacja elektromagnetyczna) z przeznaczeniem do leczenia problemów układu moczowo - pęcherzowego.

Impulsowe pole magnetyczne emitowane przez urządzenie powoduje, że mięśnie dna miednicy kurczą się bez konieczności mocowania elektrod. Stymulacja elektromagnetyczna zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni dna miednicy.

Podczas terapii pacjent siedzi zupełnie ubrany na wygodnym fotelu i skupia się na skurczach mięśni, co wspomaga aktywne wykonywanie ćwiczeń w tych partiach. Zabieg jest bezbolesny.

Każda sesja terapeutyczna trwa 20 minut. Poprawa jest odczuwalna już po około sześciu sesjach.

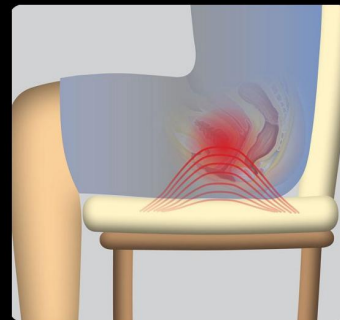

Zastosowanie:

- **nietrzymanie moczu**
- problemy z mięśniami dna miednicy
- problemy pooperacyjne i poporodowe u kobiet
- problemy z prostatą
- zaburzenia erekcji

Możliwość rozbudowy urządzenia o aplikatory do innych zastosowań za pomocą terapii FMS:

zaburzenia mięśniowo - szkieletowe, zaburzenia funkcjonalne kręgosłupa, zaburzenia nerwowe, osłabienia mięśni, dysfunkcje układu nerwowego, terapia bólu ostrego i przewlekłego



Parametry techniczne:

Moc pola magnetycznego:	maks. 2 Tesle
Modulacja amplitudy:	10% - 50%
Modulacja częstotliwości:	1 - 80 Hz od ustawionej częstotliwości
Czas aktywności:	1 - 20 s
Czas pauzy:	1 - 30 s
Maksymalna ilość taktów na program:	8
Maksymalny czas sekwencji:	1 s - 20 min
Czas trwania zabiegu:	1-60 min
Programy ustawione:	9
Programy własne:	72
Bezpiecznik:	2 x T10A
Napięcie wejściowe:	240V AC, 50-60Hz
Moc:	1500VA
Wymiary (szer.x dł.x wys.):	43x60x26cm (MagnetoSTYM Prestige 47x60x27cm)
Waga:	8,2 kg (MagnetoSTYM Prestige 10kg)
Klasyfikacja IEC 60601/1:	Klasa I, Typ BF
Klasyfikacja MDD 93/42/EEC:	Klasa IIa

MagnetoSTYM



MagnetoSTYM Prestige



Fotel terapeutyczny

DYSTRYBUCJA I SERWIS:

ERES MEDICAL Sp. z o.o.

Płuszwice Kol. 64b, 21-008 Tomaszowice
tel.: 81 502 00 70, fax: 81 502 10 32
e-mail: info@eresmedical.com.pl



www.eresmedical.com.pl

