

FLEXAVISION SF package

Remote Controlled R/F System
Cassette (CR) SFD system



UNIWERSALNY ZDALNIE STEROWANY STÓŁ
RENTGENODIAGNOSTYCZNY
FLEXAVISION SF FIRMY SHIMADZU


FLEXAVISION SF

Remote controlled X-Ray Diagnostic Table Uniwersalny, zdalnie sterowany stół rentgenodiagnostyczny przeznaczony do konwekcyjnych badań układu kostno-stawowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, do limografii, mielografii, flebografii, oraz rentgenowskich badań pediatrycznych.



Na system **FLEXAVISION** składa się wiele elementów: rentgenowski stół diagnostyczny, generator wysokiego napięcia, konsola zdalna oraz moduł kasetowy dla radiografii. Wymagane komponenty różnią się w zależności od aplikacji. Ta elastyczność przy konfiguracji sprawia, że system może mieć zastosowanie przy różnorodnych badaniach tj. od konwencjonalnych badań układu kostno-stawowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, do limografii, mielografii, flebografii, po rentgenowskie badania pediatryczne i naczyniowe. W systemach FLEXAVISION zastosowany został kompaktowy, szybki stół, pozwalający na sprawne przeprowadzenie niezbędnych badań.

System FLEXAVISION SF jest wyposażony w automatyczny układ obsługujący Kasety RTG różnych rozmiarów od 8" x 10" [18 cm x 24 cm] do 14" x 17" [35 cm x 43 cm] włącznie. Zastosowana technologia zapobiega naświetleniu załadowanej kasety podczas wykonywania fluoroskopii, umożliwiając jednocześnie wykonywanie zdjęcia rentgenowskiego obszaru badania.

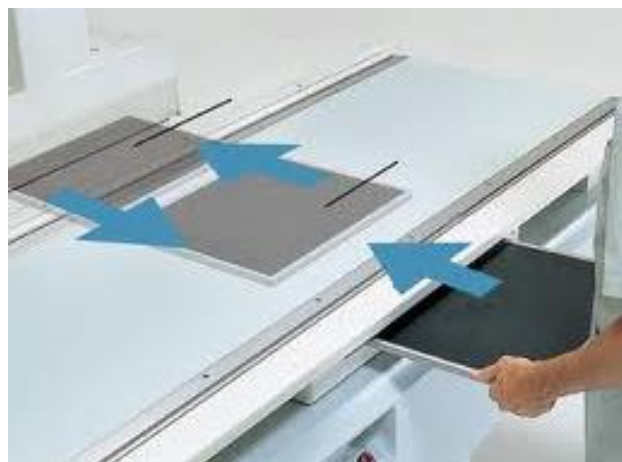

Charakterystyka:

- maski pozwalające na podział kasety RTG
 - wysokiej czułości kamera CCD
 - 12'' wielopolowy wzmacniacz obrazu
 - zdalne sterowanie ruchami systemu ze sterowni
 - regulowana wysokość stołu
 - łatwy dostęp do pacjenta z każdej strony stołu
 - zakres obrotu stołu -30° do +90°
 - teleskopowy uchwyt
- lamy RTG pozwalający na zmiany odległości ognisko-film od 110 cm do 150 cm



Producent: Shimadzu Corporation Japonia