

## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PROSTOKOMOROWE PODWYŻSZONE

### MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PROSTOKOMOROWE PODWYŻSZONE model 500 PROFILAKTYKA I LECZENIE $\leq$ II<sup>0</sup> ODLEŻYŃ (zależnie od wyboru pompy).

wieloletnie użytkowanie, podwyższony prostokomorowy, **36 miesięcy gwarancji**

Materac do opieki długoterminowej o wysokości 13 cm wykonany z poliuretanu. Działanie profilaktyczne i lecznicze dzięki dobrym właściwościom redukcji siły ucisku, chłodzącym i mechanoterapeutycznym (masaż). Konstrukcja materaca pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych. Materac posiada funkcję transportową. Materac należy układać na materacach gąbkowych. Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych, oraz do opieki szpitalnej. Deklaracja zgodności CE.



do leczenia stopnia odleżyn



termoplastyczny poliuretan



wartość utrzymywanego ciśnienia



zawór reanimacyjny

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni



materac prostokomorowy



wymaga podkładu gąbkowego



materac 2- sekccyjny



tryb zmienny



tryb statyczny



szybkozłączka transportowa



pokrowiec mocowany napami

### opcje



materac 3- sekccyjny



AIR - system mikrootworów



zamek pokrowca



materac 3- sekccyjny



wzmocnione przewody



### materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED<sup>®</sup>; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub matercem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zmiana wymiarów materaca, zmiana ilości komór, zmiana ilości sekcji materaca, komory wykonane z PUN, PU lub PCV, zawory reanimacyjne CPR, stabilny zagłówek, AIR- system, LubriMed<sup>®</sup>-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy  $\leq$  15 cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, miękki, uchwyty prześcieradła, modułowe strefy komór (pracujące w niezależnych trybach), komory spodnie, modułowa konstrukcja komór, komory wewnętrzne, komory wzdłużne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, szybkozłączki komór dla realizacji terapii bezdotykowej (proste- manualne lub automatyczne), wzmocnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwoślizg wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp. przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best, Aga, Ada.



tel. 800 10 10 01

**model 500, cechy:**

13 cm wysokości

komory z PUN

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 200x 82 cm

skuteczność medyczna wg masy pacjenta  $\leq 200$ wytrzymałość mechaniczna  $\leq 250$  kg

17 komór poprzecznych

szybkozłączka

zawór CPR

przewody do połączenia z pompą o średnicy 10 mm, w pokrowcu

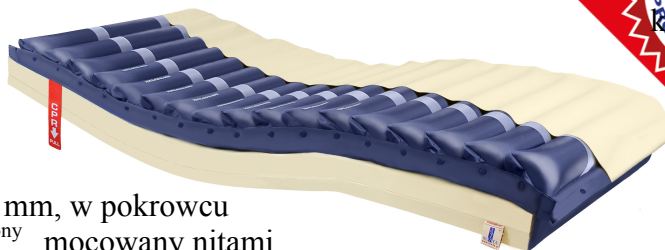
membranowy pokrowiec membraMED<sup>®</sup>/wzmocniony, mocowany nitamiwyporność, objętość  $\leq 190$  litrów,

wyłogi stabilizujące materac

funkcja transportowa

**dla osób z patologiczną nadwagą (bariatrya) dostępna jest wersja trzysekcyjna (model 550)**

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni

**parametry techniczne /opcja wykonania standard**

	500	550
wymiary po napompowaniu (cm, +/- 5%)	200 x 82 x 13	203 x 87 x 13
materiał, z którego wykonany jest materac	medyczne PU lub PUN	
ilość sekcji	2	3
skuteczność medyczna wg. masy pacjenta (kg)	$\leq 200$	$\leq 220$
wytrzymałość mechaniczna (kg)	$\leq 250$	$\leq 280$
wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)	10	10
ilość komór poprzecznych	17	17
szybkozłączka transportowa	tak	tak
pokrowiec	1 szt. membraMED wersja na nity	1 szt. membraMED wersja na nity
objętość (litry)	$\leq 190$	$\leq 190$
wyłogi stabilizujące	tak	tak
zawór CPR	tak	tak
użytkowa minimalna wartość ciśnienia (mmHg)	20	20
dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia (mmHg)	$\leq 130$	$\leq 130$
maksymalny czas użytkowania	nie określono	nie określono
tryb pracy	ciągły (zmienny lub statyczny)	ciągły (zmienny lub statyczny)
masa własna (kg)	4, 8	4, 8
temperatura pracy ( $^{\circ}$ C)	10 - 45	10 - 45
temperatura transportu i magazynowania ( $^{\circ}$ C)	-15 - 70	-15 - 70
dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania ( $^{\circ}$ C)	20 - 80	20 - 80
zgodność z dyrektywą	93/42/EEC	93/42/EEC
gwarancja	36 miesięcy	36 miesięcy
część aplikacyjna	przy połączeniu z pompą REVITA, materac stanowi część BF	przy połączeniu z pompą REVITA, materac stanowi część BF
deklaracja zgodności CE	tak	tak
wyrób medyczny	tak	tak

**zawartość opakowania, dostawy**

1. materac 500/ 550 w opakowaniu tekturowym/foliowym, wg opcji wyposażenia,
2. pokrowiec membraMed<sup>®</sup> / wg. opcji wyposażenia,
3. instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną,
4. paszport techniczny/ wg. wymagań świadczeniodawcy.

