

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PROSTOKOMOROWE DZIECIĘCE

DZIECIĘCE MATERACE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Przeznaczone są dla dzieci okresowo lub trwale unieruchomionych. Posiadają budowę prostokomorową. Wykonane są z PU tworzywa bardzo odpornego na zniszczenie. Nawet po kilku latach intensywnego użytkowania materace nie tracą swoich pierwotnych właściwości. Materiał jest odporny na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych). Dla skutecznej ochrony materace dziecięce zaopatrzone są w specjalistyczne pokrowce membranowe **membraMED®**, które zatrzymują zanieczyszczenia (płyny, bakterie, roztocza, alergeny...) i mogą być poddawane gotowaniu i suszeniu termicznemu. Pokrowce wykonane są w formie **kompaktowej** tzn. okalają materac z każdej strony i zapinane są zamkiem błyskawicznym (obejmują materac zmiennociśnieniowy i spodni materac gąbkowy).

model Mini PROFILAKTYKA I LECZENIE noworodków i niemowlaków

Najmniejszy z produkowanych przez nas materacy, **36 miesięcy gwarancji**.

Dzięki dobrym właściwościom redukcji siły ucisku i mechanoterapeutycznym (masaż) materace działają zarówno profilaktycznie jak i leczniczo. Wysokość materaca zabezpiecza dziecko przed kontaktem z płaską konstrukcją leża łóżka. Zależnie od wymagań użytkownika, materac zasilany jest dowolną pompą dwusekcyjną REVITA / dla potrzeb transportowych (np. wózek dziecięcy) może być zasilany bateryjnie przez pompę Ola /.

Deklaracja zgodności CE.



do profilaktyki
odleżyn



wartość
utrzymywanego
ciśnienia



termoplastyczny
poliuretan



wymaga
podkładu
gąbkowego



materac
2- sekcyjny



tryb
zmienny



tryb
statyczny



szybkozłączka
transportowa



zamek
pokrowca

opcje



AIR - system
mikrootworów



wzmocnione
przewody



do współpracy z pompami; Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best.



tel. 800 10 10 01

model Mini, cechy:

4, 5 cm wysokości, w tym 3 cm podkład gąbkowy

komory z PU lub PUN

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 50 * 36 cm

skuteczność terapeutyczna wg masy pacjenta <10 kg

wytrzymałość mechaniczna <50 kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 6 mm

25 komór poprzecznych

pokrowiec membraMED[®], zapinany zamkiem błyskawicznym

(osłona materaca membraMED[®] zatrzyma wszelkie zanieczyszczenia (w tym bakterie, roztocza i alergeny).

Może być poddawana gotowaniu oraz suszeniu termicznemu)


opcje dodatkowe

air – system^{*opcja} (układ mikrootworów, przez które wydostaje się w kierunku pacjenta

powietrze wspomagające wentylację jego ciała) lub szybkozłączka^{*opcja}

wzmocnione przewody^{/opcja}

przedłużenie gwarancji do 48,60 m-cy/^{opcja}

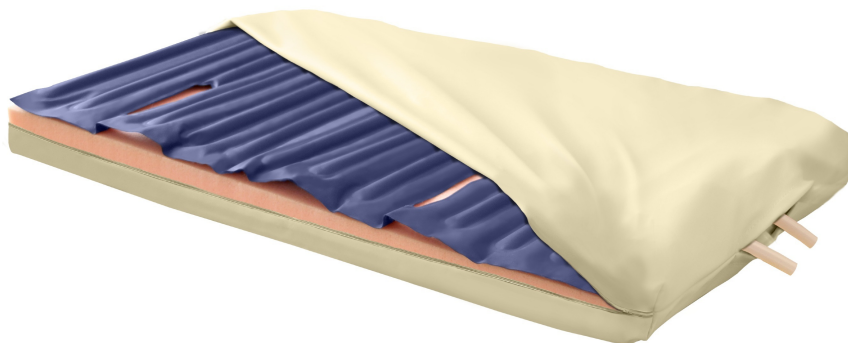

tel. 800 10 10 01

MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PROSTOKOMOROWE DZIECIĘCE

DZIECIĘCE MATERACE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

model Midi PROFILAKTYKA I LECZENIE małych dzieci

Konstrukcja materaca pozwala na łatwą i szybką wymianę komór powietrznych, **36 miesięcy gwarancji**. Dzięki dobrym właściwościom redukcji siły ucisku, chłodzącym i mechanoterapeutycznym (masaż) materace działają zarówno profilaktycznie jak i leczniczo. Wysokość materaca zabezpiecza dziecko przed kontaktem z płaską konstrukcją leża łóżka. Materac, zależnie od wymagań użytkownika, zasilany jest dowolną pompą dwusekcyjną REVITA. Deklaracja zgodności CE.



ISO
13485
9001



opcje



do współpracy z pompami; Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best.



tel. 800 10 10 01



model Midi, cechy

8 cm wysokości, w tym 4 cm podkład gąbkowy

komory z PU lub PUN

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 74 * 48 cm

skuteczność terapeutyczna wg masy pacjenta <18 kg

wytrzymałość mechaniczna <50 kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 6 mm

20 komór poprzecznych

pokrowiec membraMED[®], zapinany zamkiem błyskawicznym(osłona materaca membraMED[®] zatrzyma wszelkie zanieczyszczenia, w tym bakterie, roztocza i alergeny.

Może być poddawana gotowaniu oraz suszeniu termicznemu)

opcje dodatkoweair – system^{*opcja} (układ mikrootworów, przez które wydostaje się w kierunku pacjentapowietrze wspomagające wentylację jego ciała) lub szybkozłączka^{*opcja}wzmocnione przewody^{/opcja}przedłużenie gwarancji do 48,60 m-cy/^{opcja}

tel. 800 10 10 01

