



360 MULTIPOLAR RF - multipolarna fala radiowa

Technologia 360 multipolar RF


- Automatyka rotacja głowicy multipolar RF pozwala zmniejszyć wymaganą intensywność i zminimalizować ewentualne skutki uboczne i zwiększyć efektywność.
- Technologia 360 Multipolar RF to rewolucyjny system wykorzystujący zaawansowane algorytmy podwójnego sterowanie głowicy różnej częstotliwości i zmiennej polaryzacji, w celu osiągnięcia koncentracji energii w różnych warstwach skóry oraz tłuszczu.
- Technologia 360 Multipolar RF skupia energię w miejscu docelowym, jednocześnie wykorzystuje znacznie niższą energię niż inne technologie RF.
- Zabieg jest bezbolesny i przynosi maksymalne efekty.
- Technologia 360 Multipolar RF jest skierowana bezpośrednio na tkankę tłuszczową unikając przegrzania otaczających tkanek.



360 RF tajemnica sukcesu.

- 360RF posiada automatycznie obrotowe elektrody co redukuje wysiłek użytkownika oraz generuje pole magnetyczne, które wpływa na działanie oksydacyjne.
- Technologia 360 Multipolar RF jest innowacyjną systemem maksymalizującym korzyści wynikające z zabiegów RF
- Jest to nowy rewolucyjny system odmładzania skóry bez skalpela, znieczulenie i okresu rekonwalescencji.
- Jest to najszybszy i najbezpieczniejszy system RF na rynku.
- Oferuje niechirurgiczne, bezinwazyjne i bezbolesne zabiegi modelowania ciała i redukcji cellulitu.
- Konturowanie, modelowanie i wyszczuplanie ciała poprzez redukcję cellulitu i poprawę cyrkulacji w trakcie tylko 3 sesji zabiegowych.

Zagęszczanie skóry & Odmładzanie twarzy

Podwójne zastosowanie Tri-polarnych i Hexa-polarnych głowic 360RF jest połączeniem technologii RF Mono-polarniej i Bi-Polarnej w jednym aplikatorze. Pozwala na jednoczesne pogrzanie głębokich i płytkich warstw jednocześnie chroniąc powierzchnię skóry. Zabiegi są łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek. Wygładzają, zagęszczają i regenerują kolagenu w skórze,

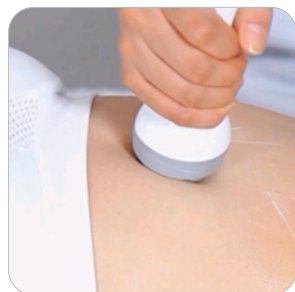

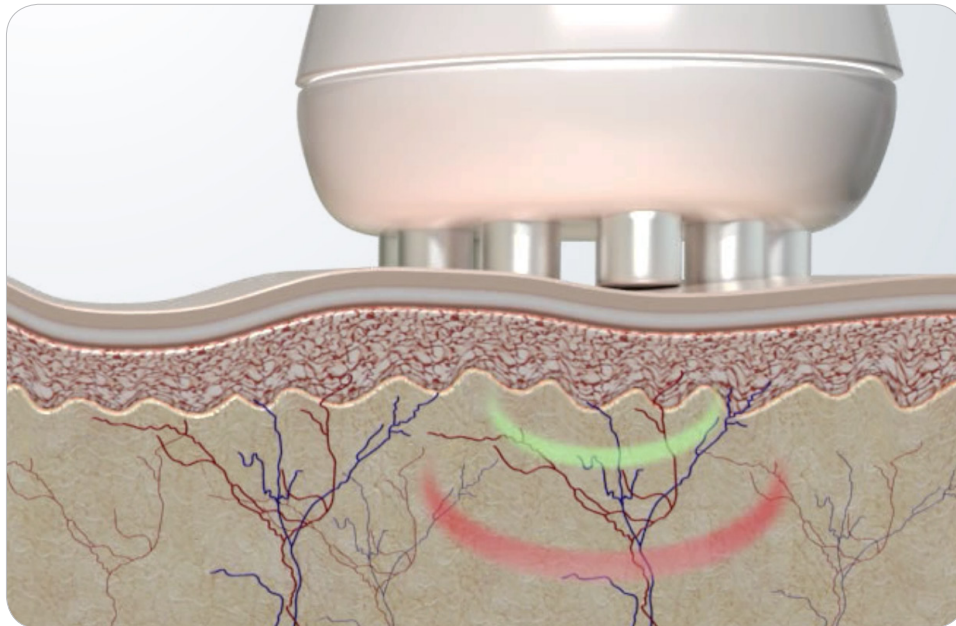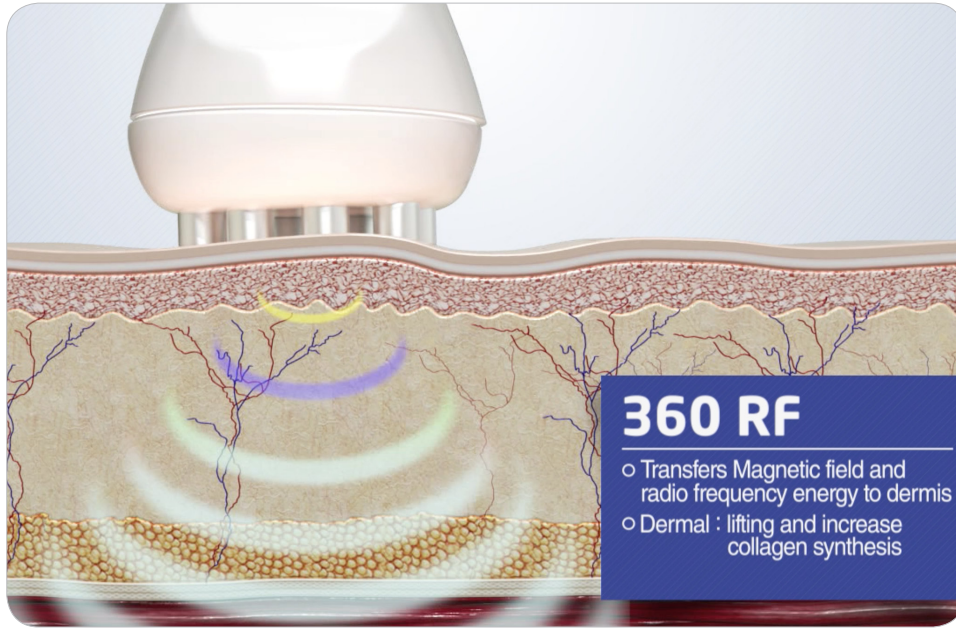

bez żadnych zastrzyków, chirurgii lub rekonwalescencji.

Zapewnia idealną poprawę jędrności skóry, bez względu na jej typ. 360RF można delikatnie i skutecznie zagęścić skórę na twarzy, szyi, dłoniach i ciele.

Zasada działania

Nasza skóra dojrzewa i stale jest poddawana niekorzystnym wpływom środowiska, włókna kolagenowe zaczynają się rozpadać, powodując powstanie zmarszczek i inne objawy starzenia się. 360 Multipolar energii RF przechodzi przez warstwy skóry aby doprowadzić do selektywnego ogrzania tkanki skóry i macierzy zewnątrzkomórkowej, gdzie powstają włókna kolagenowe. Lokalne przegrzanie powoduje natychmiastowe skrócenie włókien kolagenowych, a jednocześnie zwiększa przemianę fibroblastów przyspieszając w ten sposób wytwarzanie nowych włókien kolagenu i elastyny. Skurcz włókien kolagenowych i regeneracja depozytów kolagenu i elastyny zagęszcza warstwy skóry tworząc gładką, zdrową skórę o młodzieńczym wyglądzie.

Konturowanie ciała & Redukcja Cellulitu

360RF zasilany przez wielobiegunową technologię RF (360). Unikalna konfiguracja 360RF selektywnie podgrzewa komórki tłuszczowe pod skórą bez wpływu na otaczające tkanki, w której dochodzi do zwiększonego metabolizmu i wydalanie tłuszczu płynnego. W tym samym czasie, dochodzi do podgrzania głębokiej i powierzchniowej warstwy tłuszczu ten sposób łączy podwójne działanie mono-polarnym RF i dwubiegunowego RF w jednej głowicy. Wielobiegunowy technologia RF traktuje skórę wszystkich fototypów delikatnie i skutecznie.

Ponadto, w przeciwieństwie do starszych technologii RF ta technologia fali radiowej 360 eliminuje potrzebę chłodzenia głowicy, a tym samym zwiększa skuteczność leczenia podając wyniki zmniejszenia liczby zabiegów leczniczych.

ZALETY

Zalety i korzyści stosowania 360 multipolar RF

- Automatyczna rotacja elektrod
- Łatwa praca terapeuty z głowicą
- Zoptymalizowany system do napinania skóry i redukcji cellulitu



NOVA MED: 360° MULTIPOLAR RF



- Jednocześnie w trakcie redukcji cellulitu poprawia napięcie skóry, dając natychmiastowy efekt
- Widoczne rezultaty już po 3 zabiegu
- Zwiększone bezpieczeństwo i efektywność zabiegów
- Długotrwałe efekty
- Wszechstronny i mobilny
- Łatwa obsługa dzięki dotykowemu ekranowi LCD, z wbudowanymi programami zabiegowymi

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne:

- Zasilanie: AC100/230V, 50/60Hz
- Max. Pobór energii: 60 W
- Klasa: I, BF Type
- Wymiary: 52*51*110 cm
- Waga: 25 Kg
- Częstotliwość: 1 MHz
- Zasilanie: 60W
- Moduł pracy: Automatic Multipolar
- Kontrola intensywności: Swing & Pulse Width Modulation
- Wyświetlacz: Ekran dotykowy
- Rozmiar ekranu: 6.7*11(W*D) cm
- Czas zabiegu: 60 min.
- Zabezpieczenie: Zero Start & Patient Stop Switch