



LIFTRON - frakcyjny RF

LIFTRON frakcyjny RF w służbie piękna, bazujący na najnowszej technologii Minimal Fractional RF, doprowadza do częściowej denaturalizacji białka oraz do selektywnej koagulacji bez powodowania termicznych uszkodzeń skóry.

Urządzenie dostarcza w głąb skóry falę radiową, o częstotliwości nawet do 1MHz. Podczas zabiegu jedynie od 10 do 20% powierzchni zabiegowej jest poddawane mikro nakłuciom z użyciem technologii RF, co wywołuje naturalne procesy namnażania nowych komórek skóry, stymulacji elastyny i fibroblastów, a tym samym bezpośredniego oddziaływania na kolagen - odpowiedzialnego za jędrność skóry. Badania kliniczne przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia Liftron wskazują na bardzo dobre efekty przy krótkim okresie rekonwalescencji po zabiegu, przy jednoczesnym braku efektów ubocznych podczas ich wykonywania.


MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE

Możliwości zabiegowe:

- Ujędrnianie skóry
- Redukcja zmarszczek
- Zmniejszanie blizn (w tym blizny potrądzikowe)
- Trądzik
- Odmładzanie skóry (rozjaśnianie, nadawanie blasku)

Charakterystyka:

- mikro-igiełki pionowo zagłębiają się w głąb skóry tworząc na skórze regularne kolumny termicznych uszkodzeń wewnątrz skóry
- 25 igiełek jest izolowanych, pozwala to uniknąć naskórkowego poparzenia
- głębokość zagłębienia igiełek jest regulowana w zakresie 0,2 - 2,6 mm bez konieczności zmiany głowicy podczas zabiegu
- wymienne głowice z mikro-igiełkami
- szeroki wybór końcówek do zabiegów: różna wielkość pola zabiegowego, głębokości i ilości igieł
- możliwość ustawień mocy RF na 5 poziomach

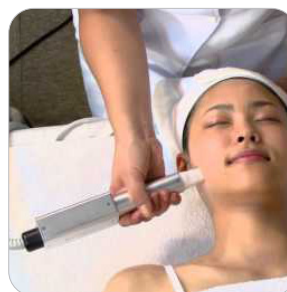



ZALETY

Zalety:

- dzięki regulowanej głębokości wnikania mikro-igiełek oraz możliwości regulowania mocy RF niwelujemy do minimum możliwość wystąpienia krwawienia, a co za tym idzie w późniejszym okresie strupów.
- brak konieczności hospitalizacji czy antybiotykoterapii zarówno przed jak i po zabiegu.
- możliwość nałożenia makijażu bezpośrednio po zabiegu
- szybki i przyjemny zabieg
- krótki czas zabiegu
- krótki czas rekonwalescencji
- skuteczna terapia także w przypadku starszych pacjentów
- możliwość wykonywania zabiegów na różnych partiach ciała (np. brzuch czy wewnętrzna część ud)
- niski poziom ryzyka wystąpienia przebarwień w porównaniu do zabiegów peelingu laserowego
- higieniczny i bezpieczny zabieg – sterylne, jednorazowe nakładki do zabiegów

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 110/220 V 60 Hz
- Wymiary: 48 cm x 48 cm x 100 cm (wys.)
- Waga: 20 kg
- Wielkość pola zabiegowego: 10 mm x 10 mm
- Ilość mikro-igieł: 25 sztuk
- Napięcie wyjściowe RF: 200 V
- Częstotliwość pracy: 1 MHz
- Czas trwania pulsu: 100 - 800 ms
- Tryb pracy: AUTO/Ręcznie
- Ilość programów: 6

Konfiguracja nowego systemu

- Aparat Liftron 1 szt
- Ręczna głowica do zabiegów 1 szt
- Jednorazowe końcówki 10 sztuk
- Pedał do zabiegów 1 szt

