

## SUSZARKI PRÓŻNIOWE




**Przeznaczenie:** suszenie pod próżnią i obróbka termiczna produktów / materiałów łatwo rozkładających się, substancji termoczułych oraz produktów dłużej schnących np. substancji sypkich lub mających porowatą powierzchnię, podatnych na utlenianie. 6-krotnie skracają czas suszenia w porównaniu do tradycyjnych suszarek.

Suszarki o pojemnościach 53 i 128 l oferowane są w dwóch wersjach, natomiast suszarka 28 l występuje tylko w wersji z grzaniem płaszczowym:

Wersja: **M** - oznacza ogrzewanie płaszczowe, półki wyjmowane, zakres temperatur:  $T_{ot} +15^{\circ}\text{C}$  do  $200^{\circ}\text{C}$

Wersja: **P** - ogrzewanie półek- (półki zamontowane trwale) zakres temperatur:  $T_{ot} +10^{\circ}\text{C}$  do  $300/400^{\circ}\text{C}$ , a więc:

- szybszy czas dochodzenia do temperatury zadanej (tj. nagrzewania),
- niezależne grzanie i regulacja temperatury każdej z półek,
- bezpośredni przepływ ciepła przyspiesza przebieg procesu grzania.

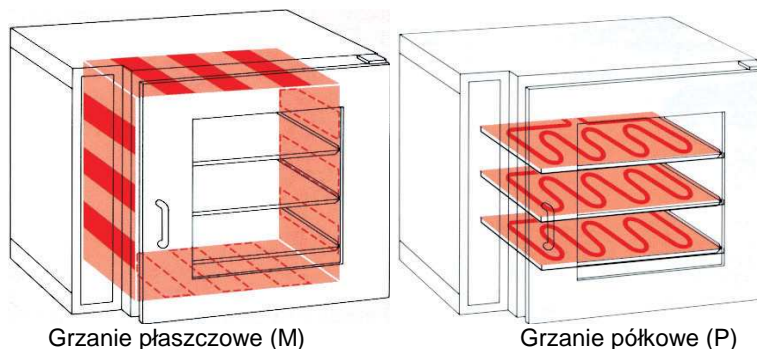

Grzanie płaszczowe (M)

Grzanie półkowe (P)

Możliwe jest zakupienie pełnych zestawów suszarek z pompami próżniowymi dwu lub trzystopniowymi bezolejowymi membranowymi lub jednostopniową obrotową.

.....	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni w 200/300/400°C	Wahania temperatury w czasie w 200°C
VT 6025	25 l	300 x 257 x 307	480 x 600 x 450	270 x 250	2 / 4	58 kg	+/- 4 / - / -	≤ 0.5°C
VT 6060 M	53 l	415 x 345 x 371	744 x 576 x 570	400 x 312	2 / 4	82 kg	+/- 4 / - / -	≤ 0.5°C
VT 6130 M	128 l	495 x 489 x 529	895 x 720 x 750	480 x 470	3 / 5	153 kg	+/- 6 / - / -	≤ 0.5°C
VT 6060 P	53 l	415 x 345 x 371	744 x 576 x 570	400 x 297	2 / 2	90 kg	+/- 3 / 7 / 9	≤ 0.5°C
VT 6130 P	128 l	495 x 489 x 529	895 x 720 x 750	465 x 417	3 / 3	164 kg	+/- 4 / 7 / 9	≤ 0.5°C

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis