



Portatile da corsia  
*Mobile X-ray unit*


Stabilimento / Factory  
Via E. Amaldi, 14  
00015 Monterotondo (Roma)  
Tel. +39 06 90670300  
Fax +39 06 90670606  
info@catmedical.com  
www.catmedical.com

Filiale di Avellino  
South Italy Branch Office  
Strada Nazionale loc. Arcella  
83030 - Montefredane - Avellino  
Tel. +39 0825 607521-2  
Fax +39 0825 607520



Medical Division of Assing Group

# Speedy

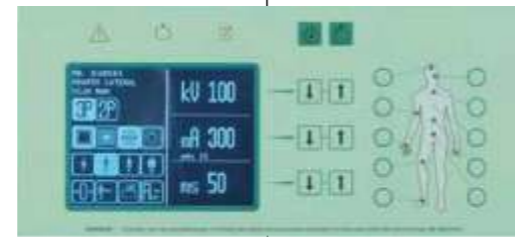

Opzionale: pannello Touch Screen con tecniche di lavoro a 2 punti (kV-mAs) o 3 punti (kV-mA-sec), 600 tecniche anatomiche programmabili, elenco pazienti con data, ora, nome, parametri radiografici e dose (con opzione dosimetro) per una stampa completa del report da allegare alla cartella clinica.

Optional: Touch Screen control panel with 2 (kV-mAs) and 3 (kV-mA-sec) points technique, 600 anatomical programs, patient list with date, time, name, x-ray settings and dose (dap meter option) for a complete report print to attach to the case history

► L'ampia rotazione laterale e frontale del monoblocco permette l'esecuzione di qualsiasi esame d'urgenza. E' un sistema che si caratterizza per la meccanica estremamente semplice e leggera. Ciò lo rende particolarmente facile da manovrare e posizionare. Nella sua versione standard, Speedy è fornito con pannello di comando a display LCD per l'impostazione dei parametri radiografici e segnalazione degli allarmi, tecnica di lavoro a 2 punti (kV e mAs) e 40 tecniche anatomiche programmabili.

► The X-ray beam can be directed towards any direction thanks to the wide front and lateral rotation of the group generator/tube. Speedy is characterized by very simple mechanics, lightness and excellent handling to be used easily. The basic version is supplied with LCD display control panel for the setting of x-ray parameters and alarm signals, 2 points working technique (kV and mAs) and 40 anatomical programs.

Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso  
Products' specifications are subject to change without prior notice

# Speedy Plus



Unità Mobile con braccio rotante

Mobile Unit with rotating arm

► Speedy Plus si distingue per il design accattivante ed innovativo oltre che per la tecnologia avanzata che permette all'operatore di eseguire esami di pronto soccorso in maniera ancora più agevole. Grazie ad un sofisticato sistema anti-ribaltamento, il braccio a supporto del generatore Rx può essere ruotato di 180° ( $\pm 90^\circ$ ) senza intaccare minimamente la stabilità del sistema e la sicurezza del paziente e dell'operatore.

► Speedy Plus is characterized by an innovative and catching design and also by an advanced technology that allows the operator to make first aid exams even more comfortably. The arm holding the generator-tube group can be rotated at 180° ( $\pm 90^\circ$ ) without compromising the stability of the system and the patient security by the means of a sophisticated anti-tilting device.

Accessori disponibili:  
- Pannello di controllo tipo Touch Screen  
- Dispositivo di misurazione della dose (DAP)  
- Interfaccia potter bucky  
- Versione 115V (standard 230V)  
- Generatore da 4kW o 32 kW (con pannello Touch Screen)

Accessories available:  
- Touch Screen control panel  
- Dose Are Meter  
- Potter bucky interface  
- 115 V version (standard 230V)  
- 4kW or 32 kW extra power (with Touch Screen control panel)

Disponibile con potenza da 3kW, 6 kW e 30 Kw, Speedy è l'unità radiologica portatile che soddisfa ogni esigenza specifica di qualsiasi esame da eseguirsi su pazienti a letto, in pronto soccorso, ortopedia, pediatria e in sala operatoria.

Speedy is a mobile x-ray unit that satisfies any specific need of each exam to be executed on patients in bed, in first aid, in orthopaedics room or in infant rooms. it is available with 3kW, 6 kW or 30 kW monoblock power.

