



SANO Transportgeraete GmbH  
Am Holzpoldgut 22  
4040 Lichtenberg / Linz  
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10  
Fax +43 7239 / 510 10-14  
office@sano.at

[www.sano.at](http://www.sano.at)

Euromobil Sp. z o.o.  
Paprotnia 29  
95-060 Brzeziny  
Polska

Tel. +48 42 / 652 05 57, Fax +48 46 / 874 50 20  
Kom. +48 601 170 215, Kom. +48 607 447 777  
biuro@emobil.com.pl

[www.emobil.com.pl](http://www.emobil.com.pl)

Z zastrzeżeniem zmian bez wcześniejszego powiadomienia / Międzynarodowy patent / LIFTKAR PT 2014-05



SANO stawia ludzi na  
pierwszym miejscu!



**LIFTKAR<sup>®</sup> PT**  
Elektryczny schodółaz

**SANO** makes life easier.

**LIFTKAR<sup>®</sup> PT**  
Elektryczny schodółaz

**SANO** makes life easier.



## LIFTKAR PT

BEZPIECZEŃSTWO NA SCHODACH. ŁATWOŚĆ OBSŁUGI.

JAKOŚĆ ŻYCIA TO KORZYSTANIE Z NIEGO W PEŁNI.

Istnieje wiele powodów, przez które osoba, na stałe lub tymczasowo, nie może samodzielnie poruszać się na schodach. Dla osób potrzebujących pomocy, Sano oferuje elektryczne schodolazy, które są łatwe w użyciu, bezpieczne i mogą być obsługiwane bez nadmiernego wysiłku.

### Niezawodność wewnątrz i na zewnątrz

Piwnica, parter, pierwsze piętro, ogród - z LIFTKAR PT można odzyskać cały dom z powrotem. I więcej: wyjście do gabinetu lekarskiego lub na pocztę, podróż samochodem w odwiedziny przyjaciół i krewnych, podróże samolotem lub pociągiem, wyprawy do teatru i na wystawy - wszystko staje się ponownie dużo łatwiejsze.

Wydajny akumulator, przenośna ładowarka (dostępna jako wyposażenie dodatkowe) i szybko-wymienna bateria zapewniają gotowość LIFTKAR PT do działania w każdej chwili.

Specjalne rozwiązania dla specjalnych wymagań:

LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:

Schodolazy elektryczne z zintegrowanym siedziskiem.

LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:

Schodolazy elektryczne do stosowania z wózkiem inwalidzkim.



## PT S 130/160



### SPECJALISTA WEWNĄTRZ

Wyposażony w wygodne siedzisko i składane podłokietniki pokryte pianką antypoślizgową, PT S jest idealnym schodolazem do użytku wewnątrz domu i wokół niego.

Kompaktowa konstrukcja PT S sprawia, że najlepiej sprawdza się na wąskich i krętych schodach.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT S 130: 130 kg* Nr. Art. 045 723 HMV: 18.65.01.1015
	PT S 160: 160 kg* Nr. Art. 045 724 HMV: 18.65.01.1029
	*waga użytkownika
Waga całkowita	34,8 kg
Waga największej części	21 kg (część jezdna z siedziskiem)
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	505 mm (wraz z podłokietnikami)
Głębokość	675 mm
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m

Urządzenie zawiera akcesoria



## PT Outdoor 120/150



### TWÓJ TOWARZYSZ NA ZEWNĄTRZ

Dzięki solidnej konstrukcji z bardzo dużymi niebrudzącymi kołami, układem hamulcowym wewnątrz obręczy kół oraz szerszemu rozstawowi, PT Outdoor jest idealny poza domem.

I możesz z łatwością zabrać PT Outdoor z sobą, aby odwiedzić przyjaciół i krewnych.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Outdoor 120: 120 kg* Nr. Art. 045 725
	PT Outdoor 150: 150 kg* Nr. Art. 045 726
	*waga użytkownika
Waga całkowita	37,7 kg
Waga największej części	24,9 kg (część jezdna z siedziskiem)
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	505 mm (wraz z podłokietnikami)
Głębokość	675 mm
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m

Urządzenie zawiera akcesoria



## PT Uni 130/160



### WSZECHSTRONNY PROFESJONALIZM

Do transportu wózków inwalidzkich i krzeseł transportowych: wystarczy najechać na platformy i zabezpieczyć w miejscu oparcie wózka (zasięg kłamry 330 do 500 mm). Zaciągnij hamulce przy wózku i jesteś gotowy do jazdy! Składany kompaktowo zapewnia szybkie i łatwe przechowywanie.

Idealny również do profesjonalnego przewozu osób.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Uni 130: 130 kg* Nr. Art. 045 727 HMV: 18.65.01.1014
	PT Uni 160: 160 kg* Nr. Art. 045 728 HMV: 18.65.01.1028
	*waga użytkownika + wózek
Waga całkowita	27,6 kg
Waga największej części	16,7 kg (część jezdna z platformami)
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	760 mm (opuszczone platformy) 395 mm (złożone platformy)
Głębokość	385 mm
Minimalny wymiar spocznika	1,1 x 0,9 m



## PT Adapt 130/160




### DOPASOWANY DO WÓZKA

Abyś mógł korzystać z LIFTKAR PT z własnym wózkiem, montowany jest niezbędny adapter w autoryzowanym warsztacie.

LIFTKAR PT Plus 125 Nr. Art. 045 729  
Rozwiązanie wszystko-w-jednym zawiera LIFTKAR PT Adapt i wózek inwalidzki dla osób o wadze do 125 kg.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Adapt 130: 130 kg* Nr. Art. 045 721 HMV: 18.65.01.1013
	PT Adapt 160: 160 kg* Nr. Art. 045 722 HMV: 18.65.01.1030
	*waga użytkownika + wózek
Waga całkowita	24,7 kg
Waga największej części	15,2 kg (część jezdna)
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	482 mm (bez wózka)
Głębokość	385 mm (bez wózka)
Minimalny wymiar spocznika	0,9 x 0,9 m

Zdjęcie przykładowe

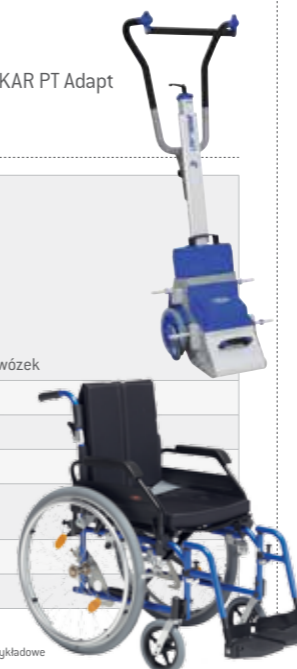

## PT Fold 130/160



### IDEALNY DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE MEDYCZNYM

Wyposażony w koła o średnicy 200 mm i szerokość jezdni 297 mm, PT Fold jest idealnym schodolazem na bardzo strome i wąskie schody kręte. Dzięki łatwemu składaniu schodolazu PT Fold może być umieszczony w dowolnym pojeździe.

Dla ułatwienia czyszczenia siedzisko jest odpinane i zmywalne.

Udźwig i numer artykułu kompletnego schodolazu LIFTKAR z baterią i ładowarką	PT Fold 130: 130 kg* Nr. Art. 045 731
	PT Fold 160: 160 kg* Nr. Art. 045 732
	*waga użytkownika
Waga całkowita	28 kg
Waga największej części	N/A
Całkowita wysokość	1130 mm
Całkowita szerokość	430 mm (siedzisko) 482 mm (uchwyt)
Głębokość	660 mm (405 mm złożony)
Minimalny wymiar spocznika	0,8 x 0,9 m



### DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH MODELI

**Prędkość wspinania:** trzy prędkości ustawiane na kolumnie sterującej

I = 10 stopni na minutę

II = 14 stopni na minutę

III = 18 stopni na minutę

**Maksymalna wysokość stopnia:** 205 do 220 mm (maksymalna jest osiągana poprzez przechylenie schodolazu pod stromym kątem)

**Zasięg na jednym ładowaniu:** zależy od wagi użytkownika oraz kierunku jazdy góra/dół. Orientacyjnie można określić pomiędzy 300 a 500 stopni.

Jeśli schodolaz jest w ciągłej eksploatacji (np. w profesjonalnych firmach transportowych) w każdej chwili można użyć wymiennej dodatkowej baterii. Dostępna jest również przenośna ładowarka zapewniająca szybkie ładowanie akumulatora w czasie jazdy samochodem.

**Moc i pojemność baterii:** 24 VDC -5.2 Ah

**Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**

- 1) Mechaniczne zabezpieczenie (przesuwana piasta)
- 2) Elektroniczne zabezpieczenie

**Koła główne:** niebrudzące szare opony zapewniające bardzo płynną pracę. Koła PT Outdoor mają średnicę 260 mm (zewnętrzna szerokość jezdni 430mm). Pozostałe modele mają średnicę 200 mm (zewnętrzna szerokość jezdni 297 mm).

**Koła wspomagające:** również niebrudzące szare opony, pełniące funkcję hamulca, mają średnicę 80 mm.

**Wewnętrzna szerokość ramy wózka:** minimum 320 mm (PT Adapt i PT UNI)



## MOBILNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZA

TWÓJ IDEALNY PARTNER W PODRÓŻACH

### LEKKI I MIESZCZĄCY SIĘ W KAŻDYM POJEŹDZIE

A wraz z ładowarką samochodową możesz naładować baterię w drodze - tak aby LIFTKAR PT był gotowy do działania, gdy tego potrzebujesz.

**lekką konstrukcją modułową**

Szybki i łatwy demontaż bez użycia narzędzi. LIFTKAR PT można zabrać wszędzie ze sobą. Całość jest lekka i łatwa do transportu.



Szybki demontaż na trzy części –  
zapakuj LIFTKAR PT w każdym bagażniku





## MOBILNOŚĆ SPEŁNIAJĄCA NAJWYŻSZE WYMAGANIA

TRANSPORTERY OSOBOWE DLA PROFESJONALISTÓW

SOLIDNY, NIEZAWODNY I DOSTĘPNY W KAŻDEJ CHWILI.

LIFTKAR PT jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych służb ratowniczych i karetek, ponieważ zapewnia Ci efektywną pracę.

Nadaje się do wszystkich rodzajów schodów (prostych i spiralnych) oraz różnych okładzin i powierzchni stopni, takich jak kamień, marmur i drewno.



Lekka praca dla obsługującego -  
ergonomiczny, łatwy w użyciu, bezpieczny



## LIFTKAR PT AKCESORIA

KOMFORT ŻYCIA JEST WTEDY KIEDY MASZ ROZWIĄZANIE ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE.

Akcesoria do schodolazów LIFTKAR PT są specjalnie zaprojektowane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb i wymagań osób z trudnościami w chodzeniu. Jakość rozwiązań technicznych i konstrukcja to sprawa najwyższej wagi.



**Ladowarka BC-PT z eurołączem**  
Nr. Art. 045 141



**Dodatkowa bateria BU PT 5,2 Ah**  
waga 4.3 kg, pojemność 5.2 Ah, moc 24 VDC  
Nr. Art. 004 150



**Przenośna ładowarka BC 10-30 VDC-PT**  
Nr. Art. 945 120



**Podłokietniki z miękką tapicerką**  
Nr. Art. 945 148



**Składany podnóżek**  
Nr. Art. 945 157



**Regulowany zagłówek**  
Nr. Art. 947 013



**Podłokietniki z szerszym rozstawem**  
Standardowa szerokość 44 cm, zwiększona do 54 cm  
Nr. Art. 945 146



**Gama pasów bezpieczeństwa**  
5-punktowy pas, Nr. Art. 945 144 / Pas biodrowy, Nr. Art. 945 118 / Biodrowo/klatkowy pas, Nr. Art. 945 158



**Adaptory wtyczek**  
Wielka Brytania, Nr. Art. 045 142 / USA, Nr. Art. 045 143  
Australia, Nr. Art. 045 144



**Klamra podpięcia wózka do PT Uni**  
Szeroka: 360-560 mm, Nr. Art. 945 131  
Wąska: 270-380 mm, Nr. Art. 945 114

