

MEDIX



Rodzina

CLISIS

swoboda dostępu i intuicyjna obsługa



MEDIX



Rodzina

CLISIS

skoncentrowany na pełnym dostępie





Rodzina

CLISIS



Konfiguracja dla klienta

Podstawowy system składający się z dwustronnie podpartego, zdalnie sterowanego stołu 90 /-20 , generatora wysokiej częstotliwości oraz z toru telewizyjnego, daje szeroką możliwość doposażenia go, zgodnie ze specyfikacją klienta, poprzez dodanie

- urządzenia tomograficznego
- regulacji FFD
- zmotoryzowanego urządzenia uciskowego
- automatycznego kolimatora z prostokątnymi i kołowymi blendami
- jednostronnie podpartego blatu stołu z włókna węglowego
- konsoli dotykowej z integracją generator/procesor obrazowy
- pakietu angiograficzny/ interwencyjny
- pakietu automatycznej rekonstrukcji obrazu kręgosłupa
- pakietu automatycznej rekonstrukcji obrazów kończyn dolnych

Inwestycja długo terminowa

Szeroki zakres mechanicznej architektury połączony z wyjątkową gamą cyfrowych procesorów obrazu, powoduje, iż system CLISIS stanowi inwestycję na długie lata.

CLISIS

ACCESS

Przyjazny użytkownikowi

Pełny dostęp oferowany przez CLISIS ACCESS pozwala na bezwysiłkowe pozycjonowanie pacjentów i zapewnia wysoki komfort pracy obsłudze. Dostęp do pacjenta od strony kolumny aparatu upraszcza transport z/na wózek pacjenta i pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie procedur medycznych w nagłych przypadkach.





CLISIS

Exel

Zaprojektowany na przyszłość...

- zdalnie sterowany stół 90/90
- dodatkowy ruch pionowy niezależny od pochylenia stołu
- dodatkowa poprawa ergonomii
i wszechstronność aparatów z rodziny CLISIS

Pełen dostęp do pacjenta, ze wszystkich stron, dzięki jednostronnie podpartemu blatowi stołu i możliwości regulacji wysokości, ułatwia transport z/na wózek pacjenta i zwiększa komfort dla obsługi podczas procedur interwencyjnych lub ERCP.





Minimalna, 60 cm, wysokość blatu od podłogi i możliwość łatwej rozbudowy o nowy, dynamiczny płaski panel cyfrowy 43x43 cm, powoduje, że CLISIS EXEL to idealny wybór dla klientów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami.

Rodzina

CLISIS

Uniwersalność

- Płynna regulacja ogniskowej (FFD) w zakresie 105 - 150 cm pozwala na wygodne ekspozycje klatki piersiowej
- Szeroki zakres ruchu zespołu lampa RTG - detektor, pozwala na pełne pokrycie pacjenta polem promieniowania bez jego przemieszczania, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej stołu
- Stopień pacjenta może być regulowany wzdłuż całej długości blatu





Najwyższa wszechstronność

Wszechstronność Clisis pozwala na zastosowanie
w szerokim zakresie badań - od ortopedii
do angiografii.



Ergonomia

Konsola operatora umożliwia

- sterowanie stołem przechylnym
- obsługę generatora
- obsługę systemu obrazowego



Konsola sterująca, umieszczona na przedniej płycie urządzenia do zdjęć celowanych SFD, umożliwia sterowanie funkcjami stołu i automatycznego kolimatora.



Rodzina

CLISIS

perfekcyjna jakość obrazu przy minimalnej dawce



Wszystkie systemy obrazowe rodziny CLISIS wyposażone są w kamerę CCD wysokiej rozdzielczości i wyrafinowane techniczne rozwiązania dla zapewnienia optymalizacji jakości obrazu i odpowiedniej redukcji dawki


Zintegrowany system automatyki ekspozycji (AEC) umożliwia dowolne ustawianie odpowiednich poziomów dawek dla każdego programu anatomicznego i dla każdego pacjenta

DICOM-3

Funkcjonalności sieciowe

System wyróżnia wyjątkowa łatwość zintegrowania z siecią szpitalną, dzięki bogatemu interfejsowi DICOM 3.0

Wystarczy jedno kliknięcie dla uruchomienia wyrafinowanych narzędzi programowych towarzyszących funkcjom drukowania, wprowadzania danych pacjenta, archiwizacji badań czy funkcjom zapisu na dyskach CD

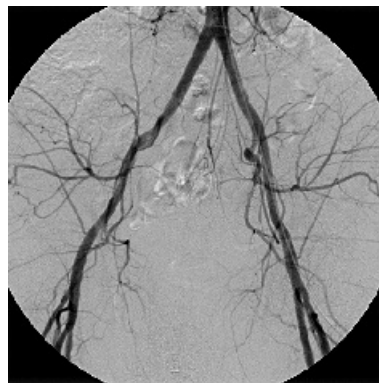

Rodzina

CLISIS



MEDIX

ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa

tel. 22 516 98 60

fax 22 610 37 77

info@medix.com.pl

www.medix.com.pl