


FloatRest®

Luksusowe kapsuły i kabiny do floatingu



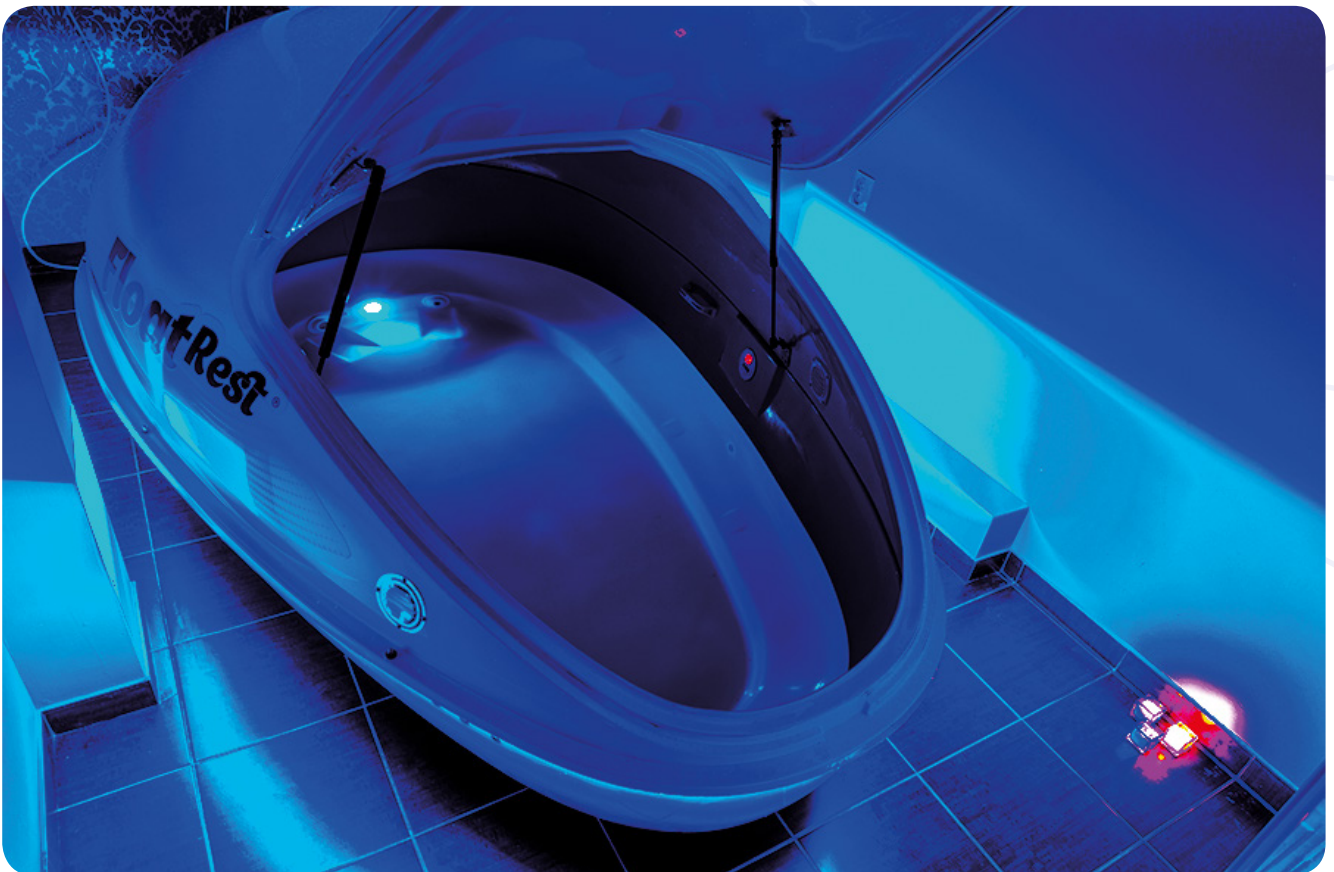

NANO
SILVER
ANTIBACTERIAL
TECHNOLOGY

PRODUKCJA KABIN I KAPSUŁ FLOATREST®

Jesteśmy Polskim producentem urządzeń floatingowych FloatRest®.

Specjalizujemy się w produkcji największych w Europie kapsuł i kabin do floatingu. Zapewniamy najwyższą jakość, niezawodność, nowoczesny design oraz wyjątkowe rozwiązania techniczne. Urządzenia deprywacji sensorycznej wykonywane są z całkowicie bezpiecznych, najwyższej jakości materiałów, które spełniają wszelkie normy i wymogi Unii Europejskiej. Kabin oraz kapsuły floatingowe, marka FloatRest® oraz zastosowane rozwiązania zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, są chronione prawem własności przemysłowej w Unii Europejskiej i na świecie. Urządzenia zostały pozytywnie przebadane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego i jako jedyne na rynku uzyskały certyfikat higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

CZYM JEST FLOATING

Floatingu czyli Terapii Ograniczonej Stymulacji Środowiskowej R.E.S.T. polega na redukcji około 90% bodźców zewnętrznych. Takie warunki spełniają kapsuły i kabin FloatRest®. W trakcie sesji głęboka cisza, spokój, błogie ciepło oraz stan zbliżony do stanu lewitacji (dzięki nieważkiemu unoszeniu się na wodzie w wysoko stężonym roztworze soli Epsom), wywołują odczucia podobne do tych, których doświadcza dziecko w łonie matki. Ze względu na brak jakichkolwiek bodźców-wrażeń oddziałujących na zmysł słuchu i wzroku, dotyku, czy powonienia, mózg relaksuje się i osiąga stan głębokiej medytacji (fal Theta). Ciało i umysł odpoczywają i regenerują się 4-5 razy szybciej niż w czasie snu. Organizm produkuje substancje przeciwbólowe oraz tzw. hormony szczęścia, usuwany jest hormon stresu kortyzol. Sesje floatingu pozytywnie wpływają na psychikę, ciało, skórę, mięśnie, stawy i kręgosłup.






WYKORZYSTANIE TERAPII FLOATREST®

TERAPIĘ FLOATREST® WYKORZYSTUJE SIĘ:

- we wzmacnianiu układu odpornościowego
- w poprawie wydolności, koncentracji uwagi i pamięci, twórczości
- w zmniejszeniu stresu i zwiększeniu sił witalnych i energii, usuwa hormon stresu
- w podniesieniu libido, płodności, aktywności seksualnej
- w regeneracji aparatu ruchowego
- w poprawie nastroju i samopoczucia, eksplozja tzw. hormonów szczęścia
- w wyczynowym sporcie, w regeneracji i treningu mentalnym
- we wzmocnieniu kondycji, świadomości ciała i samooceny
- w ciąży, zmniejsza stres, pozwala odciążać kręgosłup
- w zabiegach odmładzających, intensywnie, naturalnie nawilża i ujędrnia skórę
- w dermatologii, leczy atopowe zapalenie skóry
- w odchudzaniu, likwiduje cellulit, modeluje sylwetkę

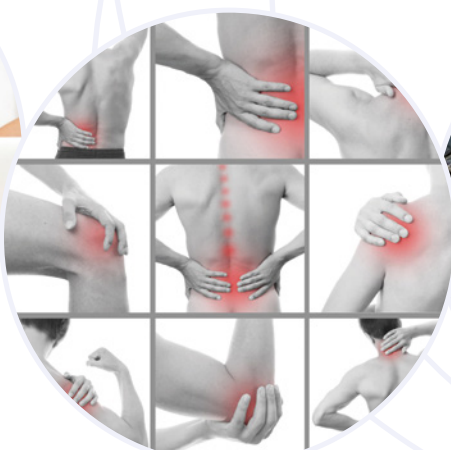



KTO KORZYSTA Z FLOATINGU ?

Terapia Float Rest® jest skierowana do każdego – niezależnie od wieku, płci czy problemów, z jakimi zmagają się na co dzień. Mogą z niej korzystać dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, wszyscy potrzebujący odprężenia, relaksu i zniwelowania stresu. Profesjonalni sportowcy korzystają z zabiegów floatingu od wielu lat. Olimpijczycy, mistrzowie świata, zawodnicy wielu dyscyplin regularnie korzystają z terapii Float Rest® w podniesieniu efektywności treningu, regeneracji psychiki.

ZABIEG DEDYKOWANY OSOBOM:

- z przewlekłym bólem różnego pochodzenia
- narażonym na chroniczny stres, depresję
- kobietom w ciąży
- sportowcom
- oraz wszystkim dbającym o urodę i sylwetkę

Zabieg floatingu może być przeprowadzany dla dzieci z rodzicami, dla jednej lub dwóch osób dorosłych. Najczęściej czas trwania zabiegu, w zależności od potrzeb klienta wynosi od 60 minut do kilku godzin.





DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z TERAPII FLOATREST®

TERAPIA FLOATREST® NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANA JEST W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- rehabilitacja: stany pourazowe, obrzęki kończyn, zmiany zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, artrozy
- wyczynowe uprawianie dyscyplin sportowych
- choroby autoimmunologiczne i reumatoidalne, RZS, MIZS
- stany bólowe i pooperacyjne aparatu ruchu
- wrodzone wady kręgosłupa: skoliozy i kifozy wieku dziecięcego, choroba Scheuermanna
- fibromyalgia, entezopatia, osteoartroza
- rekonwalescencja po przebytych chorobach w celu podniesienia odporności organizmu
- bóle głowy, migreny
- lekkie formy peryferyjnych porażeń
- depresje, stresy, nerwice, ADHD, Zespół Aspergera, Autyzm, ADD, nadpobudliwość, syndrom przemęczenia
- zespół stresu pourazowego PTSD
- odchudzanie, redukcja wagi i cellulitu
- atopowe zapalenie skóry AZS, egzema, łuszczyca
- miażdżyca tętnic, nadciśnienie tętnicze
- dna moczanowa (artretyzm tzw. podagra)
- ciężka praca fizyczna i umysłowa
- impotencja, zwiększenie libido





NANO
SILVER
ANTIBACTERIAL
TECHNOLOGY

FLOATREST® – URZĄDZENIE DLA WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

PERFEKCYJNE WYMIARY

Piękne wzornictwo urządzeń Float Rest® z geometrycznie ukształtowanym wnętrzem emanuje lekkością, podczas gdy duża ilość miejsca pozwala na swobodę ruchów i wyjątkowy komfort.

KABINA

Oferujemy największe kabiny na rynku o powierzchni 4 m², zapewniające niesamowity komfort sesji. Powierzchnia floatowania (wnętrze kabiny) to 245 cm długości, 160 cm szerokości i 215 cm wysokości. Zabieg może być przeprowadzany nawet dla dwóch osób. Na obudowie umieszczone są uchwyty do wygodnego i bezpiecznego poruszania się we wnętrzu kabiny podczas wejścia i wyjścia. Wejście do kabiny jest bardzo komfortowe z pełnowymiarowymi drzwiami dźwiękoszczelnymi. Specjalnie zaprojektowany sufit kabiny zapobiega

skraplaniu się wody, a oświetlenie LED w systemie gwieździste niebo gwarantuje wspaniałe doznania.

Zewnętrzną zabudowę kabiny można wykonać dopasowując ją do charakteru wnętrza, w który ma być użytkowana. Można ją wykonać w prosty sposób panelowy lub bardziej artystyczny z egzotycznego drewna, naturalnego kamienia lub kolorowego szkła.



KAPSUŁA

Harmonijna linia wewnętrzna kapsuły o wymiarach floatowania: 220 cm długości, 130 cm szerokości i 125 cm wysokości gwarantuje wspaniały komfort zabiegu oraz montaż urządzenia nawet w najskromniejszych warunkach lokalowych.

Powierzchnia floatowania to blisko 3m². Dzięki specjalistycznej budowie, nie wymagającej zabudowy, kapsułę możemy ustawić w dowolnym miejscu pomieszczenia.

Osoby starsze czy niepełnosprawne z łatwością wchodzi do urządzenia. Nie może być mowy o uczuciu klaustrofobii. W czasie zabiegu drzwi wejściowe można pozostawić otwarte.



WYĄTKOWA BUDOWA

Do produkcji urządzeń stosujemy najnowocześniejszą opatentowaną technologię Nano Silver Antibacterial. Powierzchnie zachowują zabezpieczenie antybakteryjne przez cały czas eksploatacji produktu i dlatego posiadają dożywotnią gwarancję.

„Jony srebra” zostają aktywowane podczas wchodzenia w kontakt z wilgocią. Zabijają bakterie znajdujące się na powierzchni i blokują proces podziału komórek, tym samym hamując proliferację bakterii. Następuje proces samooczyszczania roztworu. Wyjątkowa budowa urządzeń polega na elipsoidalnej, czterowarstwowej, termoizolacyjnej i hermetycznej konstrukcji zapewnia najlepszą właściwość eksploatacyjną.

Powierzchnie urządzeń FloatRest® odporne są na: promieniowanie UV, uderzenia, chemię, wysokie temperatury, zmatowienia.

- Specjalistyczna bardzo wydajna pompa produkcji USA o wydajności do 23m³/h
- Skuteczny zestaw antybakteryjnych filtrów polimerowych produkcji USA
- Opatentowany filtr z jonami srebra produkcji USA o wydajności 16m³
- Jonizator i ozonator dezynfekujący kapsułę o wydajności 30m²
- Dyspenser z tlenem aktywnym o wydajności 20m³
- Konstrukcja urządzeń w technologii Nano Silver Antibacterial z jonami srebra



GWARANCJA STERYLNOŚCI ZABIEGU

Urządzenia wyposażone są w opatentowany, wieloetapowy system dezynfekcji i sterylizacji roztworu Epsom, który automatycznie, bezobsługowo dokonuje czyszczenia roztworu.

Nowoczesny system pomp i filtrów zintegrowany modułowo z urządzeniami nie potrzebuje dodatkowego pomieszczenia i dodatkowych zbiorników filtracyjnych.

Charakteryzuje się wysoce wydajną, błyskawiczną i bezgłośnie pracą filtrowania.

Czas potrzebny do przygotowania urządzenia dla nowego klienta wynosi tylko kilka minut. W tym czasie roztwór sterylizowany jest kilkakrotnie.





KOMPUTEROWE STEROWANIE FUNKCJAMI

Obsługa urządzeń jest bardzo prosta i czytelna. Automatyczny sterownik, nadzoruje wszystkie parametry: temperaturę solanki, czasy zabiegów, auto filtrację, dezynfekcję, wentylację, ilość seansów, oświetlenie, przywołanie obsługi, bezpieczeństwo zabiegów, przeglądy okresowe.

FUNKCJE KAPSUŁ I KABIN FLOAT REST®

- Automatyca sterylizacja i filtracja roztworu
- System jonizowania i dezynfekcji ozonem O₃
- Automatyca podłogowe podgrzewanie roztworu Epsom
- Elektroniczna regulacja temperatury roztworu
- Elektroniczna regulacja czasu trwania zabiegów
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sterylizacji zabiegu
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zakończenia zabiegu
- Licznik seansów (kontrola pracowników)
- Funkcja serwisu – przypomnienie o przeglądach
- Automatyca system wentylacji
- Podwodne oświetlenie solanki – wewnętrzna podwodna lampa RGB do koloroterapii
- System podświetlenia sufitu „gwiazdzone niebo”
- Zewnętrzne podświetlenie urządzeń w technologii led
- Wewnętrzne uchwyty zwiększające komfort wchodzenia/wychodzenia
- Bezpieczne antypoślizgowe dno
- Przywołanie obsługi – funkcja bezprzewodowa
- Wodoodporny system nagłośnienia z funkcją Bluetooth
- Zasilanie: gniazdko sieciowe 230V / bezpiecznik 20A






DANE TECHNICZNE KABINY I KAPSUŁY

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Włókno GFK z systemem ochrony termicznej i antybakteryjnej (jony srebra)
- Antypoślizgowa wewnętrzna i zewnętrzna powłoka kapsuły/kabiny zapewniająca higienę
- Antybakteryjna wewnętrzna powłoka kapsuły, kabiny zapewniająca higienę
- Specjalistyczna i niezawodna pompa do floatingu produkcji USA
- Profesjonalny zestaw filtrująco sterylizujący z jonami srebra i bakterioobójczymi włóknami polimerowymi produkcji USA dedykowany do floatingu
- Wysokiej klasy system regulacji temperatury roztworu Epsom produkcji szwedzkiej
- Podgrzewanie podłogowe roztworu
- Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzna podwodna lampa RGB do koloroterapii
- Wysokiej jakości zestaw nagłośniający z interkmem i bluetooth
- W pełni mikroprocesorowe automatyczne bezobsługowe sterowanie wszystkimi funkcjami. Urządzenia poprzez czujniki kontrolują i wykonują samoczynnie wszystkie procesy filtracji, dezynfekcji, reg.temperatury, itp.
- System wentylacji wnętrza
- Komputerowy sterownik dla obsługi z wieloma funkcjami: bieżąca informacja o zabiegu, reg.czasu zabiegu, autofiltracja, data, czas, kontrola pracowników – liczniki zabiegów, reg. temperatury soli, licznik serwisowy, sygnalizacja dźwiękowa końca zabiegu
- Wewnętrzne komfortowe uchwyty
- Bezprzewodowa funkcja przywołania obsługi z zasięgiem do 100 m zapewniająca pełne bezpieczeństwo oraz włącz/wyłącz podwodnego oświetlenia przez klienta
- Waga: Kapsuła 120 kg / Kabina 150 kg
- Maksymalna waga całkowita z roztworem Epsom: Kapsuła 920 kg / Kabina 1750 kg
- Kolor zewnętrzny urządzeń Ecrú, inny na specjalne zamówienie
- Kolor wewnątrz urządzeń: niebieski
- Wymiary zewnętrzne: Kapsuła: dł. 300 cm, szer. 170 cm, wys. 130 cm / Kabina: dł. 350 cm, szer. 200 cm, wys. 230 cm
- Wymiary wewnętrzne: Kapsuła: dł. 220 cm, szer. 130 cm, wys.125 cm / Kabina: dł. 245 cm, szer. 160 cm, wys. 215 cm
- Zasilanie: 230V / 50Hz. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 25A



WARUNKI LOKALOWE DLA KOMORY I KAPSUŁY FLOATREST®

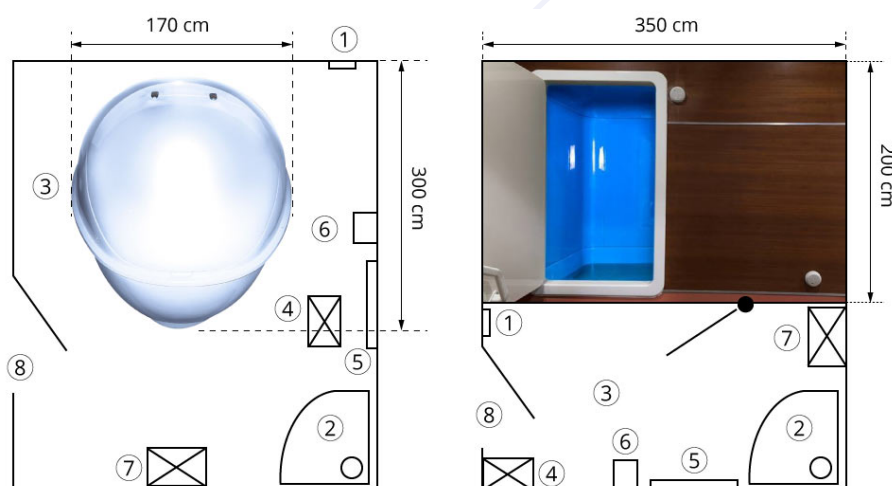

WYPOSAŻENIE LOKALU

1. gniazdko 230 V
2. kabina prysznicowa
3. podłoga łatwozmywalna
4. krzesło
5. lustro
6. suszarka do włosów
7. wieszak na ubranie
8. drzwi wejściowe min. 80cm

* Dowlone usytuowanie drzwi wejściowych i wyposażenia.

* Minimalna powierzchnia lokalu 12m²



WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ ZAPEWNIAMY

Jesteśmy producentem urządzeń floatingowych. Marka urządzeń Float Rest®, wzór przemysłowy oraz zastosowane rozwiązania zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, są chronione prawem własności przemysłowej w Unii Europejskiej i na świecie.

WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ ZAPEWNIAMY:

- Transport
- Instalację urządzeń oraz pełną obsługę serwisową
- Całkowite napełnienie urządzeń roztworem soli Epsom
- Zapas 150 kg soli Epsom do własnego dozowania
- Miernik do badania wyporności roztworu Epsom
- Zestaw do badania jakości wody; tester do mierzenia pH
- Zapasowy filtr polimerowy
- Komplet środków chemicznych do dezynfekcji filtrów
- Środki pH+, pH-
- Zestaw do dezynfekcji urządzeń
- Zatycki do uszu, okulary, poduszkę pod kark
- Instrukcję obsługi, materiały szkoleniowe
- Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Wsparcie reklamowe

