

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Intego / Intego Pro

Twoje niezawodne wsparcie

[dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com)





# Twój niezawodny partner

Unity stomatologiczne Intego to innowacyjne rozwiązania i solidna konstrukcja oparta na latach doświadczeń Dentsply Sirona. Ułatwią pracę w każdym gabinecie, mając do zaoferowania: ergonomiczną konstrukcję, płynność pracy, najwyższą jakość materiałów oraz doskonały stosunek jakości do ceny. Unity stomatologiczne Intego to najlepsze rozwiązanie wysokiej klasy.

## Wysoka jakość

Doskonała wydajność, innowacyjne rozwiązania w atrakcyjnej cenie i możliwość rozbudowy w przyszłości stanowią ogromny atut.

## Ergonomiczna konstrukcja

Ergonomia pracy, intuicyjna obsługa oraz optymalne zintegrowane rozwiązania.

## Niemiecka jakość

Wymagające procesy kontroli jakości, doskonałe materiały i solidna konstrukcja.

### Wersja TS - rękawy od dołu

- Ergonomiczne pozycjonowanie konsoli lekarza dzięki ramieniu wychylnemu.
- Układ z odłączaną tacką, którą można z łatwością ustawić w odpowiednim położeniu.
- Zaawansowane funkcje zapobiegania infekcjom.



# Rozwiązania, na których można polegać

Każdy kolejny dzień w pracy stomatologa niesie nowe wyzwania. Intego to rozwiązanie idealne. Możesz wybrać spośród dwóch modeli dowolnie je konfigurując. Zarówno model z rękawami od góry, jak i od dołu, stanowi doskonałe rozwiązanie w atrakcyjnej cenie.

## Twe korzyści

- Zaawansowane funkcje zapobiegania infekcjom
- Ekran dotykowy EasyTouch oraz sterownik nożny zapewniające łatwość obsługi
- Wygodna konsola asysty do pracy na dwie lub cztery ręce
- Wiele możliwości konfiguracyjnych
- Dostępne w wersji TS z rękawami od dołu lub w wersji CS z rękawami od góry

## Wersja CS - rękawy od góry



Doskonale wyważone rękawy bez blokad oraz wychylne ramię umożliwiają przeprowadzanie zabiegów na cztery lub dwie ręce. Konsolę można obrócić o 240°. Maksymalna odległość między konsolą i instrumentami to 90 cm.

### The elegant world

Klasyczne i nieprzemijające połączenia kolorystyczne w eleganckim wydaniu.



Carbon\* Aubergine Platinum Pacific\*

### The natural world

Ciepłe i odprężające kolory dające ukojenie.



Basalt\* Rosewood\* Cherry Sapphire

### The vital world

Żywe kolory i jasne odcienie dające zastrzyk energii



Spring Sunset Orchid\* Lagoon

\* Kolory dostępne w wersji z tapicerką Lounge.

# Ergonomiczna konstrukcja, na której można polegać

Unit stomatologiczny jest sercem każdego gabinetu. Intego doskonale łączy atrakcyjny wygląd i funkcjonalność, umożliwiając wygodną pracę w każdych warunkach. Unit ten charakteryzuje harmonijna konstrukcja, idealnie spasowane komponenty, szeroka gama wariantów kolorystycznych oraz łatwość obsługi. Intego podniesie walory wizualne każdego gabinetu.

## Opcje tapicerki



### Tapicerka premium

Wysokiej jakości bezzwowa tapicerka zapewnia komfort podczas długich zabiegów.



### Tapicerka lounge

Miękki, przyjemny w dotyku materiał i wygodne podszycie są gwarancją wysokiego komfortu. Konturowana powierzchnia umożliwia wygodne ułożenie.

**Ceniona jakość konstrukcji**

Rozwiązania konstrukcyjne Dentsply Sirona były wielokrotnie nagradzane. Firma otrzymała między innymi: nagrodę red dot design award, złotą nagrodę iF Product Design Award, nagrodę iF communication design award oraz nagrodę Good Design Award.



# Doskonałe rezultaty

Zabiegi stomatologiczne to kompleksowe procedury. Nasze wysoce ergonomiczne rozwiązania umożliwiają wygodny dostęp do pacjenta i płynną pracę, pacjentom dają z kolei poczucie komfortu. Intego zaprojektowano tak, aby maksymalnie usprawnić proces leczenia. Na unicie tej klasy można po prostu polegać. Osiąganie doskonałych rezultatów nie stanowi żadnego problemu.



## 1 Intuicyjna pozycja pracy

- **Większa swoboda**  
Smukłe oparcie zapewnia dobry dostęp do pacjenta oraz swobodną pozycję nóg
- **Optimalny dostęp do instrumentów**  
Wzorowa koordynacja pracy pomiędzy konsolą lekarza i asysty, możliwość swobodnego ustawienia dodatkowej tacki na konsoli lekarza
- **Wygodne stołki**  
Hugo, Carl, Paul

## 2 Komfortowe pozycjonowanie

- **Łatwa regulacji unitu**  
Szeroki zakres regulacji fotela, uchylna spluwaczka
- **Wysoki komfort pacjenta**  
Płynny ruch fotela, podłokietniki, wysuwany podnóżek Vario, wygodna tapicerka, ErgoMotion

## 3 Optymalna widoczność

- **Doskonałe oświetlenie**  
Płynny ruch fotela, podłokietniki, wysuwany podnóżek Vario, wygodna tapicerka, ErgoMotion
- **Regulowane zagłówki**  
Płaski lub dwuprzegubowy zagłówek
- **Wysokiej jakości kamery wewnętrzne**  
SiroCam F, AF lub AF+, monitor na unicie.





#### 4 Zintegrowana funkcjonalność

- **Intuicyjna obsługa**  
Wygodne interfejsy użytkownika EasyPad lub EasyTouch
- **Wbudowana funkcja Endo**  
Ustawiania momentu obrotowego wraz z endometrem na panelu EasyTouch
- **Nowoczesne rozwiązania**  
Innowacyjne instrumenty, nowoczesny system komunikacji z pacjentem Sivision, złącze USB, karta SD oraz złącze Ethernet do zdalnej diagnostyki serwisowej

#### Doskonałe rezultaty

- Kliniczne
- Estetyczne
- Funkcjonalne

- 1 Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E**  
Znakomita widoczność dzięki oświetleniu LED.
- 2 Mikrosilnik BL ISO E**  
Bezszczotkowy mikrosilnik umożliwiający kontrolę obrotów i momentu obrotowego. Wyjątkowo lekki i kompaktowy, z szerokim zakresem ustawiania obrotów.
- 3 Skaler SiroSonic L**  
Rękojeść i końcówki można poddać sterylizacji. Równa oscylacja zasilana elektrycznie z kontrolą przepływu wody.
- 4 Kamery wewnętrzne SiroCam F/AF/AF+**  
Szczegółowe obrazy wewnętrzne dzięki prostej w obsłudze kamerze SiroCam F lub AF/AF+ z funkcją autofocus.



## Systemy pilników recyprokalnych

Intego umożliwia stosowanie pilników pracujących w trybie recyprokalnym bezpośrednio na unicie.

WaveOne®

WaveOne® Gold  
Reciprocating Files

Reciproc®  
One file endo

## Intuicyjna obsługa

Zaawansowane zabiegi wymagają maksymalnej koncentracji. Z tego względu unity Intego są intuicyjne w obsłudze, a przejrzysty interfejs wraz z innowacyjnymi instrumentami umożliwiają swobodną pracę. Dzięki temu zapewniają koncentrację podczas zabiegu oraz doskonałe rezultaty.

### Intuicyjne i nowoczesne interfejsy



#### EasyPad

Prosty interfejs użytkownika – standard w Intego.



#### EasyTouch


Większy komfort pracy dzięki ekranowi dotykowemu i różnym opcjom wyświetlania.

### Opcje rozbudowy do zastosowań endodontycznych



#### ApexLocator

Panel EasyTouch umożliwia integrację funkcji ApexLocator, pozwalając na kontrolę głębokości roboczej podczas zabiegów endodontycznych.

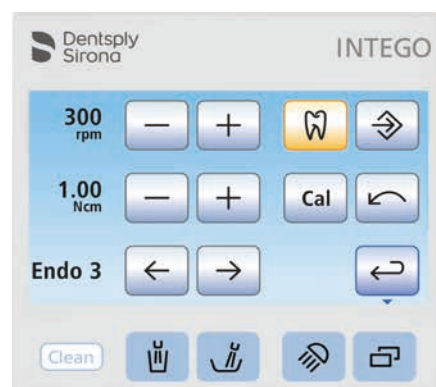

#### Kontrola momentu obrotowego

Możliwość regulacji obrotów wraz z momentem obrotowym. Dodatkowe opcje: ApexStop, Auto-Reverse, Apex Distance.

## Wysoki komfort pacjenta

Coś, na co pacjenci zwracają szczególną uwagę. Fotel Intego jest bardzo wygodny i daje pacjentom poczucie wyjątkowego komfortu. Można go znacznie opuścić, dzięki czemu nawet osoby niskiego wzrostu bez problemu zdołają usiąść i wstać. Nie ulega wątpliwości, że wygoda pacjentów przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa, a więc i na zaufanie do stomatologa i jego gabinetu.



### Dwuprzegubowy zagłówek

Szybka regulacja do wszelkich zastosowań, dla pacjentów o różnym wzroście.

### Tapicerka Premium/Lounge

Wysokiej jakości tapicerka zapewniająca komfort nawet podczas długich zabiegów.

### ErgoMotion

Ruch oparcia układa się zgodnie z ruchem kręgosłupa pacjenta zapobiegając rozciąganiu i ściskaniu.

### Podłokietniki

Pacjenci mogą wygodnie ułożyć ręce.



## ErgoMotion w rodzinie produktów Intego

### Korzyści

- Lepsze pozycjonowanie przy zabiegach w obszarach szczękowych i żuchwowych
- Mniejsze przeciążenia głowy i kręgosłupa pacjenta
- Brak konieczności ponownej regulacji zagłówka

### System regulacji

Precyzyjna regulacja fotela umożliwia komfortowe ułożenie pacjenta.

### Podnózek Vario

W wersji z tapicerką Premium można wysunąć podnózek, aby zagwarantować jeszcze większą wygodę pacjentom wysokiego wzrostu.

# Intego

## Funkcjonalne rozwiązania zapobiegania infekcjom

Stomatologom zależy na bezpieczeństwie pacjentów oraz ich zespołów. Koncepcja zapobiegania infekcjom unitu Intego pozwala z łatwością zachować zgodność z wszelkimi przepisami dotyczącymi higieny w gabinecie. Kompaktowa konstrukcja bloku wodnego oraz konsoli asysty umożliwiają wykonywanie procedur mających na celu zapobieganie infekcjom.

### **Spluwaczka**

Zdejmowana i obrotowa spluwaczka, łatwa i wygodna w czyszczeniu

### **Funkcja płukania Purge**

Płukanie rękawów instrumentów oraz linii ssących



### Układy ssania

Zgodne ze standardowymi systemami ssania mokrego i suchego, w tym z separatorem amalgamatu

## Intego

Kompaktowy blok wodny i konsola asysty mogą być dopasowane do wielu potrzeb poprzez wybór układów ssania oraz rozwiązań zapobiegającym infekcjom.



### Butelka z wodą

Dla kontroli jakości wody. Możliwość użycia środka Dentosept S do dezynfekcji i manualnej sanizacji dróg wodnych.



### Automatyczne czyszczenie linii ssących

Adapter do automatycznego płukania ślinociągu lub ssaka.



### Gładkie powierzchnie

Dokładne maskowanie elementów ruchomych zapewnia wysoką higienę i łatwość czyszczenia.

# Intego Pro

## Zaawansowane rozwiązania zapobiegania infekcjom

Stomatologom zależy na bezpieczeństwie pacjentów oraz ich zespołów. Koncepcja zapobiegania infekcjom unitu Intego Pro pozwala z łatwością zachować zgodność z wszelkimi przepisami dotyczącymi higieny w gabinecie. Rozbudowana konstrukcja bloku wodnego oraz konsoli asysty znacząco ułatwiają wykonywanie procedur mających na celu zapobieganie infekcjom.

### **Spluwaczka**

Zdejmowana i obrotowa spluwaczka wykonana z wysokiej jakości szkła.





### Funkcja płukania Purge i Autopurge

Rękawy instrumentów można szybko przepłukać lub poddać intensywnemu czyszczeniu dzięki specjalnym adapterom.

### Układy ssania

Zgodne ze standardowymi systemami ssania mokrego i suchego, w tym z separatorem amalgamatu.

## Intego Pro

Rozbudowana konstrukcja bloku wodnego oparta na zaawansowanych rozwiązaniach zapobiegania infekcjom.



### Zintegrowany system do dezynfekcji

Ciągła dezynfekcja wszystkich linii wodnych środkiem Dentosept S. Automatyczna sanityzacja do intensywnej dezynfekcji przeprowadzanej okresowo. Może być dodatkowo użyty jako zamknięty obieg wody.



### Wbudowane adaptery

Do automatycznego płukania rękawów (Autopurge) i sanityzacji dróg wodnych.



### Czyszczenie chemiczne rękawów ssących

Zbiornik na środek czyszczący do linii ssących. Stężenie środka podlega regulacji.

## Przyszłościowe i zróżnicowane

Szereg możliwości konfiguracji stanowi nieoceniony atut. Unity Intego można skonfigurować według własnych potrzeb. Wysoka elastyczność ma dla nas ogromne znaczenie – dlatego też unity Intego można wyposażyć w funkcje i interfejsy do wykorzystania w przyszłości.

### Wiele możliwości

#### Dwa rodzaje zagłówek

Płaski zagłówek umożliwia regulację wysokości.  
Dwuprzegubowy zagłówek zapewnia szerszą regulację i bardziej optymalne dopasowanie.



Płaski zagłówek



Dwuprzegubowy zagłówek

#### Lampy zabiegowe – zawsze wysokiej jakości

Lampa LEDview Plus zapewnia naturalne oświetlenie dzięki polichromatycznym diodom LED. Użytkownik ma możliwość regulacji temperatury barwowej oraz natężenia światła.



LEDlight



LEDview Plus

#### Konsola asysty Comfort lub Compact

Obie konsoly asysty gwarantują oszczędność miejsca i znaczną swobodę ruchu. Model Comfort dodatkowo umożliwia pracę na dwie ręce.



Konsola asysty Comfort



Konsola asysty Compact

### Nowoczesne wyposażenie

Kamery wewnątrzustne SiroCam F/AF/AF+ oferują doskonałą jakość obrazu i łatwość obsługi.



	SiroCam F	SiroCam AF	SiroCam AF+
<b>Ustawianie ostrości</b>	Stała ostrość (stała ogniskowa)	Automatyczna ostrość	Automatyczna ostrość
<b>Format obrazu 16:10</b>	✓	✓	✓
<b>Liczba pikseli</b>	0.42 Mpix	0.65 Mpix	1.00 Mpix
<b>Obszar roboczy</b>	✓ 5-20 mm	✓ 2-130 mm	✓ 2-130 mm
<b>Rozdzielczość obrazu na żywo</b>	824 x 514	824 x 514	824 x 514
<b>Rozdzielczość zdjęcia</b>	824 x 514	1024 x 640	1276 x 796

### Przyszłościowa konstrukcja

#### Złącza: przyszłościowe i konfigurowalne

Złącze USB w konsoli lekarza lub asysty umożliwia integrację dodatkowych funkcji. Możliwość podłączenia unitu do sieci ułatwia pracę serwisanta.



Wbudowane złącze USB

#### Monitor Sivision 22" AC

Na monitorze można wyświetlić obrazy z kamery wewnątrzustnej, obrazy RTG, programy, efekty planowania stomatologicznego, materiały wideo i prezentacje PowerPoint – wszystko bezpośrednio na unicie stomatologicznym.



Monitor Sivision 22" AC

# Jakość, na której można polegać

Zależy nam na satysfakcji i uznaniu naszych klientów. Tak więc jakość, wydajność i wsparcie techniczne są dla nas kluczowe. Unity stomatologiczne Dentsply Sirona to synonim najwyższej jakości oraz innowacyjności, które znacząco wpływają na komfort pracy.

## Niezawodność i solidność



Precyzyjne testy jakości i solidne materiały unitów Intego gwarantują niezawodną pracę oraz ponadprzeciętną żywotność.

## Wysoka jakość



Intego to świadectwo przywiązania do najdrobniejszych szczegółów. Zastosowane materiały - precyzyjnie formowane tworzywa, stal, aluminium oraz wysokiej jakości szkło i tacierka - spełniają najwyższe normy dla produktów klasy premium.

## Wysokie standardy



Dentsply Sirona to technologiczny lider z ponad 130-letnim doświadczeniem na polu innowacji. Nasi inżynierowie i pracownicy zatrudnieni w dziale badań i rozwoju przykładają szczególną uwagę do innowacyjności i najwyższych standardów jakości.



## Przyszłościowa konstrukcja

W centrum innowacji Dentsply Sirona przewiduje się nadchodzące trendy i projektuje produkty tak, by spełniały technologiczne wymagania w nadchodzącej przyszłości.



# Indywidualna konfiguracja

Unit Intego można skonfigurować tak, by spełniał indywidualne potrzeby.

## Intego

### Unit podstawowy

#### Fotel pacjenta

- Tapicerka premium
- Płaski zagłówek
- Pneumatyczny sterownik nożny

#### Konsola lekarza

- 5 pozycji instrumentów
- Interfejs użytkownika EasyPad
- Instalacja dla 2 napędów rotacyjnych

#### Konsola asysty

- Wersja Compact mocowana bezpośrednio pod spluwaczką
- 4 pozycje instrumentów
- Ślinociąg i ssak HVE

#### Blok wodny

- Kompaktowa konstrukcja
- Standardowe mokre ssanie
- Przystosowany do obiegu wody z butelki
- Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu

### Wersja

#### Wersja TS z rękawami od dołu



- Wysokość konsoli lekarza podlega regulacji i blokowaniu za pomocą hamulca pneumatycznego
- Ergonomiczna konstrukcja z regulowaną konsolą lekarza i ruchomym uchwytem tacki
- Duży obszar dla dodatkowych instrumentów na konsoli lekarza wraz z dodatkową tacką

#### Wersja CS z rękawami od góry



- Idealne rozwiązanie do rozmaitych zastosowań w leczeniu na dwie i cztery ręce
- Dobry zasięg rękawów: aż do 90 cm,
- Wysokość konsoli lekarza podlega regulacji i blokowaniu za pomocą hamulca pneumatycznego

## Intego

## Pakiety użytkownika



## Start

- Standardowa dmuchawko-strzykawka
- Oświetlenie instrumentów na konsoli lekarza
- 2 rękawy turbinowe
- Lampa LEDlight



## Innovation

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
- Światło LED do Instrumentów na konsoli lekarza
- 1 rękaw turbinowy
- 1 mikrosilnik BL ISO E z elektroniką
- Skaler Sirosonic L
- Lampa LEDview Plus



## Ergo

- ErgoMotion
- Podnośnik fotela 185 kg
- 2 podłokietniki
- Dwuprzegubowy zagłówek



## Advance

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
- Światło LED do Instrumentów na konsoli lekarza
- 1 rękaw turbinowy
- 1 mikrosilnik BL ISO E z elektroniką
- Lampa LEDlight



## Touch Plus

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- 1 mikrosilnik BL ISO E z elektroniką
- 1 rękaw turbinowy
- Światło LED do Instrumentów na konsoli lekarza
- Interfejs EasyTouch
- Lampa LEDview Plus



## Endo Pro\*\*

- Wbudowana funkcja kontroli momentu obrotowego
- ApexLocator
- Kątnica Endo 6:1
- e-Control

\*\* Tylko z interfejsem EasyTouch

## Pakiety multimedialne



## Sivision Ready

- Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
- Złącze sieciowe Ethernet



## Sivision Start

**Z monitorem lub bez**

- Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
- Złącze sieciowe Ethernet
- Kamera wewnętrzna SiroCam F (SiroCam AF lub AF+ za dodatkową opłatą)
- Mocowanie monitora na kolumnie
- Opcjonalnie: Monitor 22" AC

# Twoje indywidualne możliwości

Poniżej zamieszczono pełną listę indywidualnych możliwości oraz listę elementów bazowych.

## Intego

Fotel pacjenta	
2 pozycje leczenia, S oraz O	■
Wbudowana skrzynka przyłączeniowa	■
Podnośnik fotela 140 kg	■
Płaski zagłówek	■
Dwuprzegubowy zagłówek	□ Er
Tapicerka Premium	■
Tapicerka Lounge	□
ErgoMotion	□ Er
Czterokierunkowy przełącznik nożny	□
Poduszka podwyższająca dla małych pacjentów	□
Prawy podłokietnik	□ Er
Lewy podłokietnik	□ Er
Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych	□
Zestaw redukcji podciśnienia	□
Zestaw osłon przyłączy	□
Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa	□
Płyta montażowa	□

Konsola lekarza	
Ramię o regulowanej wysokości z hamulcem pneumatycznym	■
5 pozycji instrumentów	■
Hydro-pneumatyczny osprzęt do 2 instrumentów rotacyjnych	■
Pneumatyczny sterownik nożny	■
Elektryczny sterownik nożny C+	□ A, I, T
Interfejs EasyPad z ustawieniami dla 2 użytkowników	■
Interfejs EasyTouch z ustawieniami dla 4 użytkowników	□ T
Sprayvit E ze światłem	□ A, I
Sprayvit E ze światłem (przycisk wody po lewej)	□ A, I
Standardowa dmuchawko-strzykawka	□ S
Rękaw turbiny z oświetleniem	□ 2xS, A, I, T
Rękaw turbiny Borden	□
Pierwszy rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E	□ A, I, T
Drugi rękaw z mikrosilnikiem BL ISO E	□
Skaler SiroSonic L	□ I
Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego	□
Wewnętrzne oświetlenie turbiny i Sprayvit E	□ S, A, I, T
Kontrola momentu obrotowego do endodoncji	□ E
eControl: Zakres prędkości 100–40,000 rpm	□ E
Wbudowany endometr ApexLocator	□ E
Kątnica Endo 6:1	□ E
Negatoskop dla RTG wewnętrznych	□
Funkcja płukania Purge oraz manualna sanityzacja	□
Podkładka silikonowa (wersja TS z rękawami od dołu)	□
Dodatkowy uchwyt CS z tacką standardowego rozmiaru	□
Dodatkowy uchwyt TS/CS z tacką podwójnego rozmiaru	□
Podkładka silikonowa (wersja CS z rękawami od góry)	□
Wymienne nakładki silikonowe na uchwyty	□

Konsola asysty	
Konsola asysty Compact, mocowana bezpośrednio pod spluwaczką	■
Konsola asysty Comfort, idealny do zabiegów na dwie ręce	□
4 pozycje instrumentów	■
Ślinociąg i ssak HVE	■
Sprayvit E z oświetleniem	□
Sprayvit E z oświetleniem (przycisk wody po lewej)	□
Standardowa dmuchawko-strzykawka	□
Drugi ssak HVE	□
Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED	□
Przyciski dotykowe Touch pad	□
Źródło światła Sprayvit E	□
Podkładka silikonowa na konsolę asysty Comfort	□

Blok wodny	
Przygotowany do obiegu wody z butelki	■
Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu	■
Blok wodny bez spluwaczki	□
Przygotowany do standardowego ssania mokrego	■
Przygotowany do standardowego ssania mokrego z automatycznym systemem on/off	□
Zawór wielostanowiskowy	□
Zawór spluwaczki do standardowego ssania mokrego	□
Separator automatyczny	□
Separator amalgamatu	□
Butelka bez przełącznika na wodę miejską	□
Butelka z przełącznikiem na wodę miejską	□
Podgrzewacz wody	□
System czyszczenia rękawów ssących	□

Lampa zabiegowa/Heliodont Plus	
LEDlight	□ S, A
LEDview Plus	□ I, T
LEDview Plus mocowanie sufitowe	□
Przystosowanie dla mocowania sufitowego LEDview Plus/Heliodont Plus	□
Przystosowanie dla mocowania na unicie Heliodont Plus	□

Komunikacja z pacjentem	
Złącze USB w konsoli lekarza lub asysty	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Mocowanie monitora na kolumnie	□ SiS
Monitor 22" AC (z wbudowanym zasilaczem)*	□ SiS*
Złącze sieciowe Ethernet	□ SiR, SiS

■ Wposażenie podstawowe

□ Wposażenie dodatkowe

- Niemożliwe/nie dotyczy

SiR Pakiet Sivation Ready

SiS Pakiet Sivation Start

SiS\* Pakiet Sivation Start z monitorem

S Pakiet Start

A Pakiet Advance

I Pakiet Innovation

E Pakiet Endo Pro

Er Pakiet Ergo

T Pakiet Touch Plus





Stołek roboczy Hugo



Stołek roboczy Carl



Stołek roboczy Paul (z dodatkowym kręgiem na stopę)



Dodatkowa tacka dla wersji CS



Dodatkowa tacka dla wersji TS



Dwuprzegubowy zagłówek



Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED



Negatoskop dla RTG wewnątrzustnych



Dodatkowy uchwyt kamery dla wersji TS



Mocowanie dla Heliodent Plus



Elektryczny sterownik nożny C+




Płaski zagłówek



Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych



Mocowanie dla Heliodent Plus

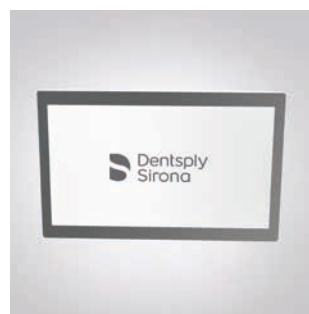

Monitor 22" AC



Intego bez spluwaczki



LEDlight



LEDview Plus



SiroCam AF



SiroCam AF+

# Indywidualna konfiguracja

Unit Intego Pro można skonfigurować tak, by spełniał indywidualne potrzeby.

## Intego Pro

### Unit podstawowy

#### Fotel pacjenta

- Tapicerka premium
- Pneumatyczny sterownik nożny
- Płaski zagłówek
- Czterokierunkowy przełącznik nożny

#### Konsola lekarza

- 5 pozycji instrumentów
- Interfejs użytkownika EasyPad
- Instalacja dla 2 napędów rotacyjnych
- Światło LED do Instrumentów
- Elektronika do maksymalnie 2 mikrosilników i skalera

#### Konsola asysty

- Wersja Comfort, z ramieniem wychylnym (duży zakres ruchu obrotowego)
- 4 pozycje instrumentów
- Ślinociąg i ssak HVE
- Światło LED do dmuchawko-strzykawki Sprayvit E

#### Blok wodny

- Rozbudowana konstrukcja
- Możliwość integracji automatycznego systemu dezynfekcji
- Wbudowane adaptory do płukania rękawów
- Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu
- System mokrego ssanie z zaworem wielostanowiskowym
- Wbudowana funkcja czyszczenia rękawów ssących
- Podgrzewacz wody

### Wersja

#### Wersja TS z rękawami od dołu



- Wysokość konsoli lekarza podlega regulacji i blokowaniu za pomocą hamulca pneumatycznego
- Ergonomiczna konstrukcja z regulowaną konsolą lekarza i ruchomym uchwytem tacki
- Duży obszar dla dodatkowych instrumentów na konsoli lekarza wraz z dodatkową tacką

#### Wersja CS z rękawami od góry



- Idealne rozwiązanie do rozmaitych zastosowań w leczeniu na dwie i cztery ręce
- Dobry zasięg rękawów: aż do 90 cm,
- Wysokość konsoli lekarza podlega regulacji i blokowaniu za pomocą hamulca pneumatycznego

## Intego Pro

### Pakiety użytkownika



#### Start Pro

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
- 1 rękaw turbinowy
- 1 mikrosilnik BL ISO E
- Lampa LEDlight



#### Advance Pro

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
- 1 rękaw turbinowy
- 1 mikrosilnik BL ISO E
- Skaler Sirosonic L
- Interfejs EasyTouch
- Lampa LEDview Plus



#### Innovation Pro

- Elektroniczny sterownik nożny C+
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli lekarza
- Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego
- 1 rękaw turbinowy
- 2 mikrosilniki BL ISO E
- Skaler Sirosonic L
- Interfejs użytkownika EasyTouch
- Dmuchawko-strzykawka Sprayvit E na konsoli asysty
- LEDview Plusw



#### Endo Pro\*\*

- Wbudowana funkcja kontroli momentu obrotowego
- ApexLocator
- Kątnica Endo 6:1
- e-Control

\*\* Tylko z interfejsem EasyTouch

### Pakiety multimedialne



#### Sivision Ready

- Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
- Złącze sieciowe Ethernet



#### Sivision Start

##### **Z monitorem lub bez**

- Złącze USB na konsoli lekarza lub asysty
- Złącze sieciowe Ethernet
- Kamera wewnętrzna SiroCam F (SiroCam AF lub AF+ za dodatkową opłatą)
- Mocowanie monitora na kolumnie
- Opcjonalnie: Monitor 22" AC

# Twoje indywidualne możliwości

Poniżej zamieszczono pełną listę indywidualnych możliwości oraz listę elementów bazowych.

## Intego Pro

Fotel pacjenta	
2 pozycje leczenia, S oraz O	■
Wbudowana skrzynka przyłączeniowa	■
Podnośnik fotela 185 kg	■
Płaski zagłówek	■
Dwuprzegubowy zagłówek	□
Tapicerka Premium	■
Tapicerka Lounge	□
ErgoMotion	□
Czterokierunkowy przełącznik nożny	■
Poduszka podwyższająca dla małych pacjentów	□
Prawy podłokietnik	□
Lewy podłokietnik	□
Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych	□
Zestaw redukcji podciśnienia	□
Zestaw osłon przyłączy	□
Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa	□
Płyta montażowa	□

Konsola lekarza	
Ramię o regulowanej wysokości z hamulcem pneumatycznym	■
5 pozycji instrumentów	■
Dodatkowy uchwyt na kamerę (wersja TS z rękawami od dołu)	□
Hydro-pneumatyczny osprzęt do 2 instrumentów rotacyjnych	■
Pneumatyczny sterownik nożny	■
Elektryczny sterownik nożny C+	□ S, A, I
Interfejs EasyPad z ustawieniami dla 2 użytkowników	■
Interfejs EasyTouch z ustawieniami dla 4 użytkowników	□ A, I
Sprayvit E ze światłem	□ S, A, I
Sprayvit E ze światłem (przycisk wody po lewej)	□ S, A, I
Rękaw turbiny z oświetleniem	□ S, A, I
Pierwszy rękaw z mikrosiłnikiem BL ISO E	□ S, A, I
Drugi rękaw z mikrosiłnikiem BL ISO E	□ I
Skaler SiroSonic L	□ A, I
Instalacja dla trzeciego napędu rotacyjnego	□ I
Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED	□
Wewnętrzne oświetlenie turbiny i Sprayvit E	■
Kontrola momentu obrotowego do endodoncji	□ E
eControl: Zakres prędkości 100-40,000 rpm	□ E
Wbudowany endometr ApexLocator	□ E
Kątnica Endo 6:1	□ E
Negatoskop dla RTG wewnętrznych	□
Funkcje płukania Purge oraz Autopurge	■
Podkładka silikonowa (wersja TS z rękawami od dołu)	□
Dodatkowy uchwyt CS z tacką standardowego rozmiaru	□
Dodatkowy uchwyt TS/CS z tacką podwójnego rozmiaru	□
Podkładka silikonowa (wersja CS z rękawami od góry)	□
Wymienne nakładki silikonowe na uchwyty	□

Konsola asysty	
Konsola asysty Compact, mocowana bezpośrednio pod spluwaczką	■
Konsola asysty Comfort, idealny do zabiegów na dwie ręce	□
4 pozycje instrumentów	■
Ślinociąg i ssak HVE	■
Sprayvit E z oświetleniem	□ I
Sprayvit E z oświetleniem (przycisk wody po lewej)	□ I
Drugi ssak HVE	□
Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED	□
Przyciski dotykowe Touch pad	□
Źródło światła Sprayvit E	■
Podkładka silikonowa na konsolę asysty Comfort	□

Blok wodny	
Przygotowany do systemu dezynfekcji	■
Spluwaczka z funkcją ręcznego obrotu	■
Biała spluwaczka	■
Szklana spluwaczka	□
Blok wodny bez spluwaczki	□
Zawór wielostanowiskowy do standardowego ssania mokrego	■
Zawór spluwaczki do standardowego ssania mokrego	□
Separator automatyczny	□
Separator amalgamatu	□
Wbudowany system do dezynfekcji ze stałą dezynfekcją wody i funkcją automatycznej sanitzacji	□
Podgrzewacz wody	■
System czyszczenia rękawów	■
System chemicznego czyszczenia rękawów ssących	□

Lampa zabiegowa/Heliodent Plus	
LEDlight	□
LEDview Plus	□
LEDview Plus mocowanie sufitowe	□
Przystosowanie dla mocowania sufitowego LEDview Plus/Heliodent Plus	□
Przystosowanie dla mocowania na unicie Heliodent Plus	□

Komunikacja z pacjentem	
Złącze USB w konsoli lekarza lub asysty	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Mocowanie monitora na kolumnie	□ SiS
Monitor 22" AC (z wbudowanym zasilaczem)*	□ SiS*
Złącze sieciowe Ethernet	□ SiR, SiS

■ Wzposażenie podstawowe  
 □ Wzposażenie dodatkowe  
 - Niemożliwe/nie dotyczy  
 SiR Pakiet Sivation Ready  
 SiS Pakiet Sivation Start  
 SiS\* Pakiet Sivation Start z monitorem

S Pakiet Start Pro  
 A Pakiet Advance Pro  
 I Pakiet Innovation Pro  
 E Pakiet Endo Pro



Stołek roboczy Hugo



Stołek roboczy Carl



Stołek roboczy Paul (z dodatkowym kręgiem na stopę)



Dodatkowa taca dla wersji CS



Dodatkowa taca dla wersji TS



Dwuprzegubowy zagłówek



Lampa do polimeryzacji Satelec Mini LED



Negatoskop dla RTG wewnątrzustnych



Dodatkowy uchwyt kamery dla wersji TS



Intego bez spluwaczki



Elektryczny sterownik nożny C+



Płaski zagłówek



Zestaw zaworów do urządzeń zewnętrznych



Mocowanie dla Heliodent Plus



Monitor 22" AC



Intego Pro bez spluwaczki



LEDlight



LEDview Plus



SiroCam AF



SiroCam AF+





**Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o.**

Poleczki Business Park,  
ul. Salsy 2, budynek Lisbon  
02-823 Warszawa  
[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)

**Rozwiązania kliniczne**

Stomatologia zachowawcza  
Ortodoncja  
Endodoncja  
Implanty  
Protetyka

**Technologie**

CAD/CAM  
Obrazowanie  
Unity stomatologiczne  
Instrumenty