

AMADAR

Runyes[®]
FOCUS ON DENTAL

Ideał dla Twojej kliniki!





Konsoleta lekarza

Doskonale wyważone ramiona instrumentów zapewniają komfortową pracę

Panel asysty

Wielofunkcyjny panel asysty zapewnia płynną pracę zespołu medycznego

Komfort pacjenta

Uchylna misa sopluczkii ułatwia korzystanie dzieciom i osobom starszym

Komfort lekarza

Uchylny blok sopluczkii ułatwia dostęp do pacjenta z każdej strony

System podgrzewania wody do kubka

Dla większego komfortu pacjenta



Synchronizacja ruchu

Pełna synchronizacja ruchu siedziska i oparcia podczas regulacji pozycji

Bezpieczeństwo

Blokada najazdowa gwarantuje bezpieczne użytkowanie fotela

Sterownik nożny ze stali nierdzewnej

Płynna regulacja parametrów instrumentów

Sterownik fotela

Wykonany z trwałych materiałów

Modułowa budowa konsoly

Możliwość indywidualnej konfiguracji

Silikonowe rękawy

Trwałość na wiele lat



Wyjmowalny filtr ułatwia czyszczenie. Zatrzymuje zanieczyszczenia i chroni unit przed zatkaniem.



Dogodnie umieszczony wlew butelki ułatwia jej napełnianie i spełnia najwyższe standardy higieny.



Dwuprzegubowy zagłówek gwarantuje uzyskanie optymalnej pozycji pacjenta, także na wózku inwalidzkim.



Automatycznie aktywowany negatoskop – po zamknięciu jeszcze wygodniejszy dostęp do instrumentów.

CARE 11

Rękawy „od góry”



Lampa LED DCI-6



Lampa LED D4-2



Lampa halogenowa



CARE 11

Rękawy „od dołu”

Cechy

Fotel pacjenta:

- sterowanie ze sterownika nożnego, konolety lekarza i w panelu asysty
- zagłówek „chirurgiczny” 2-przegubowy
- udźwig do 135 kg
- blokada najazdowa fotela (bezpieczne użytkowanie fotela)
- pozycja 0 i 3 dowolnie programowalne pozycje robocze
- pozycja spluwaczkowa z automatycznym powrotem do ostatniej pozycji pracy
- 2 podłokietniki (prawy ruchomy)
- standardowa tapicerka bezszwowa (materiał prod. chińskiej)
- przyłącza do unitu zlokalizowane pod fotelem lub w zewnętrznej skrzynce

Blok spluwaczki:

- odchylany o 90° blok spluwaczki
- ceramiczna odchylana misa spluwaczki (łatwa w utrzymaniu czystości)
- panel sterowania funkcjami unitu dla asysty
- system podgrzewania wody do kubka w zakresie temperatury: 30 - 45°C
- strzykawko-dmuchałka 3-funkcyjna
- ślinociąg wodny (przepływowy)
- instalacja ssąca (2 końcówki) do pompy ssącej „mokrej”

Konsoleta lekarska:

- rękawy podawane „od góry”
- panel sterowania funkcjami unitu
- system wody destylowanej z automatyczną sygnalizacją niskiego poziomu
- ruchoma półka narzędziowa na instrumenty
- automatycznie aktywowana przeglądarka zdjęć RTG (negatoskop)
- metalowy sterownik nożny „dysk” do instrumentów
- strzykawko-dmuchałka 3-funkcyjna
- moduł mikrosilnika bez światła
- moduł turbiny bez światła
- 2 wolne moduły

Lampa zabiegowa:

- halogenowa
- zamocowana na pantograficznym ramieniu
- regulacja natężenia w zakresie: 8 - 20 tys. lux
- tryb do zakładania wypełnień kompozytowych

Wyposażenie opcjonalne:

- konsoleta lekarza w wersji „z rękawami podawanymi od dołu”
- stołek stomatologiczny RUNYES
- komfortowa tapicerka miękka (materiał USA)
- diodowa lampa zabiegowa LED D4-2 (natężenie 8 - 25 tys. lux)
- diodowa lampa zabiegowa LED DCI-6 (16/26/38 tys. lux, prod. firmy DCI USA)
- sterownik nożny „z dźwignią” do instrumentów

Parametry techniczne

- napięcie zasilania: 230V 50Hz
- ciśnienie wody: 0,2 – 0,4 MPa
- ciśnienie robocze powietrza: 0,55 – 0,6 MPa

Kolory tapicerek

materiał standardowy (prod. chińskiej):


- C01 granatowy
- C02 limonkowy
- C03 zielony
- C04 żółty
- C05 niebieski

materiał produkcji USA (tapicerki miękkie):


- I01 BALTIC (granatowy)
- I02 BRICK RED (burgund)
- I03 CYAN (niebieski)
- I04 HOT CHOCOLATE (czekoladowy)
- I05 APRICOT (pomarańczowy)
- I06 PARROT (cytrusowa zieleń)
- I07 CHARCOAL (ciemno-grafitowy)



Wymiary fotela

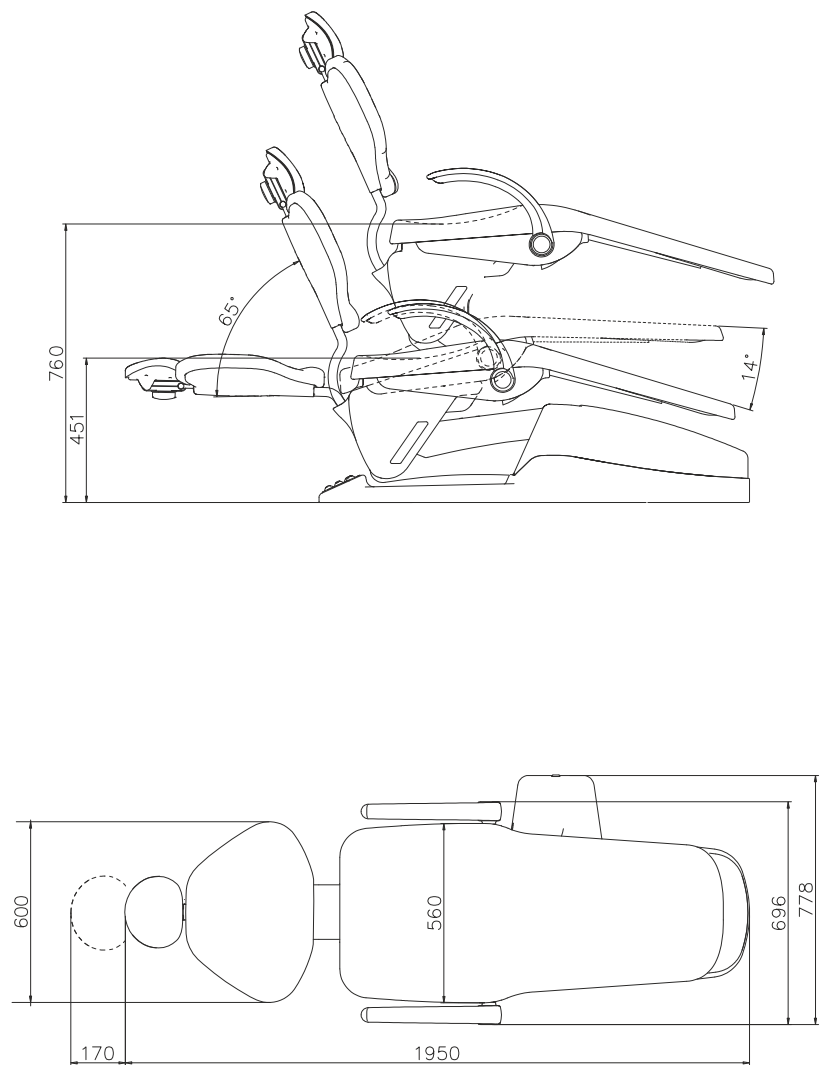

Położenie w gabinecie

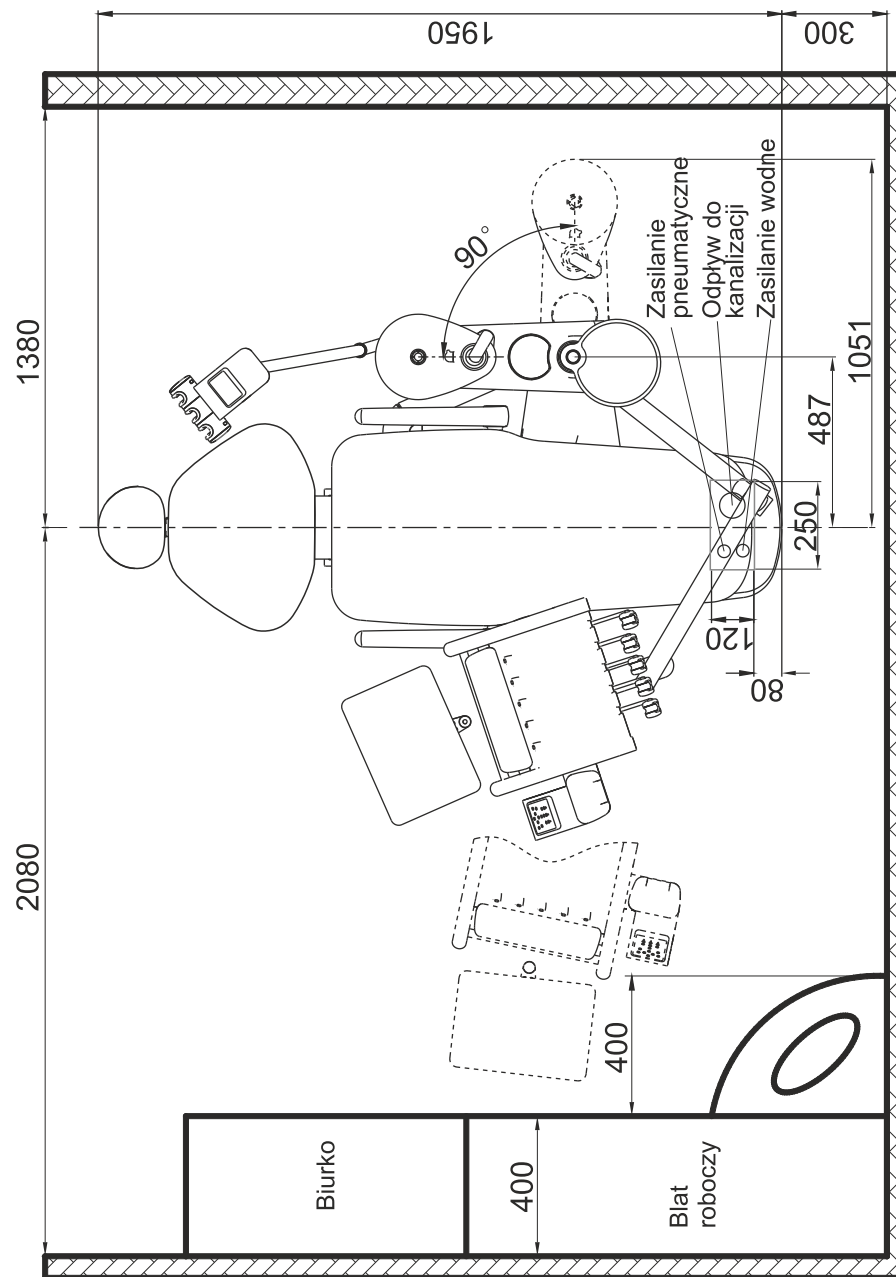



Runyes Medical jest chińską firmą działającą na rynku urządzeń stomatologicznych od 2000 roku. To jedna z najdynamiczniej rozwijających się obecnie marek rynku stomatologicznego na świecie.

Jest pierwszą firmą, która w Chinach rozpoczęła produkcję autoklawów stomatologicznych. W latach 2004 - 2014 wyprodukowała i rozdystrybuowała ich na całym świecie ponad 135 000, co wprowadziło ją na pozycję niekwestionowanego lidera wśród światowych producentów autoklawów.

Od momentu rozpoczęcia produkcji autoklawów, a następnie aparatów rentgenowskich oraz unitów stomatologicznych firma zdobyła olbrzymie doświadczenie na rynku urządzeń specjalistycznych dla stomatologii. Runyes stał się jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego.

Obecnie firma kooperuje z wieloma uznanymi producentami urządzeń stomatologicznych m.in. z USA, Włoch i innych krajów. Wyznacza technologiczne i designerskie trendy na rynku stomatologicznym oraz oferuje innowacyjne rozwiązania sprzętowe, które szybko zyskują uznanie rynku.

Wrzesień 2016 - Niniejszy prospekt ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Dystrybutor i producent zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacjach urządzeń bez uprzedniego powiadomienia.



Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.

Add: No. 456, Tonghui Road, Jiangbei Investment & Pioneering Park C, Ningbo
 Tel: +86-574-27709922 Fax: +86-574-27709923
 Http://www.runyes.com E-mail: runyes@runyes.com



Wyłączny przedstawiciel w Polsce Amadar Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
 Tel: +48 22 826 43 81 E-mail: amadar@amadar.pl
 Http://www.amadar.pl

