

Kompletny zestaw do podłączania endoskopów



Uchwyt montażowy
naścienny

Zasilanie elektryczne

Wymiary urządzenia do przepłukiwania kanałów endo- skopowych SCOPE BUDDY®

9,5 W. x 6 Sz. x 8 Gł. (cali)

(24,1 W. x 15,2 Sz. x 20,3 Gł. (cm))

Waga urządzenia

10 funtów (4,5 kg)

Wymagania elektryczne

110 – 230 V, 50/60 Hz

Certyfikaty bezpieczeństwa elektrycznego

Norma UL 61010-1

CANADA/USA C22.2 Nr 61010-1

ETL i cETL

Prędkość tłoczenia płynu

1 litr/minutę

Informacje dotyczące składania zamówień na urządzenie do przepłukiwania kanałów SCOPE BUDDY®

Numer Modelu	Opis
EFA-US-G	Ameryka Północna
EFA-IN-G	reszta świata

Informacje dotyczące zamawiania wyposażenia dodatkowego

Numer części	Opis
78399-669	Kompletny zestaw do podłączania endoskopów
75227-679	Cylinder miarowy

Informacje dotyczące składania zamówień na detergent

Numer części	Opis
ML02-0106	Detergent INTERCEPT® 4 kanistry/opakowanie o pojemności jednego galona)

SCOPE BUDDY® i INTERCEPT® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Medivators Inc.

Czas płukania

0 – 99 minut

Regulacja czasowa

Wyświetlacz cyfrowy z dotykowym

panelem sterującym

Ciśnienie w układzie

Wbudowany obwód bezpieczeństwa

Wskaźniki realizacji cyklu


Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne

Lokalizacja urządzenia

Montaż na blacie stołu lub na ścianie
(uchwyt w komplecie)

Gwarancja

Jeden rok

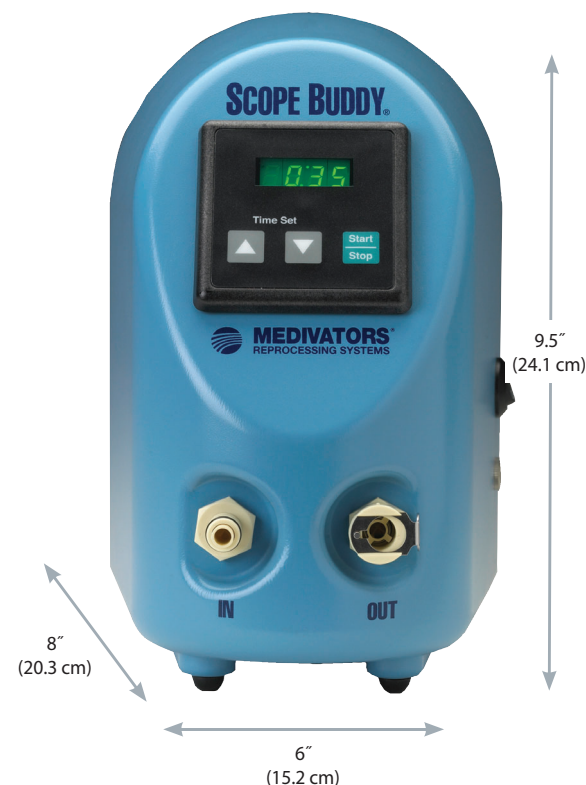

SCOPE BUDDY®

Urządzenie do przepłukiwania kanałów | Mycie ręczne*



* Urządzenie SCOPE BUDDY przeznaczone jest wyłącznie do przepłukiwania kanałów endoskopowych podczas etapu mycia ręcznego.

CANTEL
Global Headquarters
150 Clove Road - 9th Floor
Little Falls, NJ 07424-2139
Phone: +1.973.890-7220

MEDIVATORS
Global Headquarters
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447-4822
Phone: +1.763.553.3300 Fax: +1.763.553.3387
www.medivators.com

INFORMER
Dystrybutor w Polsce:
INFORMER MED Sp. z o.o.
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań
tel. +48 61 664 38 00 fax. +48 61 664 38 19
www.informermed.eu

MEDIVATORS
A Cantel Medical Company

Dystrybutor w Polsce:
INFORMER
M E D



PEŁNY ZAKRES OCHRONY

Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko firma Cantel Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe aktywne partnerstwo, które ma na celu wspomaganie usuwania ryzyka, usprawnianie wydajności operacyjnej i osiąganie jak najlepszych wyników.



MYCIE RĘCZNE

Mycie ręczne jest istotne dla usuwania zanieczyszczeń biologicznych i przygotowania endoskopu do dezynfekcji wysokiego poziomu. W celu uzyskiwania optymalnych rezultatów produkty i detergenty służące do mycia ręcznego zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu ich w pierwszym decydującym etapie do skutecznego usunięcia drobnoustrojów na endoskopach przed ich reprocessowaniem.

Jednolite płukanie endoskopów bez użycia rąk

Zmniejszenie ryzyka urazów związanych z wykonywaniem powtarzalnych ruchów

- Zastępuje powtarzalne i pracochłonne ostrzykiwanie kanałów
- Łatwa obsługa bez użycia rąk zmniejsza konieczność pracy manualnej
- Zapewnia stały przepływ płynu przez wszystkie kanały endoskopowe

Zapewnienie jednolitego płukania

- Ciągły, regulowany czasowo przepływ płynu zapewnia powtarzalność procesu płukania endoskopów
- Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne po zakończeniu procesu
- Kompatybilność ze wszystkimi wiodącymi markami endoskopów
- Może pracować z istniejącymi zlewami; Kompaktowy rozmiar umożliwiający montaż na blacie stołu lub na ścianie
- Spełnia lub przewyższa wymagania producentów endoskopów w zakresie objętości płukania kanałów

Skraca czas płukania

- Dokładnie przepłukuje większość endoskopów w czasie 35 sekund
- Przepłukuje wiele kanałów endoskopowych jednocześnie
- Szybko i cicho przetłacza płyn przez kanały endoskopowe

Detergent INTERCEPT® zapewnia doskonale i skuteczne mycie endoskopów

- Szybki, jednodominutowy czas kontaktu
- Niskopieniąca, obojętna formuła pH bezpieczna w użyciu w odniesieniu do endoskopów
- Efektywna kosztowo skoncentrowana formuła obniża koszty pojedynczego użycia



SCOPE BUDDY®

Urządzenie do przepłukiwania kanałów | Mycie ręczne*



Możliwość wyświetlenia czasu płukania endoskopów

Możliwość ustawienia czasu przez użytkownika

Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne po zakończeniu procesu

Uruchomienie/zatrzymanie pracy jednym dotknięciem

Możliwość łatwego i szybkiego wykonania połączeń rurowych

*Urządzenie SCOPE BUDDY przeznaczone jest wyłącznie do przepłukiwania kanałów endoskopowych podczas etapu mycia ręcznego. Nie jest natomiast przeznaczone do ręcznego mycia endoskopów.