



Przedstawiamy urządzenie F&P SleepStyle™

SleepStyle daje użytkownikowi swobodę wyboru postępowania najlepszego dla pacjentów.

Wszyscy pragniemy swobody, która łączy się z możliwością dokonania wyboru. Wyboru tego, jak spędzamy czas. Jak pracujemy. Wyboru tego, jak dbamy o naszych pacjentów. **Z urządzeniem SleepStyle jest to możliwe.**





Swoboda w prostocie

Wystarczy skonfigurować urządzenie i rozpocząć działanie.

Prostota jest wpisana w projekt urządzenia SleepStyle. Każdy detal został stworzony z myślą o wygodzie użytkownika oraz pacjenta podczas stosowania urządzenia. Państwa pacjenci mogą rozpocząć terapię w kilku krokach.

Menu przyjazne dla użytkownika.

We współpracy z użytkownikami naszych urządzeń stworzyliśmy proste w obsłudze menu. Zostało zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom oszczędzać czas podczas konfiguracji urządzenia oraz wyjaśniania działania pacjentom.



Łatwy dostęp do komory.

Proste naciśnięcie przycisku daje dostęp do komory, którą łatwo jest napełniać i czyścić.



Duże, czułe przyciski.

Układ oraz funkcjonalność przycisków działa zgodnie z menu, aby zapewnić szybkie nawigowanie i łatwość stosowania. Pacjenci muszą tylko nacisnąć „Start”.



Wbudowane opcje połączeń

Możliwe jest zdobywanie informacji, kiedy potrzebuje tego użytkownik i jego pacjenci. Sieć komórkowa umożliwia automatyczne przesyłanie danych, a technologia Bluetooth® umożliwia pacjentom natychmiastowe śledzenie swoich postępów za pomocą aplikacji SleepStyle.



Cichy, zintegrowany projekt.

Zasilanie oraz nawilżacz zostały w pełni zintegrowane, aby ograniczyć zajmowane miejsce na stoliku nocnym.



Zasilane technologią

Odnalezienie równowagi między komfortem a skuteczną terapią.

Początek nowych rzeczy jest zazwyczaj kluczowym momentem. Istotne jest, aby nauczyć się dostosowywać do terapii. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc, począwszy od zastosowania światowej klasy automatycznego algorytmu wykrywania bezdechu ośrodkowego do zapewnienia szeregu innowacyjnych opcji komfortu.



ThermoSmart™

Opracowana na najwyższym światowym poziomie funkcja nawilżania obejmuje podgrzewaną rurę oddechową z technologią AirSpiral™, która została zaprojektowana, aby ograniczyć tworzenie się skroplin do minimum. Udoskonalony algorytm zapewnia komfortowe korzystanie z funkcji nawilżania przez pacjentów.**



SensAwake™

Precyzyjne narastanie przez noc. Kiedy stan czuwania zostaje wykryty, ciśnienie terapii jest automatycznie i niezwłocznie obniżane do bardziej komfortowego poziomu. Ułatwia to powrót do snu i umożliwia skuteczną kontynuację leczenia.



Wspomaganie wydechowe


Dodatkowy poziom komfortu. Automatycznie obniża ciśnienie CPAP podczas wydechu, aby zwiększyć komfort oddychania.

Na bieżąco śledź zaangażowanie pacjenta.

Aplikacja F&P SleepStyle™

Zaprojektowana w celu zwiększenia zaangażowania w terapię. Pacjenci mają dostęp do istotnych informacji, które pozwalają im śledzić postępy i porównywać je z wynikami z poprzednich nocy. Dzięki aplikacji SleepStyle pacjenci mogą:

- Natychmiast przeglądać swoje dane terapii po każdej sesji.
- Śledzić postępy terapii w dziennych, tygodniowych lub miesięcznych przedziałach czasowych.
- Otrzymywać powiadomienia o częstych problemach występujących podczas terapii oraz otrzymywać wskazówki, jak je rozwiązać.

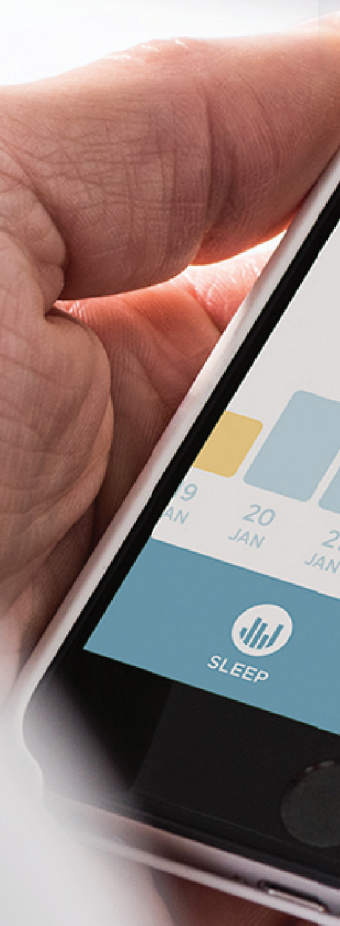



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Dane techniczne produktu

Wymiary	144 wys. x 177 szer. x 183 gł. w mm (5,7 wys. x 7,0 szer. x 7,2 gł. w calach)		
Waga	1,7 kg (3,7 funta) Waga po zapakowaniu (maks.): 2,7 kg (5,9 funta)		
Osiągi	Zakres ciśnień: 4 do 20 cmH ₂ O		
Poziom hałasu	28,0 ± 1,5 dBA		
Pojemność komory wodnej	380 mL do linii maksymalnego napełnienia		
Zgodność z normami	IEC 60601-1 {Ed 3.1}:2012; ISO 80601-2-70:2015; ISO 8185:2007; IEC 60601-1-11:2015; IEC 60601-1-2:2014; Dyrektywa o urządzeniach radiowych (RED)		
Rejestrowanie danych	Urządzenie InfoUSB przechowuje podsumowanie danych dotyczących skuteczności nawet do 5 lat, szczegółowe dane dotyczące skuteczności z 365 dni oraz wysokiej rozdzielczości dane dotyczące ciśnienia, uchodzenia powietrza oraz przepływu z poprzednich 140 godzin. Bez InfoUSB pamięć wewnętrzna urządzenia przechowuje podsumowanie danych dotyczących skuteczności nawet do 1 roku, szczegółowe dane dotyczące skuteczności z 30 dni oraz wysokiej rozdzielczości dane dotyczące ciśnienia, uchodzenia powietrza oraz przepływu z poprzednich 20 godzin.		
Nominalne parametry elektryczne	Nominalne napięcie zasilania	Nominalny prąd wejściowy	Nominalna częstotliwość zasilania
	100-115 V	1,2 A (maks. 2,5 A)	50-60 Hz
	220-240 V	1,10 A (maks. 2,3 A)	50-60 Hz

Funkcjonalności urządzenia F&P SleepStyle AUTO/CPAP

Funkcjonalności	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
W pełni zintegrowany nawilżacz	☑	☑
Automatyczna regulacja ciśnienia	☑	Nie
Technologia ThermoSmart**	☑	☑
SensAwake	☑	☑
Wspomaganie wydechu	☑	☑
Wykrywanie ośrodkowego bezdechu sennego	☑	☑
Narastanie	☑	☑
Automatyczna regulacja wysokości n.p.m.	☑	☑
Kompensacja uchodzenia powietrza	☑	☑
Raporty skuteczności	☑	☑
Raporty zgodności	☑	☑
F&P InfoUSB	☑	☑
Technologia bezprzewodowa Bluetooth*	☑	☑
Modem komórkowy*	☑	☑

Kompatybilność z	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
F&P InfoSmart™	☑	☑
Aplikacja i strona internetowa F&P SleepStyle†	☑	☑

Kody modeli urządzeń REF

Region	SleepStyle Auto	SleepStyle CPAP
Wielka Brytania/Irlandia/Hongkong/Cypr/Malta	SPSAAK#/SPSABK##	SPSCAK#/SPSCBK##
Belgia/Holandia/Luksemburg/Włochy/Francja/RPA	SPSAAW#/SPSABW##	SPSCAW#/SPSCBW##
Polska/Bulgaria/Słowenia/Chorwacja/Grecja	SPSAAE#/SPSABE##	SPSCAE#/SPSCBE##

*Dostępne tylko w niektórych modelach.

**Dostępne tylko w niektórych modelach. Do aktywowania ThermoSmart wymagana jest podgrzewana rura oddechowa ThermoSmart.

†Dostępne tylko w niektórych krajach.

**Części aplikacyjne – pasujące do złącza stożkowego 22 mm (0,86 cala).

#Z modemem

##Bez modemu

Logotyp oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc., a użycie tych znaków przez firmę Fisher & Paykel Healthcare jest dozwolone na mocy licencji. Inne znaki towarowe i nazwy towarowe są własnością ich odnośnym właścicieli.

SleepStyle, InfoSmart, ThermoSmart, AirSpiral oraz SensAwake są znakami towarowymi firmy Fisher & Paykel Healthcare Limited. Informacje patentowe znajdują się na stronie internetowej www.fphcare.com/ip.

CE 0123 Niniejsze urządzenie medyczne jest wyrobem medycznym objętym przepisami prawnymi i zgodnie z tymi przepisami posiada oznakowanie CE.

614852 REV A © 2018 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.fphcare.com.

W zestawie z urządzeniem F&P SleepStyle AUTO/CPAP

- 1 x Torba transportowa
- 1 x Urządzenie SleepStyle
- 1 x Rura oddechowa
- 1 x Przewód zasilania
- 1 x Instrukcja użycia i pielęgnacji
- 1 x Komora wodna
- 1 x Uszczelka komory
- 1 x Uszczelka wylotowa
- 1 x F&P InfoUSB (już w porcie InfoUSB)
- 1 x Filtr powietrza (zamontowany w urządzeniu)
- 1 x Zapasowy filtr powietrza
- 1 x Zapasowy łącznik kątowy (do użytku ze standardową rurą oddechową)
- 1 x Krótki przewodnik SleepStyle

Części zamienne

- 900SPS100 SleepStyle Komora wodna
- 900SPS101 SleepStyle Uszczelka komory
- 900SPS110 SleepStyle Filtry powietrza (2 szt./op.)
- 900SPS111 SleepStyle Filtr powietrza (1 szt.)
- 900SPS120 Rura oddechowa ThermoSmart††
- 900SPS121 Standardowa rura oddechowa z łącznikiem kątowym††
- 900SPS122 SleepStyle Łącznik kątowy (do użytku ze standardową rurą oddechową)
- 900SPS140 SleepStyle Pokrywa urządzenia
- 900SPS141 SleepStyle Uszczelka wylotowa
- 900SPS142 SleepStyle Torba transportowa
- 900SPS162 SleepStyle Przewód Zasilania – Europa
- 900SPS165 SleepStyle Przewód Zasilania – Wielka Brytania
- 900SW101 F&P InfoUSB

Zamienne instrukcje użytkownika

- 900SPS171 Instrukcja użycia i pielęgnacji – pozostałe kraje
- 900SPS176 Instrukcja użycia i pielęgnacji – Europa Wschodnia
- 900SPS177 Instrukcja użycia i pielęgnacji – Europa Zachodnia
- 900SPS173 Krótki przewodnik SleepStyle