

# HANS RUDOLPH V2



Maski twarzowe do wentylacji nieinwazyjnej

Maski Hans Rudolph zostały zaprojektowane z myślą o efektywnej terapii NIV zarówno w warunkach szpitalnych jak i w opiece domowej.

Przemyślane rozwiązania zapewniają pacjentom wygodę i komfort użytkowania, a wysoka jakość i trwałość masek są ich cechą wyróżniającą.



## Maska V2 Hans Rudolph do wentylacji NIV

- Zapewnia doskonałą stabilność na twarzy pacjenta oraz ułatwia regulację docisku i dopasowania dzięki wykorzystaniu 5 punktów regulacji zapewniających optymalnie anatomiczne umiejscowienie maski
- Gwarantuje komfort pacjenta i swobodę funkcjonowania, nie ogranicza widoczności
- Stabilizacja na podbródku i anatomiczny kształt eliminują powstawanie zmian skórnych
- Możliwość zastosowania w NIV, CPAP i BiPAP
- Łączniki dostosowane do różnych typów aparatów (prosty, AAV, z przeciekiem)
- Wiele metod dezynfekcji (również w zmywarce do naczyń)
- Wielorazowe i dla jednego pacjenta

**Autoryzowany przedstawiciel**

 **DUTCHMED**

85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 14  
Tel. 52/345-31-15, Fax. 52/345-31-15 wew. 14  
e-mail: [dutchmed@dutchmed.pl](mailto:dutchmed@dutchmed.pl)  
[www.dutchmed.pl](http://www.dutchmed.pl)



**Hans RUDOLPH, inc.**  
8325 Cole Parkway,  
Shawnee, KANSAS  
66227 U.S.A.



### WSKAŹNIK DOBORU MASKI

Wytyczne: Pomiar długości służy do określenia właściwego rozmiaru maski Hans Rudolph, aby była ona jak najlepiej dopasowana do indywidualnych cech pacjenta.

Pomiar: mięśnie twarzy pacjenta powinny być rozluźnione a szczęka zamknięta. Umieść końcówkę wskaźnika w najgłębszym punkcie zagłębienia nosa (nosowo-czołowego) i odczytaj właściwy rozmiar, w punkcie którym znajduje się dół podbródka. Szare pola wskazują rozmiar maski.

Niniejszy wskaźnik jest wyłącznie narzędziem pomocniczym. Z uwagi na możliwość występowania dodatkowych czynników zewnętrznych, rzeczywisty rozmiar może się różnić od wskazanego.

W PRZYPADKU WSKAZANIA MIĘDZY DWOMA ROZMIARAMI, ZALECA SIĘ WYBÓR MNIEJSZEGO ROZMIARU.

**HANS RUDOLPH, inc.**

PETITE (P)

EXTRA-SMALL (XS)

SMALL (S)

MEDIUM (M)

LARGE (L)

[www.rudolphkc.com](http://www.rudolphkc.com)

**V2 Maska do wentylacji nieinwazyjnej z przeciekiem** nosowo-ustna z łącznikiem (OD 22 mm), zastawką przeciwasfiksyjną (AAV) i uprzężą.

**V2 Maska do wentylacji nieinwazyjnej bez przecieku** nosowo-ustna z łącznikiem (ID 22 mm), zastawką przeciwasfiksyjną (AAV) i uprzężą.

**V2 Maska do długotrwałej wentylacji nieinwazyjnej** nosowo-ustna z łącznikiem (ID 22 mm) i uprzężą.



## DUTCHMED

### WSKAŹNIK DOBORU MASKI

Wytyczne: Pomiar długości służy do określenia właściwego rozmiaru maski Hans Rudolph, aby była ona jak najlepiej dopasowana do indywidualnych cech pacjenta.

Pomiar: mięśnie twarzy pacjenta powinny być rozluźnione a szczęka zamknięta. Umieść końcówkę wskaźnika w najgłębszym punkcie zagłębienia nosa (nosowo-czołowego) i odczytaj właściwy rozmiar, w punkcie którym znajduje się dół podbródka. Szare pola wskazują romiar maski.

Niniejszy wskaźnik jest wyłącznie narzędziem pomocniczym. Z uwagi na możliwość występowania dodatkowych czynników zewnętrznych, rzeczywisty rozmiar może się różnić od wskazanego.


W PRZYPADKU WSKAZANIA MIĘDZY DWOMA ROZMIARAMI, ZALECA SIĘ WYBÓR MNIEJSZEGO ROZMIARU.

Nr kat.	Wielorazowego użytku (sterylizacja do 25 cykli)
113485	Seria 7600 rozmiar L
113486	Seria 7600 rozmiar M
113487	Seria 7600 rozmiar S
113488	Seria 7600 rozmiar XS
113489	Seria 7600 rozmiar Petite
<b>Dla jednego pacjenta</b>	
113555	Seria 6600 rozmiar L
113556	Seria 6600 rozmiar M
113557	Seria 6600 rozmiar S
113558	Seria 6600 rozmiar XS
113559	Seria 6600 rozmiar Petite

Nr kat.	Wielorazowego użytku (sterylizacja do 25 cykli)
113500	Seria 7700 rozmiar L
113501	Seria 7700 rozmiar M
113502	Seria 7700 rozmiar S
113503	Seria 7700 rozmiar XS
113504	Seria 7700 rozmiar Petite
<b>Dla jednego pacjenta</b>	
113550	Seria 6700 rozmiar L
113551	Seria 6700 rozmiar M
113552	Seria 6700 rozmiar S
113553	Seria 6700 rozmiar XS
113554	Seria 6700 rozmiar Petite

Nr kat.	Wielorazowego użytku (sterylizacja do 25 cykli)
113510	Seria 7500 rozmiar L
113511	Seria 7500 rozmiar M
113512	Seria 7500 rozmiar S
113513	Seria 7500 rozmiar XS
113514	Seria 7500 rozmiar Petite
<b>Dla jednego pacjenta</b>	
113530	Seria 6500 rozmiar L
113531	Seria 6500 rozmiar M
113532	Seria 6500 rozmiar S
113533	Seria 6500 rozmiar XS
113534	Seria 6500 rozmiar Petite

Maska składa się z trzech elementów, część twarzowa to tylko jeden element.

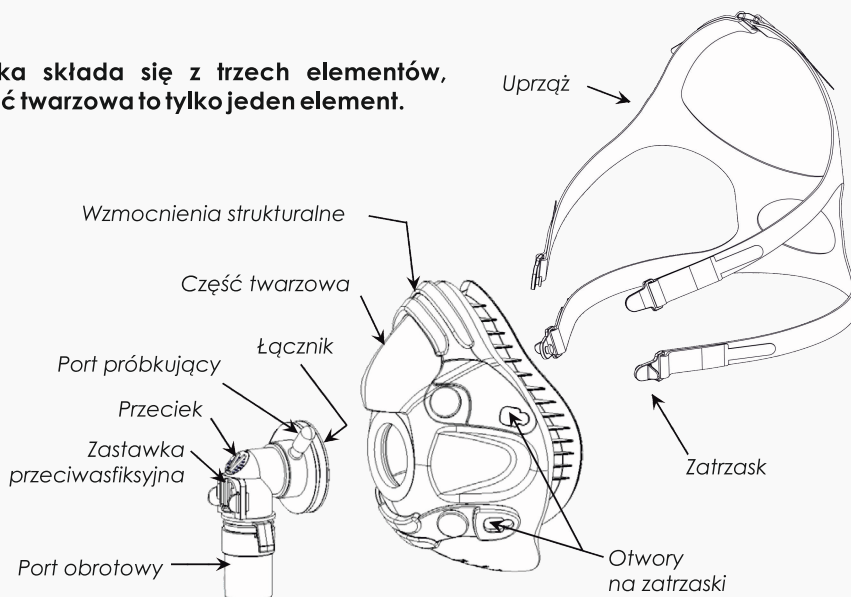

HANS RUDOLPH, inc.

PETITE (P)

EXTRA-SMALL (XS)

SMALL (S)

MEDIUM (M)

LARGE (L)