

**SIT 4**

**SIT 4 PLUS**

**SIT 4 PLUS E**

Fotele  
do badań  
i zabiegów  
laryngologicznych

Komfort pracy  
dla lekarza,  
wygoda dla pacjenta



**otoprnt®**

# SIT 4

## SIT 4 PLUS

### SIT 4 PLUS E



## Fotele do diagnostyki i zabiegów laryngologicznych

Zastosowanie najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesny design sprawiają, że fotele laryngologiczne z serii SIT 4 są unikalne zarówno pod względem formy, jak i funkcjonalności.

Niewątpliwą zaletą tych foteli jest łatwy dostęp do wszystkich regulowanych elementów, co istotnie wpływa na łatwość obsługi i komfort użytkownika. Fotel został zaprojektowany tak, aby lekarz podczas badania czy drobnego zabiegu zawsze miał łatwy dostęp do pacjenta.

Fotel jest elektrycznie podnoszony o 20 lub 30 cm. Dzięki uniesieniu fotela na odpowiednią wysokość, lekarz zawsze pracuje w ergonomicznej, wygodnej dla niego pozycji, zarówno siedząc jak i stojąc. Aby przeprowadzić badanie dziecka, wystarczy podnieść fotel na wysokość 30 cm – żadne dodatkowe akcesoria nie są potrzebne.

W modelu SIT 4 PLUS podłokietniki i podnóżek automatycznie zmieniają pozycję, adekwatnie do nachylenia oparcia, aż do pełnego wyprostowania w pozycji horyzontalnej. Zapewnia to pacjentowi komfortową pozycję podczas badania. W przypadku badania pacjentów z zaburzeniami równowagi, bardzo łatwo i szybko można ustawić fotel w pozycji Trendelenburga (oparcie pod kątem  $-10^{\circ}$ ).

Fotel laryngologiczny SIT dostępny jest również w wersji, w której obrót siedziska i nachylenie oparcia regulowane są elektrycznie (model SIT 4 PLUS E).

# Funkcjonalność i komfort



Wyjątkową cechą foteli SIT jest **nachylona „do przodu”** teleskopowa kolumna fotela. Dzięki temu, pacjent jest automatycznie

przybliżony do lekarza przy podnoszeniu fotela. Wersja z opcją podnoszenia na wysokość 30 cm, umożliwia komfortowe


badanie nie tylko dorosłych, ale również dzieci, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych akcesoriów.



Jedną z dostępnych opcji jest obrót samego siedziska, z mechanizmem blokującym jego pozycję co 90°. Miękkie podłokietniki można podnieść do góry, tak aby ułatwić dostęp do fotela pacjentom korzystającym z wózka inwalidzkiego czy też osobom ze znaczną nadwagą.



Wersja z zablokowanym podnóżkiem (SIT 4)

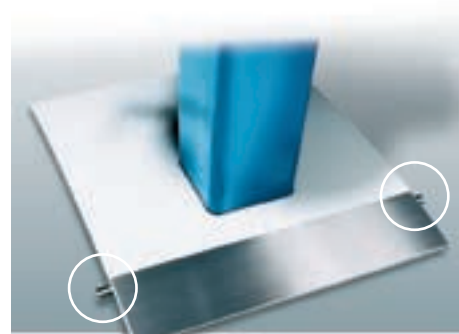


Wysokość fotela regulowana jest przyciskami nożnymi, umiejscowionymi po obydwu stronach podstawy. Dostępna jest również wersja z zewnętrznym przyciskiem nożnym. Szeroka platforma zapewnia stabilną pozycję fotela. Stalowa powłoka podstawy fotela zabezpiecza przed szybkim zniszczeniem i zużyciem.

# SIT 4 SIT 4 PLUS SIT 4 PLUS E

## Parametry techniczne

<b>Zakres podnoszenia fotela</b>	do 20 cm (opcjonalnie do 30 cm)
<b>Mechanizm podnoszenia</b>	za pomocą silnika elektrycznego
<b>Zakres regulacji wysokości siedziska</b>	od 51 do 71 cm (opcjonalnie od 51 do 81 cm)
<b>Zakres rotacji</b>	360° z mechanizmem „przeskoku” co 90°, opcjonalnie obracanie sterowane elektrycznie $\pm 180^\circ$
<b>Hamulec blokujący pozycję fotela</b>	przyciski z prawej i lewej strony podstawy
<b>Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia</b>	od 10° w przód do 10° poza pozycję horyzontalną, z „zaznaczeniem” pozycji 30°, opcjonalnie elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia (SIT 4 PLUS E)
<b>Podłokietniki</b>	automatycznie zmieniana pozycja podłokietników i podnóżka, zgodnie ze zmianą kąta nachylenia oparcia
<b>Zaglówek</b>	anatomiczny kształt dopasowany do głowy pacjenta, regulowana wysokość (do 15 cm), możliwość zdemontowania zagłówka
<b>Obudowa</b>	trwała metalowa obudowa, podstawa zabezpieczona powłoką ze stali nierdzewnej
<b>Waga</b>	100 kg
<b>Zasilanie</b>	110-230 V~, 50/60 Hz, 550 W
<b>Znak CE</b>	zgodnie z normą MDD 93/42/EEC

Wszelkie prawa zastrzeżone przez producenta

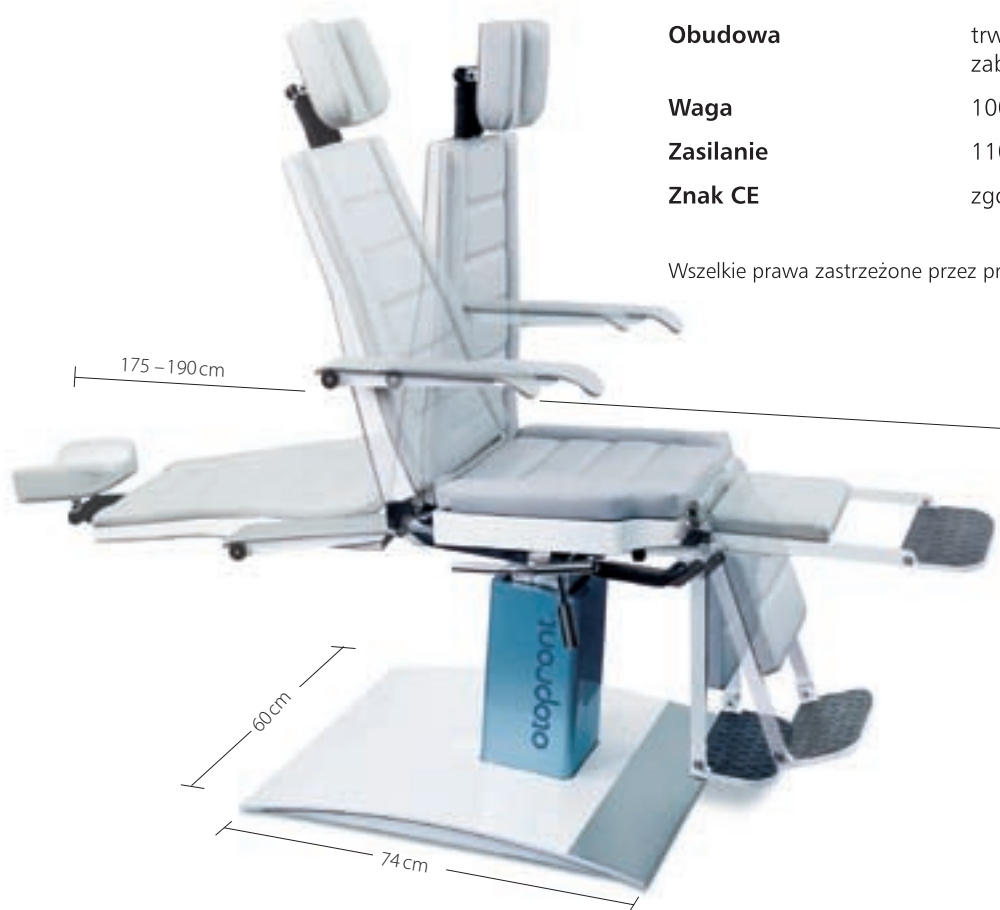

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

### Medag Aparatura Medyczna

ul. A. Uznańskiego 2a, 50-570 Wrocław

tel. 71 336 48 09; fax. 71 336 48 45

e-mail: [biuro@medag.pl](mailto:biuro@medag.pl)

[www.medag.pl](http://www.medag.pl)

**medag**  
Aparatura medyczna

### Happersberger otopront GmbH

Medical Equipment Manufacturer

D-65329 Hohenstein · P.O.Box · Germany

Tel. +49-6120-9217-0 · Fax+49-6120-921760

[www.otopront.com](http://www.otopront.com) · [info@otopront.com](mailto:info@otopront.com)

**otopront**<sup>®</sup>