

MEVACS 40 MOD-1

Ssak medyczny

Ssak medyczny Mevacs MOD-1 to:

- Sterowanie z ekranu dotykowego
- Elektroniczny system zabezpieczenia przed przelaniem
- Wysokie podciśnienie do 93 kPa



Nowa linia ssaków MEVACS to ergonomiczny kształt, nowe funkcje i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego.



Tryby pracy:


- odsysanie w zakresie od 0 do 93 kPa z funkcją automatycznego trybu gotowości
- odsysanie delikatne w zakresie 5 do 20 kPa (drenaż)
- odsysanie pulsacyjne pomiędzy dwoma wybranymi przez użytkownika wartościami
- w pełni automatyczna ekstrakcja próżniowa

MEVACS 40 MOD-1

Ssak medyczny

Główne cechy:

- Pompa bezolejowa próżniowa
- Bardzo cicha praca
- Filtr antybakteryjny hydrofobowy
- Bezkontaktowy elektroniczny czujnik przepełnienia
- Pojemniki z zaworem bezpieczeństwa
- Dodatkowy zbiornik bezpieczeństwa
- Praca ciągła bez możliwości przegrzania pompy
- Szeroki zakres akcesoriów: nietłukące pojemniki 2- i 4-litrowe do sterylizacji w autoklawie,
- sterownik nożny, wózek z koszem i wiele innych

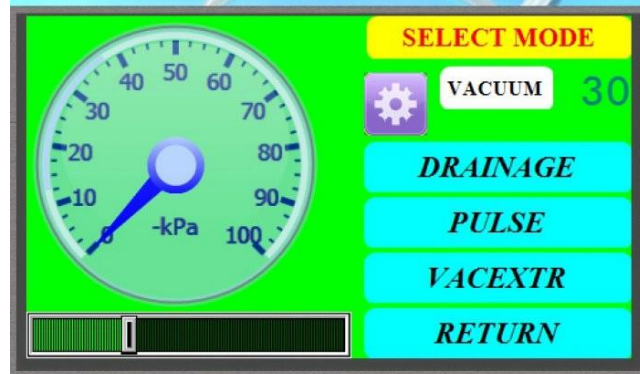

Parametry techniczne:

Maksymalne podciśnienie	93 kPa (700 mmHg)
Tryb drenaż	Do – 20 kPa (150 mmHg)
Maksymalny przepływ powietrza	40 l/min
Zasilanie	230V/50-60 Hz
Elektroniczna kontrola funkcji	<ul style="list-style-type: none"> • Pełny zbiornik • Zużyty filtr