

LASTURA BABY

WANNA DO MASAŻU WIROWEGO dla dzieci i niemowląt



Lastura Baby to wanna do masażu wirowego dla dzieci i noworodków.

- **34 dysze** dostosowane do wykonywania specjalistycznego masażu wirowego na ciele małego dziecka lub niemowlęcia
- **2 strefy masażu**
- Lastura Babynie wymaga stałych przyłączy wodno – kanalizacyjnych
- **kółka** jezdne w podstawie wanny umożliwiają łatwe jej przemieszczanie
- regulacja wysokości wanny przez elektryczny napęd przyspiesza przygotowanie i ułatwia obsługę urządzenia (dzięki dostosowaniu odpowiedniej wysokości wanny wykonywanie zabiegu jest łatwe dla osoby obsługującej, która nie musi się pochylać i ma łatwy dostęp do dziecka)

Dane techniczne:

Ilość dysz do hydromasażu	34
Pojemność wanny	42l
Zasilanie	230V/50Hz
Moc pompy	800VA
Waga	71kg
Wymiary	1060 x 660 x 795 – 1445
Czas napełniania wanny	1,3 min.
Czas opróżniania wanny	ok. 2,5-3 min




CHIRANA PROGRESS
MEDI PROGRESS GROUP



Wanna LASTURA BABY to:

Luksusowy design

Wanny marki Chirana Progress cechuje elegancji i nowoczesny wygląd. Idealnie wpisują się w każde wnętrze, nadając im luksusowego charakteru. Możliwość wyboru koloru wanny z dużej palety barw pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do estetyki otoczenia lub swoich upodobań, oraz na nadanie tym pomieszczeniom odpowiedniego charakteru.



Wytrzymały materiał

Skorupy wanien wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmocnianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie różnych czynników materiał. Dzięki temu w wannach możliwe jest wykonywanie zabiegów balneoterapii z zastosowaniem wód kwasowęglowych, termalnych, solanek i innych.



Komfort pacjenta

Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress zapewniają komfort dla pacjenta. Do wanny proponujemy wygodne krzesło obrotowe.

Łatwe sterowanie wanną

Obsługa wanny jest intuicyjna i bezproblemowa. Wszystkie przyciski i zawory umiejscowione są tak, by maksymalnie ułatwić osobom prowadzącym zabieg pracę.

Wyjątkowo trwałe dysze

Dysze w wannach Chirana Progress o unikalnej, opatentowanej, prawnie chronionej konstrukcji są praktycznie niezniszczalne. Posiadają własny system osuszania.

Łatwa konserwacja

- prysznic do czyszczenia wanny z zaworem odcinającym
- w opcji elektromagnetyczny zmiękczac wody (zapobiega osadzeniu się kamienia)

Oszczędność kosztów

- Możliwość przyłączenia do systemu recyklingu (możliwość napełniania i wypuszczania wody z wanny do systemu recyklingu)
- Niecki wanien wyprofilowane są tak, by ograniczyć niepotrzebne zużycie wody przy napełnianiu



Wysokie bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia do hydroterapii firmy Chirana Progress są wyrobami medycznymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych, która implementuje dyrektywę 93/42/EWG) przeznaczonymi do profesjonalnego użytkowania w zakładach opieki zdrowotnej, w związku z czym podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa niż inne wanny tego typu.

Wanny wykonane są z bezpiecznych nieszkodliwych dla zdrowia materiałów z odpowiednim certyfikatem. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku wilgotnym ma właściwości antibakteryjne.

Dla bezpieczeństwa pacjenta wanny można wyposażyć w poręcze i schodki z antypoślizgową powierzchnią wspomagające wchodzenie i wychodzenie z wanny. Dodatkowo wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.



Bezproblemowe serwisowanie

Sieć punktów serwisowych w całym kraju.

Standardowe wersje kolorystyczne:



W opcji możliwość zamówienia wanny w dowolnym kolorze.

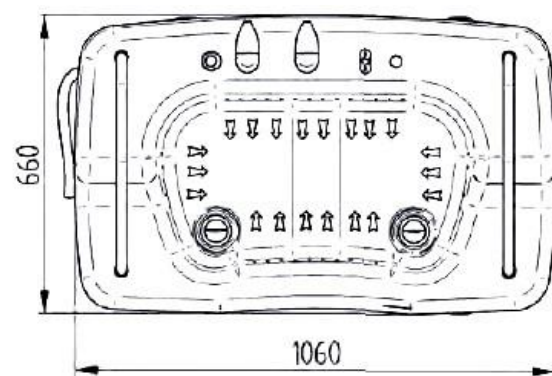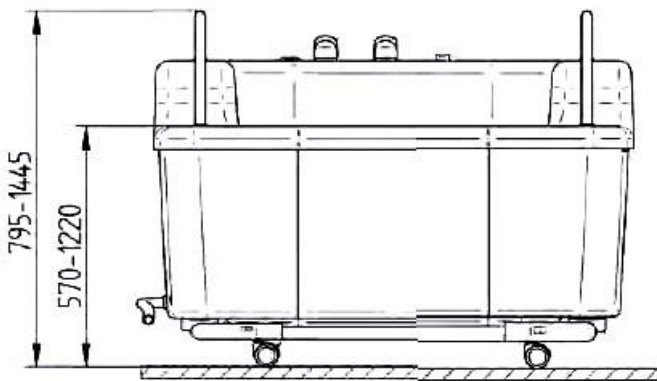



CHIRANA PROGRESS
 MEDI PROGRESS GROUP

