

ZESTAW COMBO - BIPAP z TLENEM

Koncentrator tlenu zintegrowany z respiratorem BIPAP, jest rozwiązaniem dla pacjentów wymagających leczenia BIPAP i podawania tlenu.




Poprawia wygodę i jednocześnie zwiększa efekt leczenia

Na wyświetlaczu respiratora są dane o stężeniu tlenu, wykresy ciśnienia i przepływu i inne parametry leczenia w czasie rzeczywistym.

Podczas fazy wydechu gdy koncentrator tlenu odbierze sygnał z CPAP, zmniejszy ilość tlenu na wyjściu i zwiększy w fazie wdechu.

To znacznie poprawia efektywność leczenia.

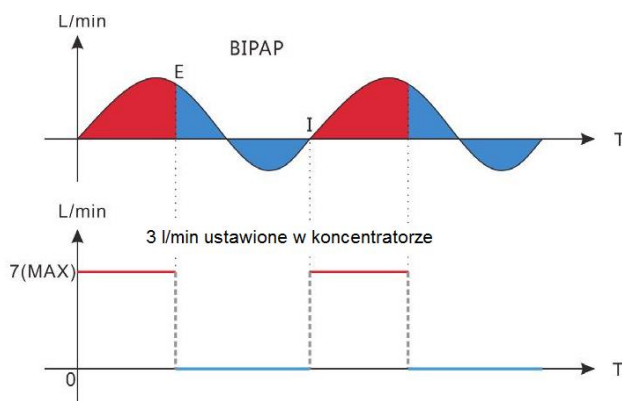

Typ wentylacji : Nieinwazyjny, dodatnie ciśnienie, BIPAP

Tryb : CPAP, S, T, S/T

IPAP : 4-30cmH₂O , EPAP: 2-25cmH₂O

Częstotliwość oddechu : 2 – 40

Czas wdechu : 0.5s – 15 sek

Objętość oddechowa : 100 – 2000ml

Przepływ tlenu w koncentratorze 1 do 5l/min

Stężenie tlenu z koncentratora : 93%

