





Kaniule i Trokary Laparoskopowe

2020

Kaniule laparoskopowe, 3-częściowe, korpus wykonany z termoodpornego tworzywa, proste i przyjazne do składania/rozkładania, bezklapkowe – wyposażone w silikonowe zawory stożkowe wielorazowego użytku, nie uszkodzają optyk, nie haczą narzędzi, lekkie, średnice kaniul dla łatwiejszej identyfikacji kodowane kolorami, tubusy metalowe gładkie lub gwintowane oraz z tworzywa sztucznego także gładkie lub gwintowane do wyboru. Wszystkie elementy składowe dostępne jako części zamienne. Autoklawowalne. Kaniule dostępne w wersji standardowej i bariatrycznej. Produkcja niemiecka.

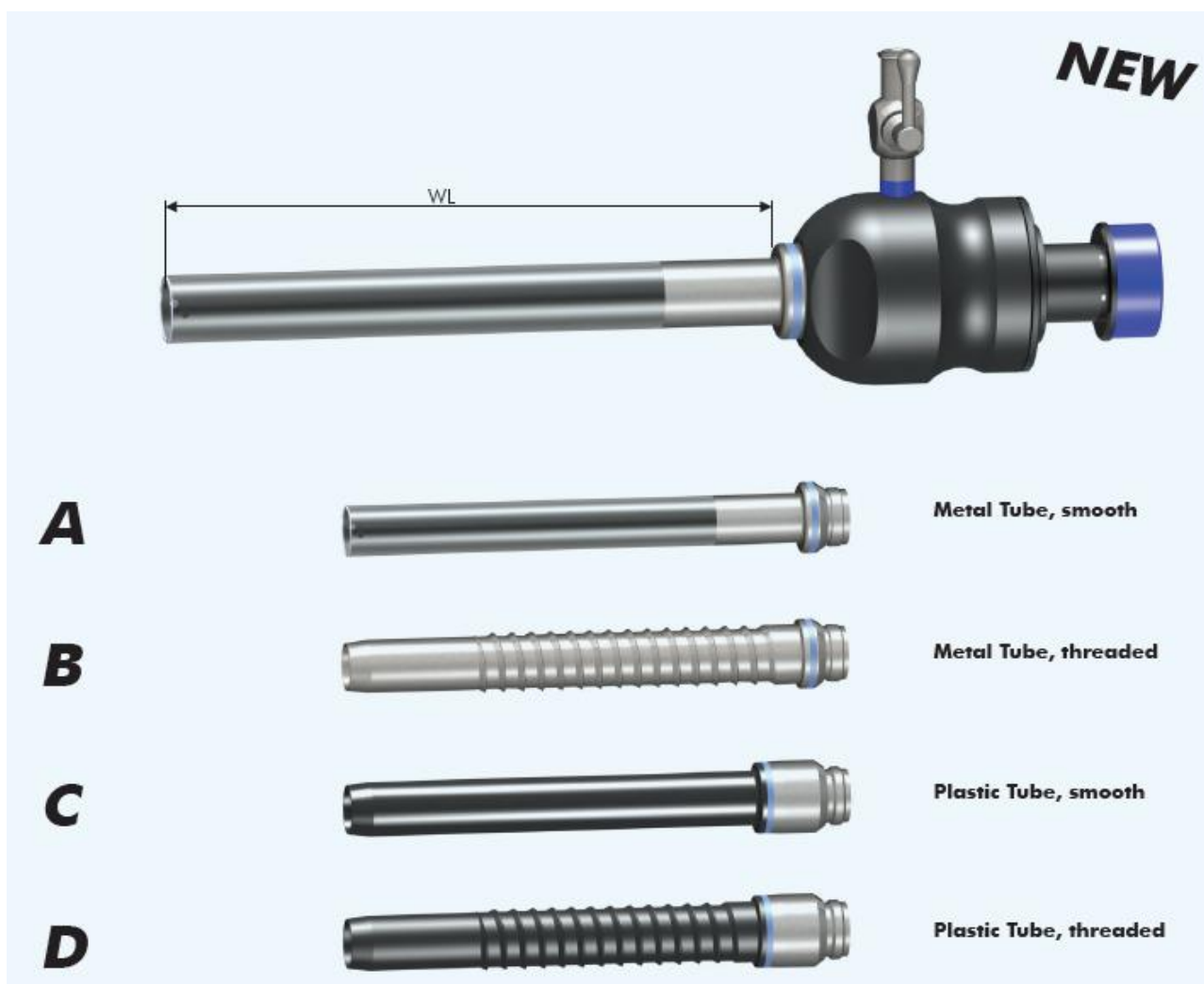

W uzupełnieniu metalowe stopery do gładkich, metalowych tubusów:

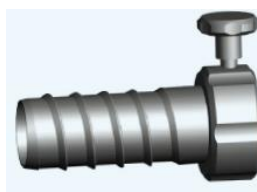


Grot tzw. "bezpieczny" z automatycznym zabezpieczeniem ostrza, typ "blokowany".



Tnący grot chowany automatycznie do kaniuli z zablokowaniem możliwości ponownego, niekontrolowanego wysunięcia. Dostępne w wersji standardowej i bariatrycznej.



Grot tzw. „bezpieczny” typu tnąca kaniula, rozpychająco-rozcinający, 3 częściowy.
Elementem tnącym jest zewnętrzna kaniula, elementem rozpychającym/rozdzielającym tkanki jest wewnętrzny obturator w kształcie litery „V”.

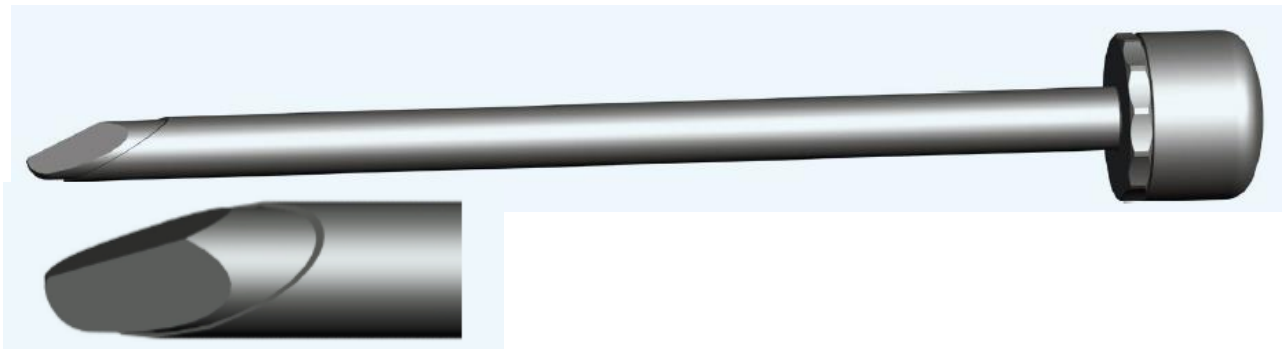

Grot ostry, piramidalno-rozpychający, kaniulowany, (kanał diagnostyczny informujący o wejściu pod otrzewną).



Grot ostry, piramidalny.





Redukcje do kaniuli: pierwsza zakładana na szyję kaniuli i nasuwana z boku, druga z gumową zapinką zakładaną na szyję kaniuli, nakładana z góry – do wyboru.



... oraz tzw. redukcje długie...




Dostępne są także kaniule tradycyjne „z klapką”...



... oraz wersje bariatryczne kaniul z grotami bezpiecznymi...



W stałej sprzedaży uszczelki i zawory

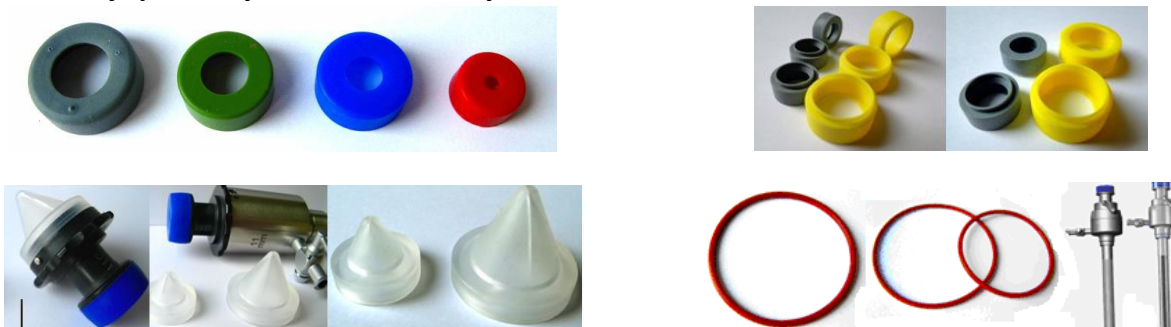

Kontakt biuro:

Tel. 883 013 093, 795 462 115, Fax: 32 352 09 33, e-mail: biuro@yomed.pl