

Hybrid

Il primo materasso antidecubito a zone differenziate con compensazione pressoria automatica.

The first antidecubitus mattress with different sectors, working with an automatic pressure compensation system.



EUROAUSILI

SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO
ANTIDECUBITUS SYSTEMS AND ACCESSORIES

Hybrid

Hybrid è un materasso antidecubito estremamente confortevole che unisce i vantaggi del poliuretano espanso alla funzione della bassa pressione continua creando così punti di contatto sempre diversi fra la cute del paziente e la superficie.

Hybrid is a very comfortable antidecubitus mattress able to always guarantee low contact pressure between the patient skin and the mattress' surface by the simultaneous action of the Polyurethane foam elements and of the air displacement.



Cover



- Tessuto bielastico
- Impermeabile ai liquidi
- Traspirante al vapore
- Fodera con ioni d'argento (antibatterica ed antimicotica)
- Bistretch fabric
- Waterproof
- Breathable to vapor
- Silver ions cover (antibacterial, antimycotic)

Hybrid è composto da uno scafo di contenimento realizzato in poliuretano espanso e da 15 elementi interni suddivisi in 3 specifiche aree:

- Area 1: 2 elementi più soffici per un comfort ideale sulla testa del paziente.
- Area 2: 5 elementi a rigidità maggiore per un sostegno ideale della zona lombare e sacrale.
- Area 3: 8 elementi con sezione ridotta per lo scarico ottimale delle pressioni sulla parte delle gambe e dei talloni.

Grazie alla particolare struttura ed all'alta resilienza, il materasso Hybrid è in grado di redistribuire l'aria al suo interno in maniera ottimale ed usato senza compressore (modalità passiva) è indicato per pazienti a basso/medio rischio.

Hybrid is made of a Polyurethane foam case containing 15 different elements divided in 3 sectors:


- Sector 1: 2 softer elements for an ideal comfort of the patient's head.
- Sector 2: 5 higher density elements for optimal support of the sacral and lumbar zone.
- Sector 3: 8 elements with a reduced height to allow the best pressure discharge of the lower limbs and heels.

Due to its particular structure, the Hybrid mattress is able to perfectly redistribute the internal air so as to fit low/medium risk patients when used without compressor (passive mode).




MODALITÀ ATTIVA - *POWERED MODE*

Alternanza a 2 vie (2 way)

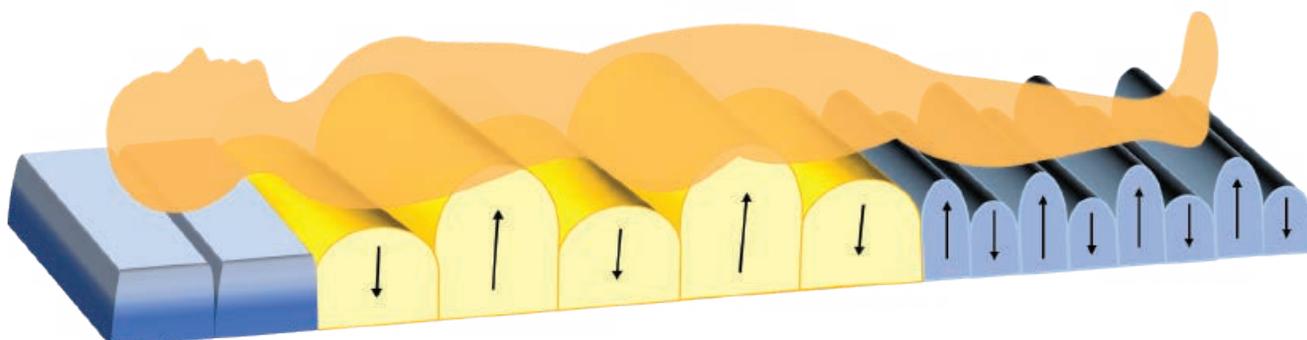

Compressore opzionale
Compressor option

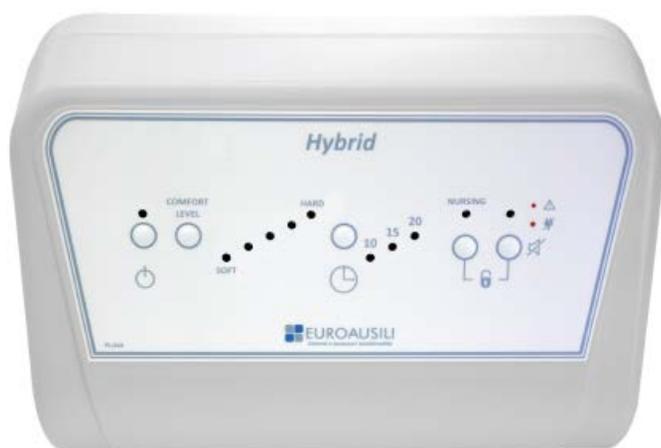

Caratteristiche tecniche

- Pazienti a medio/alto rischio
- Pannello di controllo con comando soft-keys
- Modalità statica o dinamica
- Regolazione del comfort su 5 livelli
- Blocco tasti per evitare modifiche alle impostazioni garantendo una sicurezza ottimale del sistema
- Allarmi visivi ed acustici silenziabili
- Durata del ciclo di alternanza variabile (10-15-20 minuti)
- Funzione nursing

Technical features

- *Medium/high risk patients*
- *Soft-keys control panel*
- *Static or dynamic mode*
- *Adjustable comfort within 5 pressure levels*
- *Automatic keyboard locking to ensure safety and to avoid unwanted setup changes*
- *Visual and acoustic alarm, provided with silencer*
- *Time cycle: 10-15-20 minutes*
- *Nursing function*

Euro Ausili si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecniche o commerciali ritenute utili, pertanto i dati e le informazioni riportate possono subire modifiche e/o aggiornamenti.
Euro Ausili is free to make any useful technical and commercial changes that are believed to be necessary at any time and without notice.



Made in Italy

La produzione è interamente italiana con macchinari all'avanguardia in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in tempi rapidi con un elevato standard qualitativo.

The production is entirely Italian with advanced machinery capable of responding to customer needs quickly and with a high quality standard.

CE



EUROAUSILI S.r.l.

Stabilimento e Show Room:
Via R. Cuttica, 43/45
20025 Legnano (MI) - Italy

tel. +39.0331.542850/0331.440931
fax +39.0331.547929

Stabilimento:
Via Genova, 21
20020 Villa Cortese (MI) - Italy

web: www.euroausili.it
email: info@euroausili.it



Management
System
ISO 9001:2015
EN ISO 13485:2016



www.tuv.com
ID 918625193

www.euroausili.it