


# F&P AIRVO 2

Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu AIRVO™ 2

Urządzenie AIRVO 2 generuje wysokie przepływy ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych, które są dostarczane do pacjenta za pomocą różnych nosowych i tracheostomijnych części kontaktujących się z pacjentem oraz masek.

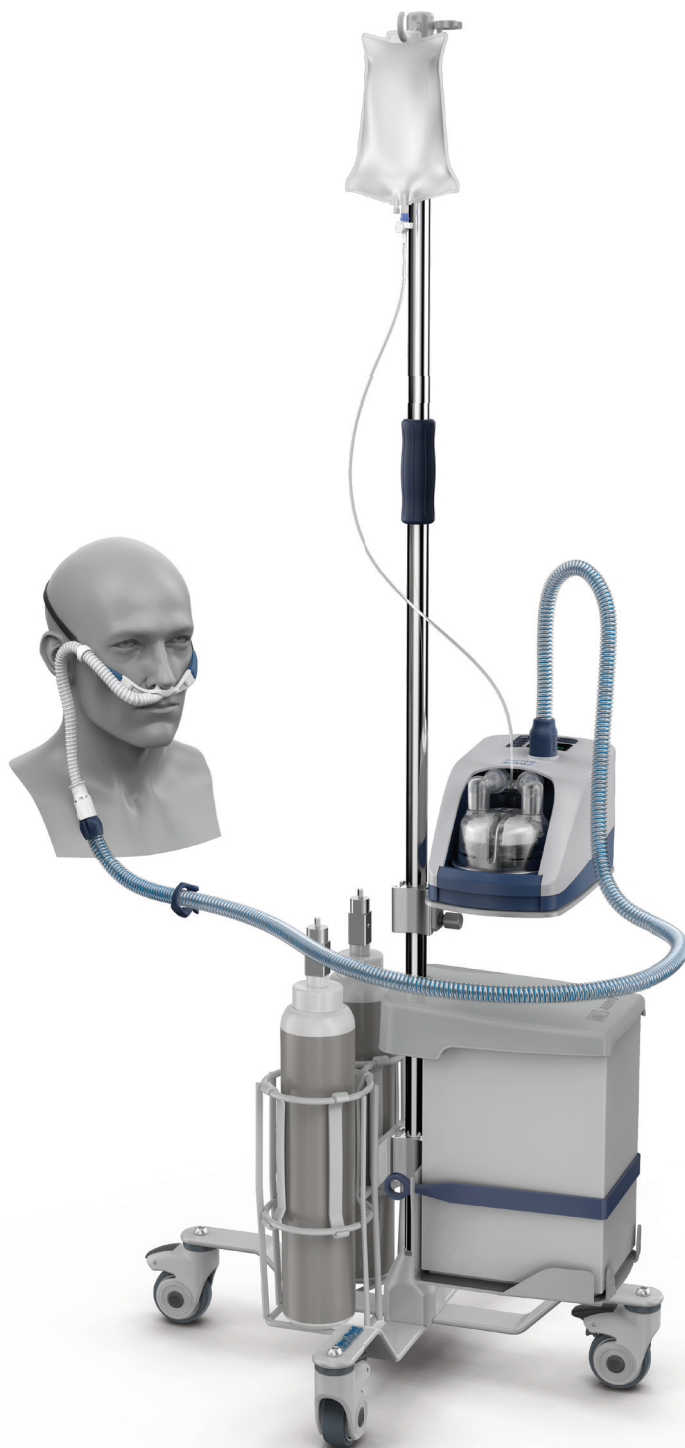

## AIRVO 2 | FUNKCJE

Dzięki wbudowanemu generatorowi przepływu oraz innowacyjnemu systemowi podawania tlenu urządzenie AIRVO 2 jest skutecznym i wszechstronnym rozwiązaniem w terapii tlenowej.

### Wysoka wydajność

- Zaprojektowane, aby przewyższać standard ISO w zakresie nawilżania dróg oddechowych
- Do 60 L/min dodatkowego tlenu

### Uniwersalność

- Różnorodność części kontaktujących się z pacjentem Optiflow™ przeznaczonych do górnych dróg oddechowych oraz do pominięcia górnych dróg oddechowych
- Szeroki zakres przepływu: 2 - 60 L/min

### Konfiguracja i stosowanie

- Menu ustawień na wyświetlaczu
- Zintegrowana opcja mieszania O<sub>2</sub>
- Wbudowany czujnik O<sub>2</sub>
- Sondy lub zewnętrzne źródła powietrza nie są wymagane

## AKCESORIA



### NAWILZACZ Z WBUDOWANYM GENERATOREM PRZEPŁYWU AIRVO 2

Przeznaczenie	Nawilżacz AIRVO 2 służy do leczenia samodzielnie oddychających pacjentów, którzy skorzystaliby z podania im ograniczonych i nawilżonych gazów oddechowych o wysokim przepływie. Mogą to być na przykład pacjenci z ominięciem górnych dróg oddechowych. W zależności od rodzaju części kontaktującej się z pacjentem pacjenta, przepływ może wynosić 2 - 60 L/min. Urządzenie AIRVO 2 jest przeznaczone dla pacjentów hospitalizowanych oraz przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej.
Wylot wilgoci	Spełnia wymogi normy ISO 8185:2007
Ustawienia prędkości przepływu	Od 10 do 60 L/min (regulacja o 5 L/min) (domyślnie) Od 2 do 25 L/min (regulacja o 1 L/min) (tryb Junior)
Części kontaktujące się z pacjentem	Kaniule donosowe F&P Optiflow+ Rurki tracheostomijne F&P Optiflow+ Maski ze standardowym stożkiem medycznym 22 mm
Modele	PT10IAZ / PT10IEE / PT10IEW / PT10IUUK / PT10IUS / PT10IAN / PT10IJP / PT10IKR
Wymiary	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 cala x 6,7 cala x 6,9 cala)
Masa	2,2 kg (4,8 funta) - tylko urządzenie 3,4 kg (7,5 funta) - zapakowane w torbę z akcesoriami
Parametry elektryczne	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (maks. 2,4 A) 220-240 V - 1,8 A (maks. 2,0 A)

Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, AIRVO i Optiflow to znaki towarowe firmy Fisher & Paykel Healthcare.